

エレベーター B 型 スピアー

槍状の薄い先端部が歯根膜空隙へ入り込み歯根膜線維を鋭利に切断。周辺組織への侵襲を最小限に抑えるため、インプラント即時埋入の抜歯に有効です。




●槍状の先端が、残根等の見つけにくい歯根膜空隙の探知を可能にします。



●薄い先端部で、狭窄している歯根膜空隙にも挿入できます。

【使用方法】

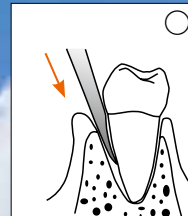


●先端部を歯根膜空隙に根尖側方向へ挿入することにより、歯周靭帯を切断し、楔作用で歯牙を挺出させます。


【注意点】



●この作用で歯根を持ち上げるような操作は行わないでください。先端部が破折、変形する恐れがあります。

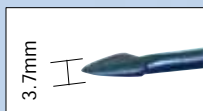

コード No.101158
標準価格 各¥8,800

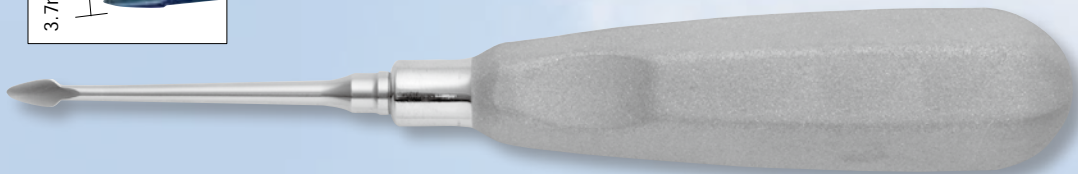

1S (ストレート)

【#1C (カーブ)】



●先端部が反っているため、歯軸に合わせて挿入しづらい臼歯部での使用に有効です。

【#1R (リバース)】



●先端部が内側に反っているため、臼歯部の遠心面や舌・口蓋側からのアプローチに有効です。

1C (カーブ)

1R (リバース)



2



3

【#2・#3】



●臼歯部などストレートシャंकでは届きにくい部位に有効です。
●作業部の中心がハンドルの延長線上になるように設計されているため、操作バランスがよく、感覚伝達性に優れています。

医療機器届出番号 11B1X1000645D005 一般名称 歯科用エレベーター

※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※掲載製品の標準価格は、2016年10月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。



製造販売元 株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

<http://www.dental-plaza.com/>