


ルートチップエレベーター



- 薄い先端部が狭い狭窄した歯根膜空隙にもスムーズに挿入できます。
- 先端角度のラインナップが揃い、残根の部位・傾斜・開口量などに合わせて、アクセスしやすい1本をセレクトできます。

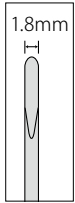

ストレート



#1 S-0
コード No.16810
標準価格 8,700円




●前歯部から小臼歯部あたりまでは、先端部を歯軸と一致させやすいため、先端方向がわかりやすいストレートをセレクト。
臼歯部では初めの歯根膜空隙の拡大に有効です。

カーブ




#1 S-15
コード No.16811
標準価格 8,700円
カーブ角度/15°

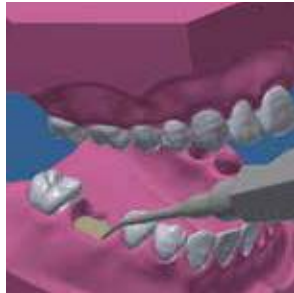

●臼歯部はストレートでは先端部を歯軸と一致させにくいため、術歯の部位、傾斜、患者さんの開口量に合わせて2種類のカーブからセレクト。



#1 S-30
コード No.16812
標準価格 8,700円
カーブ角度/30°

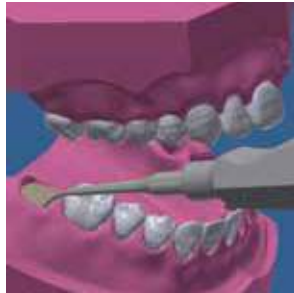

リバース



#1 S-15R
コード No.16813
標準価格 8,700円
リバース角度/15°



●臼歯遠心側・舌、口蓋側からのアクセスにはリバースをセレクト。



#1 S-30R
コード No.16814
標準価格 8,700円
リバース角度/30°



アングル



#2A
コード No.16076
標準価格 8,700円
カーブ角度/30°



#3A
コード No.16077
標準価格 8,700円
カーブ角度/30°

●開口量が少ない患者さん、根尖付近の残根には頸部が屈曲したアングルをセレクト。

[ストレート／#1S-0]



下顎左側6番 遠心根

[カーブ／#1S-15]



下顎左側6番 近心根

[カーブ／#1S-30]



下顎右側7番

[リバース／#1S-15R]



下顎左側6番 遠心根

写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。