

齒周
Periodontics




G キュレット/スケーラー

est 2

YDM 新鋼材【Dual Steel】

国内材料メーカーと共同開発したオリジナルの新鋼材【Dual Steel】を採用。
耐摩耗性を向上させるため炭素とクロムを多く添加しつつ炭化物を微細化。
独自の熱処理と加工技術でシャープな切れ味が持続します。

Point 1 磨かれたシャープな刃と 高硬度の鋼材により切れ味が持続

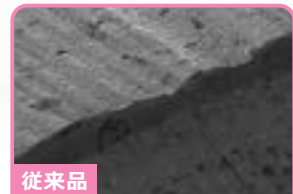

従来品

砥石の目の跡が残り、ギザギザしている
と最初のくい込み感はあるものの、頂点
が丸まりやすく、切れ味が持続しません。



est2


研磨熱による硬度低下を防ぐ「水砥ぎ技術」
により、シャープな刃となっています。さら
に高硬度の鋼材により切れ味が持続します。

Point 2 わずかに短い刃部で、 ブレードコントロールが向上



従来品

見えない上に狭いポケット内で常に刃先
を根面に添わせ操作することは難しく、
高い技術が必要です。

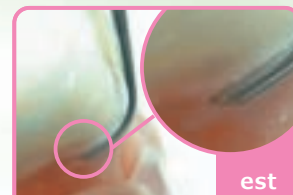

est

わずかに刃部を短くするだけで、
根面へフィットしやすくなります。

Point 3 カラフルな色で、 識別がスムーズ

選べる! ハンドル

Point 4 フィット感がよい ハンドルデザイン

丸柄

短いハンドルで
操作性がよく
紫外線殺菌が
可能です。

角柄

サクラ

専用のIDリングで好みのカラーに
カスタマイズできます。(オプション)



Color-fy


カラフィー

太めでソフトな
ハンドルは
安定感があり、
疲労を軽減します。

TOIRO

適度な太さで、
微細な操作に有効です。

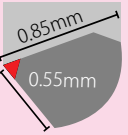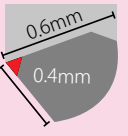種類	ブレード幅	しなり	刃の長さ	第一シャンクの長さ	適応症
ハード		少	標準	標準	しなりがなく、側方圧が加えやすい。比較的強固な歯石や多量の歯石の除去に適しています。
ソフト		多	標準	標準	しなりがあり、繊細な感覚が手指に伝わりやすい。超音波スケーリング後の仕上げや細やかなSRPに適しています。
ミニ		少	短	長	ブレード部が小さく、第一シャンクが長いので、狭く深いポケットへの挿入や、隅角部、根分岐部での操作がしやすい。強固な歯石にも対応し、超音波スケーリング後の取り残しにも有効です。

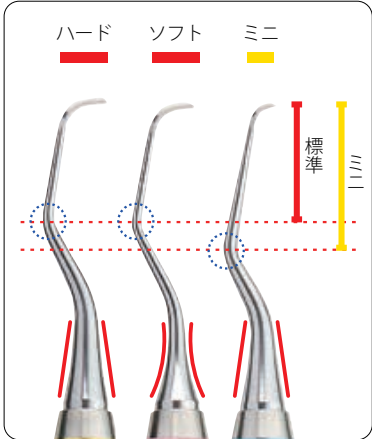


ハード ソフト




ミニ



[臼歯部近心面]

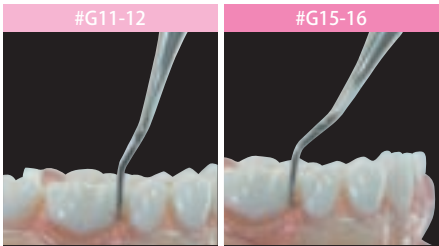

[臼歯部遠心面]

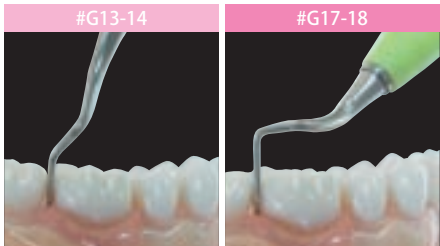

●#G15-16・#G17-18は#G11-12・#G13-14と比べてシャンクが深く曲っているため、開口量が少ない患者様でもハンドルが対合歯列にあたらずに操作できます。

サクラ



※ハンドル径／9.5mm
※IDリング／材質 Si 耐熱温度260℃
※IDリング（全9色）を別売しております。P34をご参照ください。

品名	IDリングの色	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16	#G17-18
ハード(H)	グリーン	33011	33012	33013	33014	33015	33016	33017	33018	33019
ソフト(S)	ピンク	33021	33022	33023	33024	33025	33026	33027	33028	33029
ミニ	ブルー	33031	33032	33033	33034	—	33036	33037	33038	—

カラフィー



※ハンドル径／10.0～12.0mm
※ハンドル／材質 Si 耐熱温度260℃

品名	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16	#G17-18
ハンドルカラー	バイオレット	オレンジ	イエロー	ブルー	レッド	ピンク	グリーン	ネイビー	ライム
ハード(H)	33041	33042	33043	33044	33045	33046	33047	33048	33049
ソフト(S)	33051	33052	33053	33054	33055	33056	33057	33058	33059
ミニ	33061	33062	33063	33064	—	33066	33067	33068	—

TOIRO



※ハンドル径／9.0mm
※ハンドル／材質 Si 耐熱温度260℃

品名	#G1-2	#G5-6	#G7-8	#G11-12	#G13-14
ハンドルカラー	バイオレット	イエロー	ブルー	ピンク	グリーン
ハード(H)	33101	33103	33104	33106	33107
ソフト(S)	33111	33113	33114	33116	33117
ミニ	33121	33123	33124	33126	33127

丸 柄



※ハンドル径／9.5mm

品名	#G1-2	#G5-6	#G7-8	#G11-12	#G13-14
ハード(H)	33071	33073	33074	33076	33077
ソフト(S)	33081	33083	33084	33086	33087
ミニ	33091	33093	33094	33096	33097

角 柄



※ハンドル径／6.5mm

品名	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16	#G17-18
ハード(H)	33131	33132	33133	33134	33135	33136	33137	33138	33139
ソフト(S)	33141	33142	33143	33144	33145	33146	33147	33148	33149
ミニ	33151	33152	33153	33154	—	33156	33157	33158	—

エスト
スケーラー est2



サクラ

1/1

- #H5/33は直と曲の薄いブレードの組み合わせです。前歯歯頸部や歯間部の歯肉縁上スケーリングに適しています。
- #H6/H7はシャンクが左右にわずかに傾いています。前歯部から臼歯部の近遠心偶角部までアプローチできます。



#H5/33 コードNo.33300
標準価格 6,000円
前歯の歯頸部・歯間部



#H6/H7 コードNo.33301
標準価格 6,000円
前歯・臼歯の近遠心偶角部

※ハンドル径／9.5mm
※IDリング／材質 Si 耐熱温度260℃
※IDリング（全9色）を別売しております。P34をご参照ください。

カラフィー




#H5/33 コードNo.33302
標準価格 5,400円



#H6/H7 コードNo.33303
標準価格 5,400円

※ハンドル径／10.0～12.0mm
※ハンドル／材質 Si 耐熱温度260℃

TOIRO

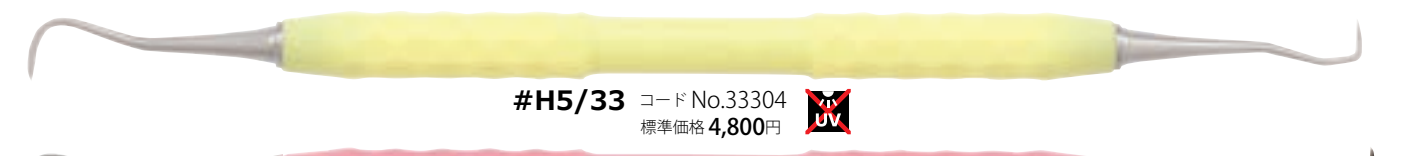

#H5/33 コードNo.33304
標準価格 4,800円



#H6/H7 コードNo.33305
標準価格 4,800円

※ハンドル径／9.0mm
※ハンドル／材質 Si 耐熱温度260℃

丸 柄



#H5/33 コードNo.33308
標準価格 4,800円



#H6/H7 コードNo.33309
標準価格 4,800円

※ハンドル径／9.5mm

角 柄



#H5/33 コードNo.33310
標準価格 4,500円



#H6/H7 コードNo.33311
標準価格 4,500円

※ハンドル径／6.5mm

医療機器届出番号 11B1X1000662D210
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー est

エスト
スケーラー est2 #204SD



- 小さいブレードと複屈曲したシャンクで、臼歯部の近遠心面までアプローチできます。

[臨床動画]

1/1

サクラ



※ハンドル径／9.5mm
※IDリング／材質 Si 耐熱温度260℃
※IDリング（全9色）を別売しております。P34をご参照ください。

コードNo.33320
標準価格 6,000円

カラフィー



※ハンドル径／10.0～12.0mm
※ハンドル／材質 Si 耐熱温度260℃

コードNo.33321
標準価格 5,400円

TOIRO



※ハンドル径／9.0mm
※ハンドル／材質 Si 耐熱温度260℃

コードNo.33323
標準価格 4,800円

丸 柄



※ハンドル径／9.5mm

コードNo.33322
標準価格 4,800円

角 柄




※ハンドル径／6.5mm

コードNo.33324
標準価格 4,500円



写真提供：横田 美保 歯科衛生士
（本多歯科医院）

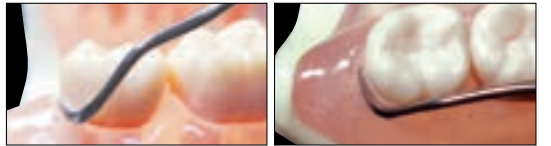

● 最後臼歯遠心にも無理なく届くよう頸部が長くできています。

医療機器届出番号 11B1X1000662D210
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー est

ユニバーサルキュレット ^{エスト} est2

- 根面に付着した不良肉芽や強固な沈着の除去に有効です。
- 細かい肉芽や沈着物にも有効です。

[臨床動画]



1/1



※先端幅／1.00mm

ヤンガーグッド コード No.33341
標準価格 9,800円




写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院
専門医療クリニック天神 院長)




写真提供：多保 学 先生
(たば歯科医院 理事長
日本歯科大学付属病院 臨床准教授)

- 根面に付着した不良肉芽や強固な沈着の除去に有効です。
- Gキュレットより、シャンク及びブレードが太くしなりにくいいため、強固に付着した沈着物の除去に有効です。

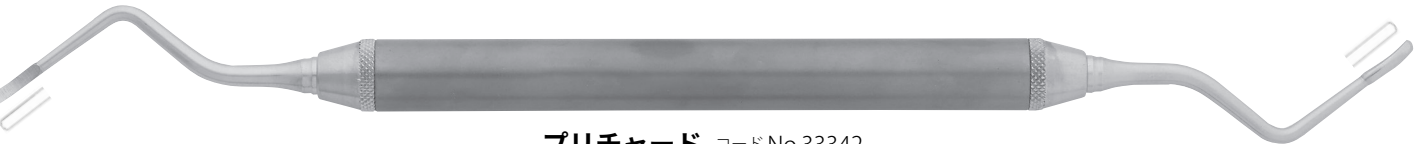

※先端幅／1.60mm

プリチャード コード No.33342
標準価格 9,800円

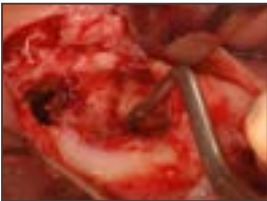

写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)



医療機器届出番号 1181X1000662D213
一般的名称 歯科用キュレット 販売名 ユニバーサルキュレット est2

スケーラー ^{エスト} est2 Slim

- 曲とスプーン型の組み合わせです。前歯歯頸部や舌側部の歯肉縁上スケーリングに適しています。

[臨床動画]



1/1



#前歯用 コード No.33330
標準価格 4,800円

※ハンドル径／9.5mm



写真提供：延田 万理 歯科衛生士 (歯科・林美穂医院)



写真提供：森田 久美子 歯科衛生士 (大川歯科医院)



医療機器届出番号 1181X1000662D210
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー est

IDリング

- サクラハンドル専用のリングです。インストルメントの識別や管理に便利です。


1/1



コードNo.	品名	標準価格	入数
13690	アソート	2,880円	18入(9色×各2入)
13691	バイオレット	1,600円	10入
13692	オレンジ	1,600円	10入
13693	イエロー	1,600円	10入
13694	ブルー	1,600円	10入
13695	レッド	1,600円	10入
13696	ピンク	1,600円	10入
13697	グリーン	1,600円	10入
13698	ネイビー	1,600円	10入
13699	ライム	1,600円	10入

※径／φ7.4~9.8mm
※材質 Si 耐熱温度260℃

[使用例]

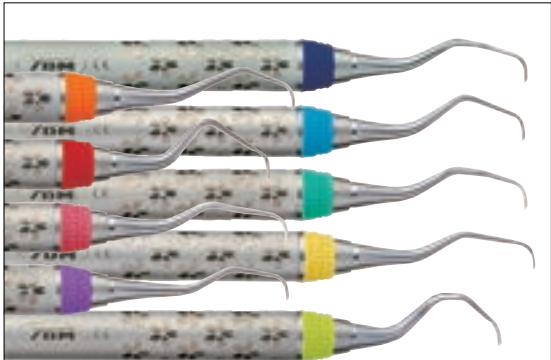

- 使用部位別に色分けをすると、識別しやすく持ち変えがスムーズです。

スケーラー 片頭



#1
コード No.09001
標準価格 3,410円



#3

コード No.09003
標準価格 3,410円



#11DA

コード No.09040
標準価格 3,410円



#11DB

コード No.09041
標準価格 3,410円



#11SB

コード No.09043
標準価格 3,410円



#11 Slim

コード No.09044
標準価格 3,410円



#B

コード No.09035
標準価格 3,410円



#J1

コード No.09111
標準価格 3,410円


医療機器届出番号 1181X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー Slim

- 2本で口腔内すべての歯肉縁上歯石を除去できます。
- 可能な限り刃幅を薄くしてあります。



1/1

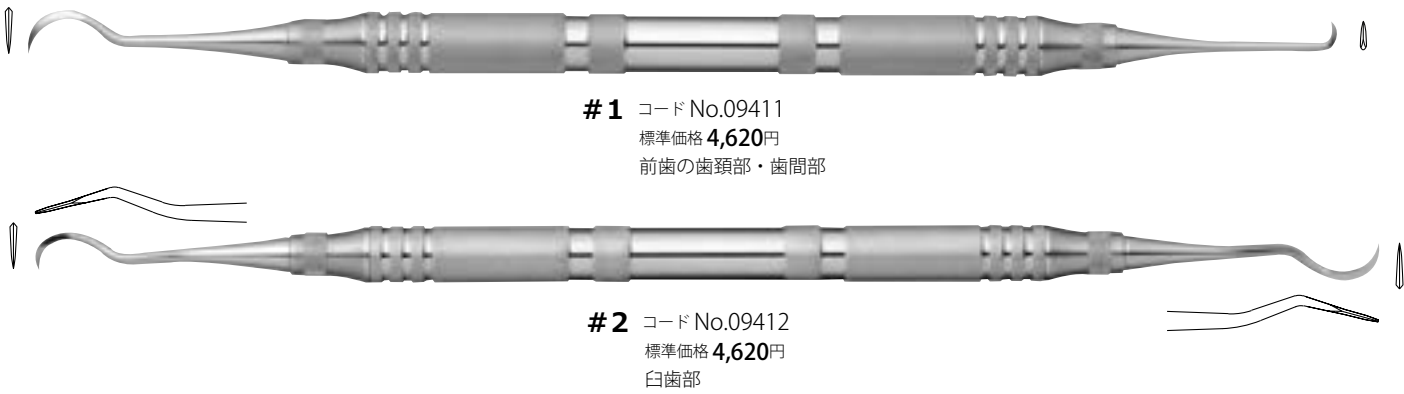


- 刃が薄く、小さいので下顎前歯舌側等の狭い歯間部に有効です。
- 臼歯の遠心面にも届きやすい屈曲です。

医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー パートナー



1/1

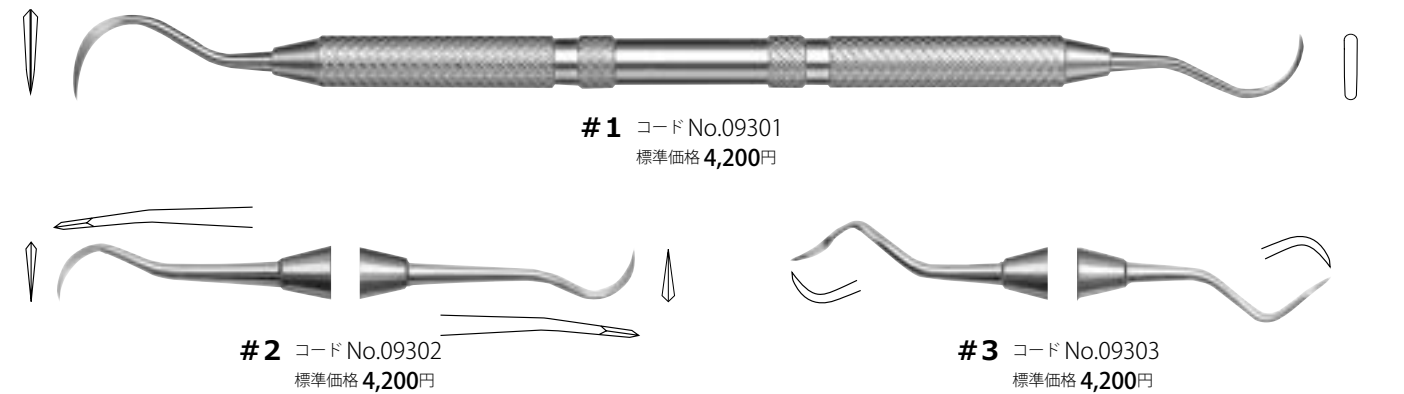


医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー エルゴMK



1/1

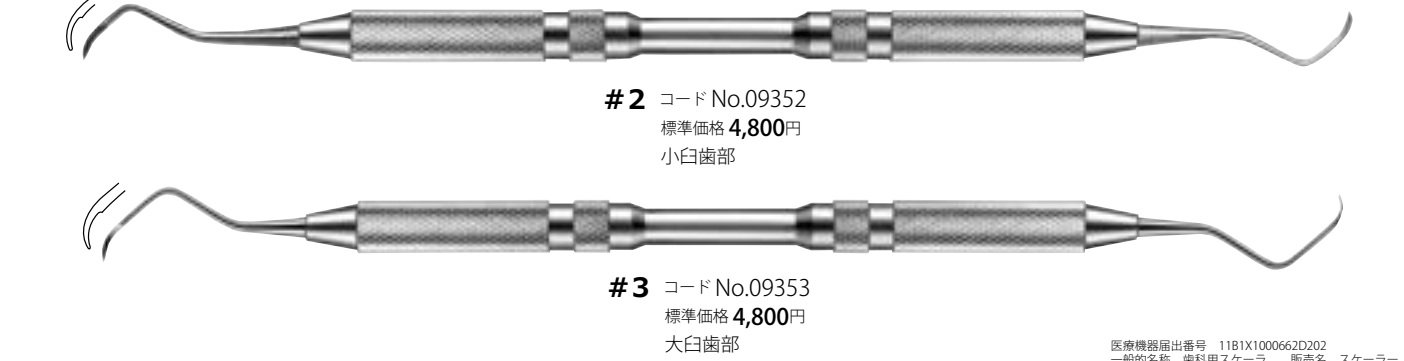


医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー 臨床用



1/1

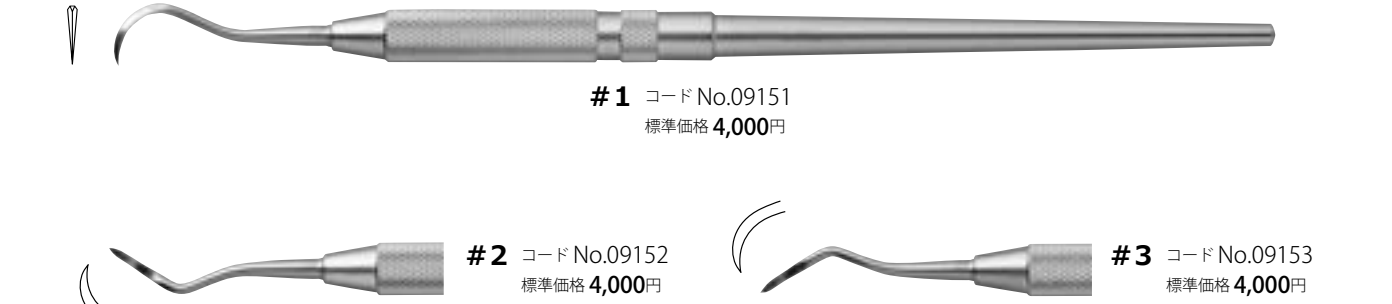


医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー YB型



1/1

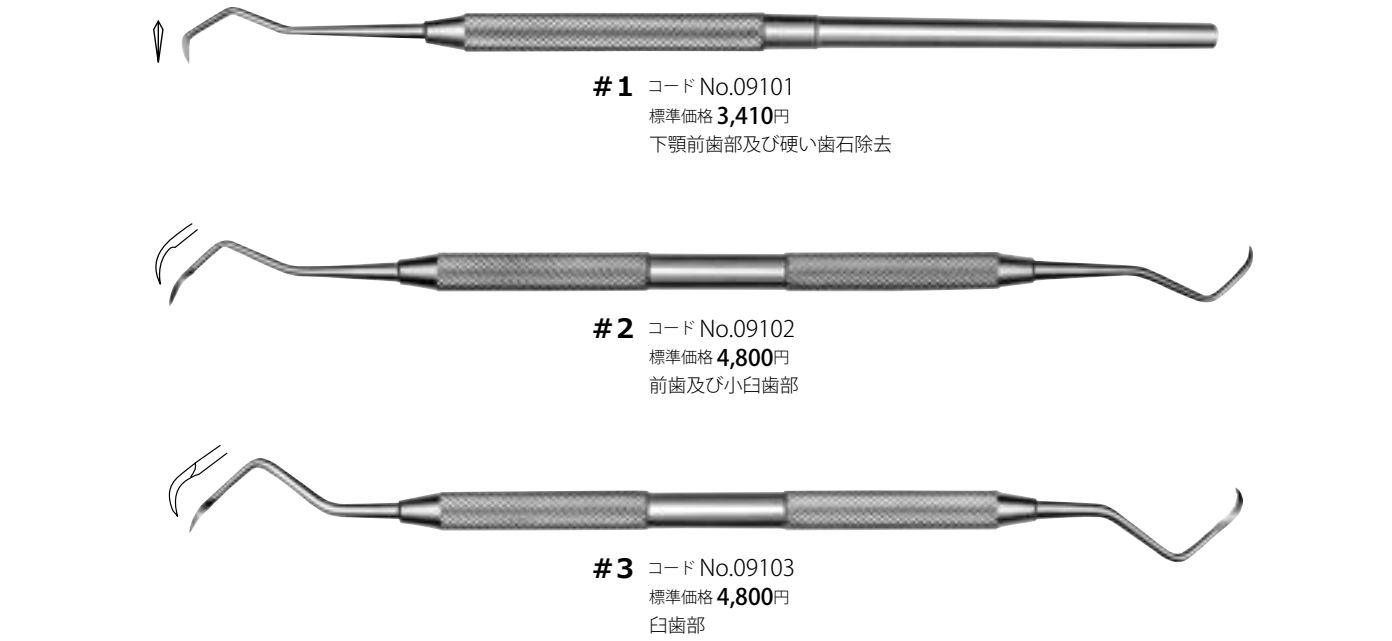

医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

ルートプレーニングチェックスケーラーSC



1/1

- エキスポローラーとスケーラーの組合わせです。
- スケーリング後のチェックや取り残した歯石の除去、またメンテナンス時に適しています。



医療機器届出番号 11B1X1000662D203
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 ルートプレーニングチェックスケーラー

スケーラー ファーケーション用




- 根分岐(ファーケーション)部、深い歯肉縁下のスケーリング・ルートプレーニングに適しています。
- 分岐部や深い隣接面にも挿入できます。

1/1



#F1 コードNo.09471
標準価格 5,760円
前歯部・臼歯部

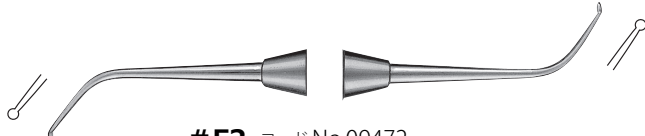

#F2 コードNo.09472
標準価格 5,760円
下顎分岐部

医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラー 販売名 スケーラー

ダイヤモンドスケーラー ファーケーション用




〔臨床動画〕



1/1



コード No.09470
標準価格 12,000円

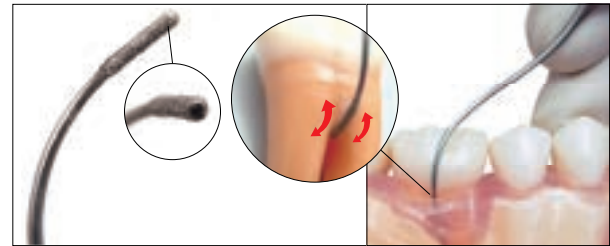

- 作業部にダイヤモンド粒を360° コーティング。全面が作業部となることで、グレーシーキュレットでは届きにくい根分岐部の天蓋部や隅角部にフィットして効率よくSRPができます。
- 先端部をファイルの要領で細かく押し引きし操作します。



写真提供：
佐藤 昌美 歯科衛生士
(池田歯科クリニック)



写真提供：
三木 和子 歯科衛生士
(天川デンタルオフィス外苑前)

医療機器届出番号 11B1X1000662D209
一般的名称 歯科用スケーラー 販売名 ダイヤモンドスケーラー ファーケーション用

※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

エキスプローラー



- 先端部が細く、適度な弾力があるため、先端から伝わる振動で微細な歯面の状態まで探知できます。
- 歯肉縁下歯石やカリエスの探知、補綴物マージン部のチェックなどに有効です。

1/1



片頭 #3A コードNo.01031
標準価格 2,000円



両頭 #11-12 コードNo.09224
標準価格 2,300円



- グレーシーキュレット #11-12 のシャンクと同じ形状のため、臼歯部隣接面の深いポケット内にも届きます。

医療機器届出番号 11B1X1000664D102
一般的名称 歯科用探針 販売名 エクスプローラー

キュレット KKタイプ2



- 日本人の歯と日本人の手に適した設計の両刃式キュレット。
- 両刃の特徴を生かし、臼歯部のSRPでも遠心～中央～近心を1本で行えます。
- SRPを行うと同時に、もう一方の刃で歯周搔爬が行えます。

1/1



スタンダード #1 コードNo.09311
標準価格 6,800円
前歯部用




スタンダード #2 コードNo.09312
標準価格 6,800円
臼歯部用




ミニ #3 コードNo.09313
標準価格 6,800円
ポケットが狭い前歯部用



ミニ #4 コードNo.09314
標準価格 6,800円
ポケットが狭い臼歯部用

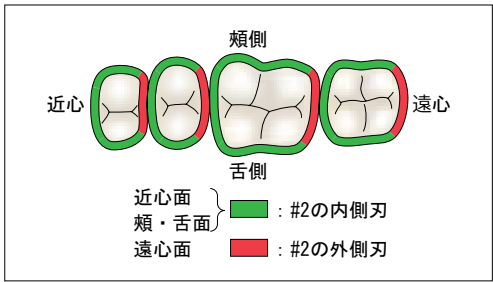

※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

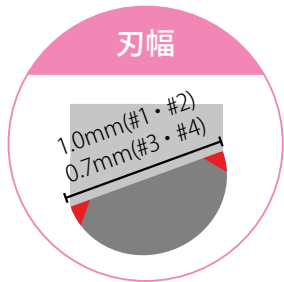

医療機器届出番号 11B1X1000662D107
一般的名称 歯周用キュレット 販売名 キュレット KKタイプ

点薬器



両頭 コードNo.09174
標準価格 4,200円



ホルダー式 コードNo.15010
標準価格 2,750円

単品

コードNo.	品名	標準価格
15011	ポイント	1,950円
15022	ホルダー	800円

医療機器届出番号 11B1X10006647D001
一般的名称 歯科用貼薬針 販売名 点薬器

スケーラー ポイント式



- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。



ハンドル片頭

P-A コード No.10201
標準価格 **2,450**円
サイズ／φ8.0mm

P-F コード No.10205
標準価格 **2,700**円
サイズ／φ6.0mm

ハンドル両頭

P-B コード No.10202
標準価格 **2,750**円
サイズ／φ8.0mm

P-C コード No.10203
標準価格 **3,030**円
サイズ／φ6.0mm

2/3

P-Aハンドル 医療機器届出番号 1181X1000634D003
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル

P-Bハンドル 医療機器届出番号 1181X1000634D004
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル

P-Fハンドル 医療機器届出番号 1181X1000634D007
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル

P-Cハンドル 医療機器届出番号 1181X1000634D005
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル

ポイント

11DA
コード No.23040
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

11DB
コード No.23041
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

11SB
コード No.23043
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

11DAS
コード No.23068
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

11DBS
コード No.23069
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

Slim # 1A
コード No.23076
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

川崎型 # 2
コード No.23622
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

2S 舌側用
コード No.23053
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

B
コード No.23035
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

J1
コード No.23036
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

J4A
コード No.23058
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

J5A
コード No.23059
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

J4B
コード No.23060
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

J5B
コード No.23061
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

1/1

医療機器届出番号 1181X1000662D204
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー ポイント式

- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。



ハンドル片頭

P-A コード No.10201
標準価格 **2,450**円
サイズ／φ8.0mm

P-F コード No.10205
標準価格 **2,700**円
サイズ／φ6.0mm

ハンドル両頭

P-B コード No.10202
標準価格 **2,750**円
サイズ／φ8.0mm

P-C コード No.10203
標準価格 **3,030**円
サイズ／φ6.0mm

2/3

P-Aハンドル 医療機器届出番号 1181X1000634D003
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル

P-Bハンドル 医療機器届出番号 1181X1000634D004
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル

P-Fハンドル 医療機器届出番号 1181X1000634D007
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル

P-Cハンドル 医療機器届出番号 1181X1000634D005
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル

ポイント

医歯大型 # 1
コード No.23601
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

医歯大型 # 3A
コード No.23603
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

医歯大型 # 3B
コード No.23604
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

H5
コード No.23072
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

H33
コード No.23073
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

H6
コード No.23074
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

H7
コード No.23075
標準価格 **4,650** 円 (3 入)

1/1

G キュレット ポイント式



- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。

ポイント式 分解図



ハンドル片頭

P-A

コード No.10201

標準価格 2,450円

サイズ／φ8.0mm

P-F

コード No.10205

標準価格 2,700円

サイズ／φ6.0mm

ハンドル両頭

P-B

コード No.10202

標準価格 2,750円

サイズ／φ8.0mm

P-C

コード No.10203

標準価格 3,030円

サイズ／φ6.0mm

P-Aハンドル

医療機器届出番号 1181X1000634D003

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Aハンドル

P-Fハンドル

医療機器届出番号 1181X1000634D007

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Fハンドル

P-Bハンドル

医療機器届出番号 1181X1000634D004

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Bハンドル

P-Cハンドル

医療機器届出番号 1181X1000634D005

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Cハンドル

ポイント

1/1

G1

コード No.23301

標準価格 4,650円 (3 入)

G2

コード No.23302

標準価格 4,650円 (3 入)

G3

コード No.23303

標準価格 4,650円 (3 入)

G4

コード No.23304

標準価格 4,650円 (3 入)

G5

コード No.23305

標準価格 4,650円 (3 入)

G6

コード No.23306

標準価格 4,650円 (3 入)

G7

コード No.23307

標準価格 4,650円 (3 入)

G8

コード No.23308

標準価格 4,650円 (3 入)

G9

コード No.23309

標準価格 4,650円 (3 入)

G10

コード No.23310

標準価格 4,650円 (3 入)

G11

コード No.23311

標準価格 4,650円 (3 入)

G12

コード No.23312

標準価格 4,650円 (3 入)

G13

コード No.23313

標準価格 4,650円 (3 入)

G14

コード No.23314

標準価格 4,650円 (3 入)

刃幅

0.85mm

0.55mm

医療機器届出番号 1181X100062D103

一般的名称 歯周用キュレット

販売名 Gキュレット ポイント式

G キュレット ポイント式 ミニ



- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。

ポイント式 分解図



ハンドル片頭

P-A

コード No.10201

標準価格 2,450円

サイズ／φ8.0mm

P-F

コード No.10205

標準価格 2,700円

サイズ／φ6.0mm

ハンドル両頭

P-B

コード No.10202

標準価格 2,750円

サイズ／φ8.0mm

P-C

コード No.10203

標準価格 3,030円

サイズ／φ6.0mm

P-Aハンドル

医療機器届出番号 1181X1000634D003

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Aハンドル

P-Fハンドル

医療機器届出番号 1181X1000634D007

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Fハンドル

P-Bハンドル

医療機器届出番号 1181X1000634D004

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Bハンドル

P-Cハンドル

医療機器届出番号 1181X1000634D005

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Cハンドル

ポイント

1/1

- ブレード部が小さく、第一シャンクが長いため、狭く深いポケットに有効です。

G1

コード No.23321

標準価格 4,650円 (3 入)

G2

コード No.23322

標準価格 4,650円 (3 入)

G3

コード No.23323

標準価格 4,650円 (3 入)

G4

コード No.23324

標準価格 4,650円 (3 入)

G5

コード No.23325

標準価格 4,650円 (3 入)

G6

コード No.23326

標準価格 4,650円 (3 入)

G7

コード No.23327

標準価格 4,650円 (3 入)

G8

コード No.23328

標準価格 4,650円 (3 入)

G11

コード No.23331

標準価格 4,650円 (3 入)

G12

コード No.23332

標準価格 4,650円 (3 入)

G13

コード No.23333

標準価格 4,650円 (3 入)

G14

コード No.23334

標準価格 4,650円 (3 入)

刃幅

0.6mm

0.4mm

医療機器届出番号 1181X100062D103

一般的名称 歯周用キュレット

販売名 Gキュレット ポイント式

デブライドメント用インスツルメント



- 歯周組織に負担なく挿入、繊細な操作が可能です。
- 歯面にフィットし、バイオフィルムを漏らさず除去します。
- 先端両側の角が鋭角すぎないため、補綴物を傷つけません。



1/1



#11-12 コード No.09225
標準価格 4,000円

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

- 鋭利すぎないカッティングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。
- インプラント上部構造の基底部にも有効です。



#11-12 チタン製 コード No.09226
標準価格 5,800円



※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃
※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。

- 短いハンドルで操作性が良く、マイクロスコープを使用した施術に有効です。
- 9.5mmの太めのハンドルで安定した施術が可能です。



丸柄 #11-12 コード No.09229
標準価格 4,800円

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。



丸柄 #11-12 チタン製 コード No.09230
標準価格 6,600円




※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃
※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。



写真提供：尾野 誠 先生 (四条烏丸歯科クリニック) 写真提供：波多 野映子 歯科衛生士 (古畑歯科医院) 写真提供：片山 章子 歯科衛生士 (片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属)

DBI = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)

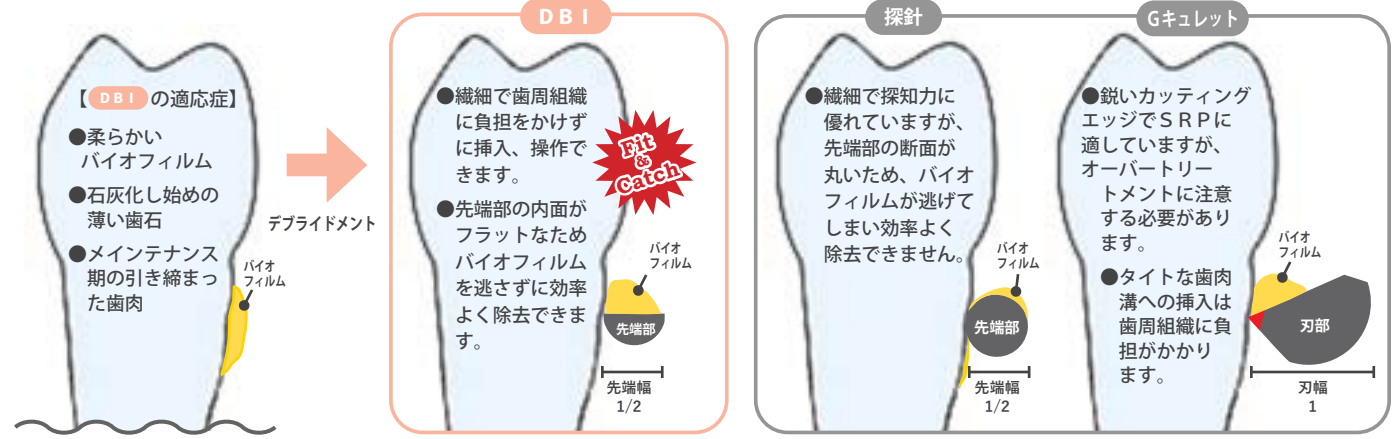

刃 (先端) 幅はGキュレットを基準にした割合です。
医療機器届出番号 11B1X1000662D211 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント

デブライドメント用Gキュレット



- 先端部が細く、適度な弾力があるため、メンテナンス期、SPT期の引き締まった歯肉に有効です。



1/1



丸柄 #5-6 コード No.09243
標準価格 4,800円
前歯部・小白歯部



丸柄 #7-8
コード No.09244
標準価格 4,800円
臼歯部頬舌面

丸柄 #11-12
コード No.09246
標準価格 4,800円
臼歯部近心面

丸柄 #13-14
コード No.09247
標準価格 4,800円
臼歯部遠心面



写真提供：林 智恵子 歯科衛生士 (ネクスト・デンタル)



写真提供：佐藤 昌美 歯科衛生 (池田歯科クリニック)



写真提供：片山 章子 歯科衛生士 (片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属)

ブレード幅		[臨床動画]
est2	DBG	
0.85mm	0.6mm	

写真提供：鈴木 歩 歯科衛生士 (BRISTO DENTAL CLINIC 副院長)

シャンク比較	
est2 (ハード)	DBG




写真提供：塚田 智子 歯科衛生士 (あおいデンタルクリニック) 写真提供：延田 万里 歯科衛生 (歯科・林 美穂医院) 写真提供：塚原 桜 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック)

医療機器届出番号 11B1X1000662D110 一般的名称 歯周用キュレット 販売名 デブライドメント用Gキュレット

デブライドメント用スケーラー



- 臼歯部隣接面などの細部のスケーリングやセメント除去にも有効です。

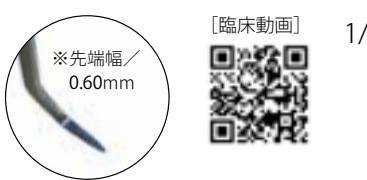


1/1



#11-12 コード No.09227
標準価格 4,400円

※ハンドルに「DBS」と刻印が入っています。

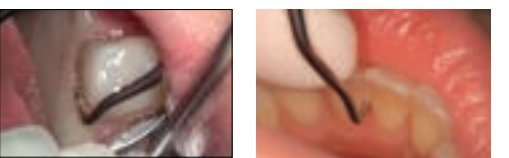



写真提供：長内 香織 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック) 写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士 (フリーランス)

医療機器届出番号 11B1X1000662D212 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用 スケーラー

ペリオプローブ



1/1

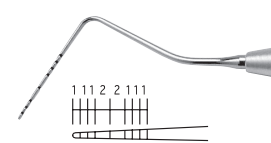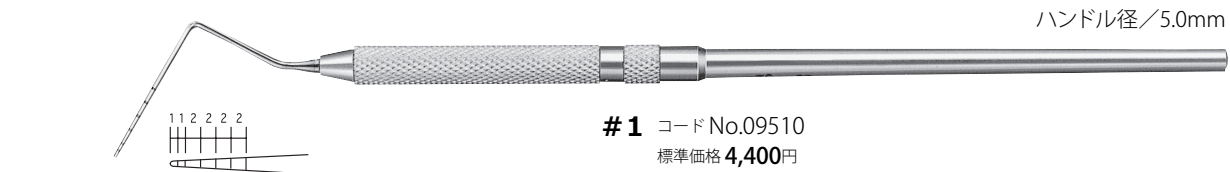


#2 コード No.09550
標準価格 4,400円




【臨床動画】




写真提供：林 智恵子 歯科衛生士
(ネクスト・デンタル)

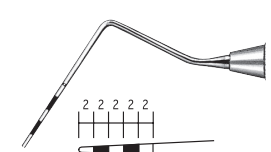


#4 コード No.09554
標準価格 4,400円

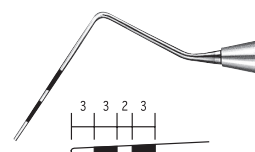


#5 コード No.09555
標準価格 4,400円

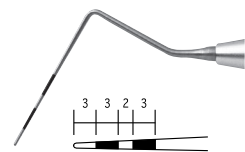

チタン製 #5 コード No.09575
標準価格 5,850円
インプラントメンテナンス用

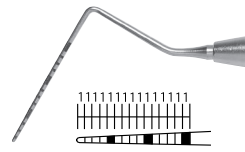

#6 コード No.09557
標準価格 4,400円

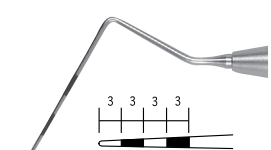



#7 コード No.09558
標準価格 4,400円



【臨床動画】




写真提供：横田 美保 歯科衛生士
(本多歯科医院)

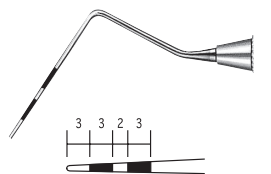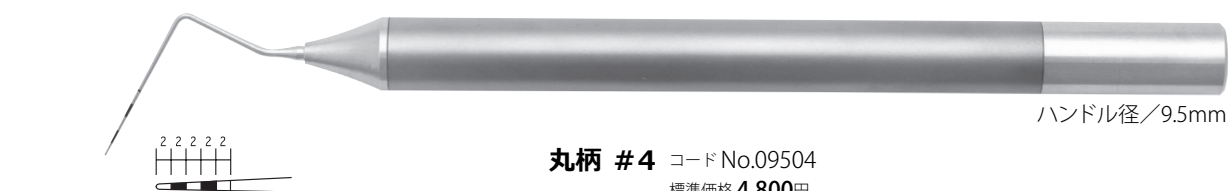

丸柄 #5 コード No.09505
標準価格 4,800円



写真提供：川崎 律子 歯科衛生士
(長谷川歯科医院)

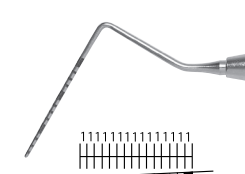

丸柄 #6 コード No.09506
標準価格 4,800円



写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院
専門医療クリニック天神 院長)

医療機器届出番号 1181X1000664D003
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ

ペリオプローブ



1/1





●変形・破損せず、長期間使用できます。
▶超弾性金属（ニッケルチタン）製



【臨床動画】



写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士
(フリーランス)

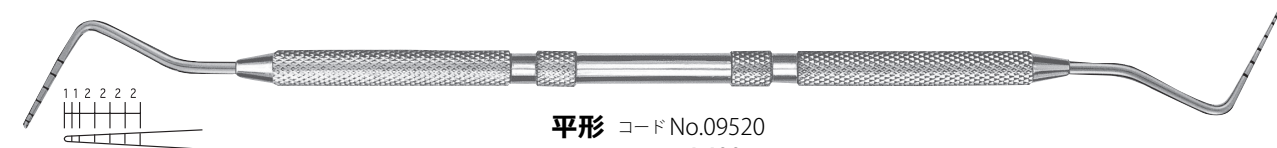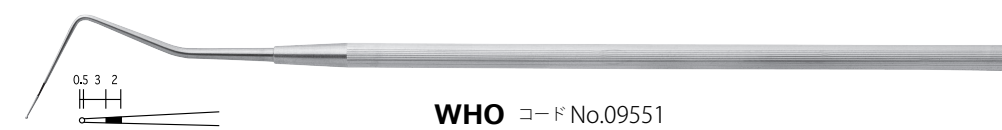

【臨床動画】



●根分岐部へ挿入しやすい形状です。


医療機器届出番号 1181X1000664D003
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ

グラムプローブ



1/1


●20～25gで加重すると、ピンに触れるようになっています。

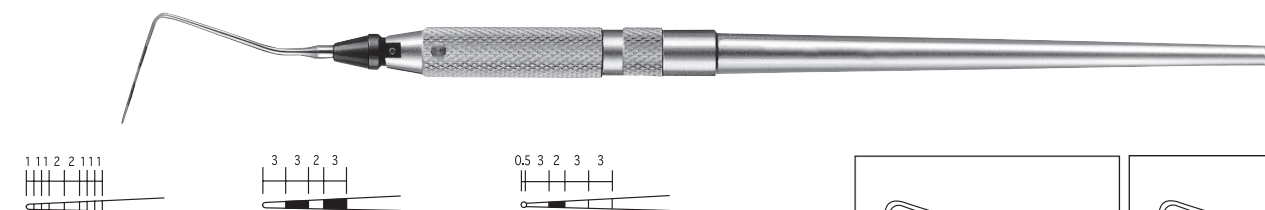

#2
コード No.09204
標準価格 6,800円

#5
コード No.09203
標準価格 6,800円

CPITN-C
コード No.09205
標準価格 6,800円

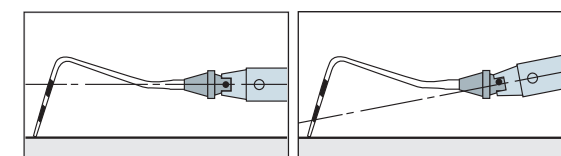

医療機器届出番号 1181X1000664D001
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 グラムプローブ

ペリオプローブ ポイント式

- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。



ハンドル片頭

P-A コード No.10201
標準価格 **2,450**円
サイズ／φ8.0mm

P-F コード No.10205
標準価格 **2,700**円
サイズ／φ6.0mm

ハンドル両頭

P-B コード No.10202
標準価格 **2,750**円
サイズ／φ8.0mm

P-C コード No.10203
標準価格 **3,030**円
サイズ／φ6.0mm

P-Aハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D003
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル

P-Bハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D004
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル

P-Fハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D007
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル

P-Cハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D005
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル

ポイント

#1 コード No.23510
標準価格 **4,650**円 (3入)

#5 コード No.23515
標準価格 **6,000**円 (3入)

医療機器届出番号 11B1X1000664D005
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ ポイント式

カラープローブ ポイント式

- 樹脂製のため、インプラントや補綴物を傷つけません。
- 測定値が見やすいカラーリングです。
- 先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- ハンドルはミラーハンドルを使用します。専用ハンドルではないのでコストを抑えられます。



#2 コード No.23522
標準価格 **6,000**円 (5入)

#4 コード No.23524
標準価格 **6,000**円 (5入)

#5 コード No.23525
標準価格 **6,000**円 (5入)

写真提供：
林 智恵子 歯科衛生士
(ネクスト・デンタル)

写真提供：
長内 香織 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)

目盛り 目盛り
本体

レーザーで刻印された目盛りは本体樹脂内部(80μm)まで浸透しているため、剥がれにくく長持ちします。

※材質 PPSU 耐熱温度200℃

医療機器届出番号 11B1X1000664D007
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 カラープローブ ポイント式

歯間ブラシ サイズチェッカー

- 歯間ブラシサイズの選定が容易に行える探針です。
- ライオン歯科材株式会社 DENT.EX歯間ブラシに対応しています。
- ハンドルはミラーハンドルを使用します。専用ハンドルではないのでコストを抑えられます。



コード No.23351
標準価格 **2,000**円

※「IDB-C」と刻印が入っています。
※材質 PPSU 耐熱温度 200℃

※ハンドルは別売となります。

サイズチェッカー拡大図

4S SSS SS S M L~

φ0.6 φ0.7 φ0.8 φ1.0 φ1.2 φ1.5

使い方

①チェッカーをミラーハンドルにセットします。

②チェッカーを歯間部に挿入し、目盛りを確認してください。

③歯間部よりやや小さい歯間ブラシを選択します。
ライオン歯科材株式会社 DENT.EX歯間ブラシを使用しています。

写真提供： 稲垣 幸司先生
(愛知学院大学 短期大学部 歯科衛生学科 教授)

医療機器届出番号 11B1X100064D111
一般的名称 歯科用探針 販売名 歯間ブラシ サイズチェッカー

ミラーハンドル スケール付

グリーン コード No.13118
標準価格 **550**円

ブルー コード No.13119
標準価格 **550**円

ピンク コード No.13120
標準価格 **550**円

※材質 PP 耐熱温度149℃

医療機器届出番号 11B1X1000625D003
一般的名称 歯鏡 販売名 ミラーハンドル

リボン
シャープナー Re Born

コード No.13060
標準価格 78,000円

セット内容	
本体	1入
セラミック砥石・ダイヤモンド砥石	各1入
シャープニングテスター	1入
グレーシーキュレット用ガイド板	1入
単三形アルカリ乾電池	2入

●手のひらサイズでどこでも簡単に
シャープニングができます。



[臨床動画] 1/1

Point 1

砥石をRe Bornに
持ち替えるだけ

学校で習うシャープニング方法を
元にした設計。砥石の角度が
70度に設定されているため
手砥ぎのイメージで簡単に
使いこなせます。

Point 2

どこでも手軽に


キュレットを持つ手をフリーハンド
にし面倒なセッティングを不要に
しました。スケーリング中や
空いた時間、どこでも
手軽に使えます。

Point 3

安定した仕上がり

砥石の「動き」と「角度」を機械化
することで、「キュレットの刃の
内面を床と平行にする」ことに
集中でき安定したシャープな
エッジに仕上がります。


[グレーシーキュレットの砥ぎ方]

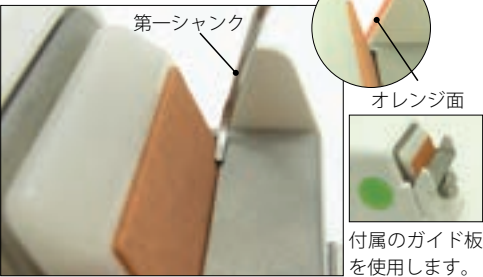

①角度を合わせる
台の奥側にキュレットの背面をのせ、第一シャンクを
ガイド板のオレンジ面に合わせて傾けます。
(刃の内面と台が平行になります。)



②側面のシャープニング
①で合わせた角度のまま、キュレットを台
中央部の砥ぎやすい位置までスライドさ
せ、側面を砥石に軽く押し当ててスイッチ
をONにします。

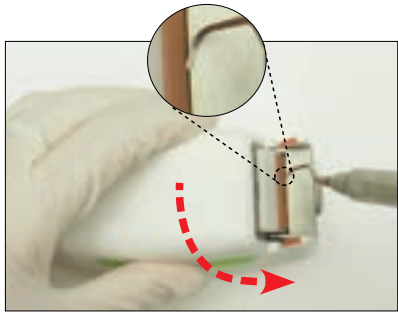

③先端のシャープニング
側面を砥石に当てた状態から、Re Born本体
を先端のカーブに添わせ、回転させて砥ぎ
ます。

[セラミック砥石]



細目～中目

毎日のメンテナンス
に適しています。

[ダイヤモンド砥石]



粗目

切れ味が著しく鈍った
インストルメントに。

[使用可能な主なインストルメント]

グレーシーキュレット
ユニバーサルキュレット
シッケルスケラー
エキスカベーター
※インストルメントのデザインに
よってはご使用頂けない製品も
ございます。

[仕様]

本体

プラスチック製
底部に円盤付
電池式（単三形アルカリ乾電池使用）
サイズ／W107×D57×H54mm
重量／約170g（乾電池除く）

砥石

セラミック砥石・
ダイヤモンド砥石
オイル・水（潤滑剤）不要
上下表裏（計4カ所）使用可能

単品


コードNo.	品名	標準価格	
90418	セラミック砥石	4,020円	
90419	ダイヤモンド砥石	4,020円	

コードNo.	品名	標準価格
53016	シャープニングテスター	600円
90423	グレーシーキュレット用ガイド板	970円

アーカンサス砥石



2/3

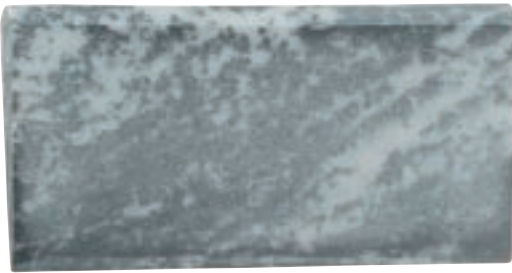

サイズ／W100×D50×H10mm

細目

6A

コード No.13030
標準価格 9,800円
シャープニングテスター付



サイズ／W76×D50×H10mm

細目

6AS

コード No.13032
標準価格 7,800円
シャープニングテスター付



サイズ／W100×D25×H6mm

細目

#4

コード No.13033
標準価格 4,800円

※アーカンサス砥石は天然石のため、現品の色や柄は写真と異なる場合があります。

セラミック砥石 ウェッジ形



●目づまりしにくいので、シャープニング時、水・オイル等の潤滑剤が不要です。

2/3




サイズ／W80×D40×H8mm

細目

コード No.13044

標準価格 7,200円
シャープニングテスター付

[溝の使用例]

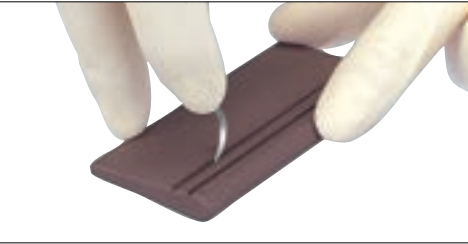

●V字・U字の溝がついており、エキスカベーター・エキスパローラー
の先端部のシャープニングに便利です。

砥石



2/3



粗目

A

コード No.13001
標準価格 3,200円
ウェッジ形

サイズ／W100×D26×H6mm



極細目

F

コード No.13006
標準価格 3,200円
長方形
仕上げ専用

サイズ／W100×D26×H6mm

シャープニングオイル ナチュレ



- 天然素材を使用し、環境・人体にやさしい潤滑油です。
- シャープニングに適した高めの粘度です。



※シャープニング用
※容量20mL

コード No.13094
標準価格 **2,420**円

インスツルメントオイル



- オートクレーブ滅菌前に少量塗布すると、サビの発生を防ぎます。
- 鉗子のジョイント部の潤滑としても有効です。
- スケーラー・キュレット等のシャープニングオイルとしても使用できます。



※防錆・潤滑・シャープニング用
※容量20mL

コード No.13093
標準価格 **2,200**円

シャープニングスティック



- シャープニング後のチェックが繊細に伝わります。
- オートクレーブ滅菌ができます。



※材質 PC 耐熱温度 132℃

コード No.13056 サイズ／φ6×76mm
標準価格 **2,640**円（6入）



1/1

シャープニングテスター



- シャープニング後、切れ味を確認できます。



※材質 PC 耐熱温度 115℃

コード No.53016
標準価格 **600**円 サイズ／φ8×100mm

ダルスケーラー ^{エスト}est2 角柄



- シャープニング練習用のスケーラーです。
刃部を鋭利に仕上げた後、ダル加工をしているため、施術後の状態に近い鈍さになっています。



#H5/33 コード No.13022
標準価格 **3,230**円

1/1

ダルGキュレット ^{グレーシー}^{エスト}est2 角柄 ^{ハード}H



- シャープニング練習用のグレーシーキュレットです。
刃部を鋭利に仕上げた後、ダル加工をしているため、施術後の状態に近い鈍さになっています。



#G13-14 コード No.13027
標準価格 **3,230**円

1/1