

外科 / インプラント
Dental Surgery
Implantology



Extracting forceps Claw

抜歯鉗子 Claw

抜歯鉗子の進化をその手に

4ヶ所の爪「Claw」を備えた特許取得*の先端部を採用。安定した把持力と軽量なボディ、バネを用いた可動部のスムーズな作業性が、術者と患者様双方の負担を軽減します。

* PAT.5858116

Point 1

「4ヶ所の爪による安定保持」


鉗子の爪が歯頸部の3～4か所にかかることによって、歯を安定して保持
歯頸部の幅や湾曲の大きさを選ばずに幅広く適応



Point 2

「内面のギザによるスパイク効果」

内面ギザのエッジによるスパイク効果で、保持力向上
力の掛け過ぎを防ぎ、脆くなった歯にも有効

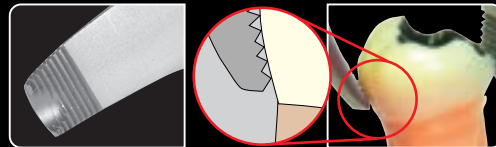

Point 3

「バネによる微調節機能」

歯頸部に適合させる際の
コントロールを容易にし、操作性が向上

Point 4

「スリムな軽量ボディ」

従来製品の約1/2の重量
スリムにする事で視野を確保

抜歯鉗子 Claw


- 4ヶ所の爪が力学的にバランスがとれた状態で歯を保持し、さらに内面ギザのスパイク効果で保持力を高めて確実につかめます。
- ハンドル部のバネにより先端の開閉をコントロールできる為、歯頸部へ容易に適合できます。

PAT.5858116

[臨床動画]



4/5

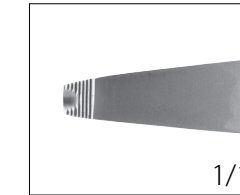


1/1



サイズ／162mm

#1
前歯

コード No.17581
標準価格 28,000円

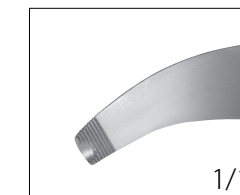


1/1




サイズ／161mm

#4
小白歯

コード No.17582
標準価格 28,000円

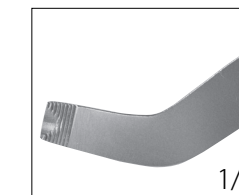

1/1

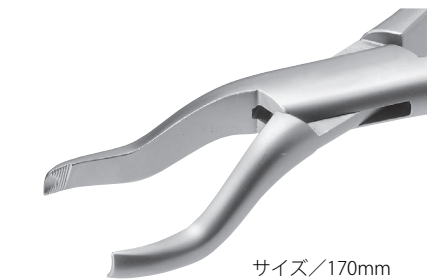

サイズ／170mm

#10S
上顎大白歯

コード No.17583
標準価格 28,000円




1/1



サイズ／168mm

#27
下顎大白歯

コード No.17584
標準価格 28,000円

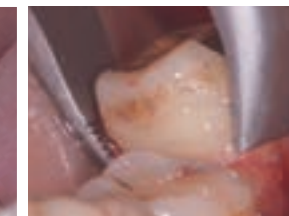


写真提供：青井 良太 先生（SBC（Surgical Basic Course）主幹）


抜歯鉗子 Claw 乳歯用

- 4ヶ所の爪が力学的にバランスがとれた状態で歯を保持し、さらに内面ギザのスパイク効果で保持力を高めて確実につかめます。
- ハンドル部のバネにより先端の開閉をコントロールできる為、歯頸部へ容易に適合できます。


PAT.5858116

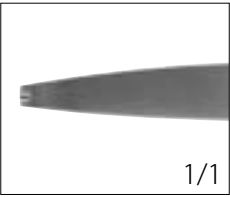


#An コード No.17591
標準価格 28,000円
乳前歯

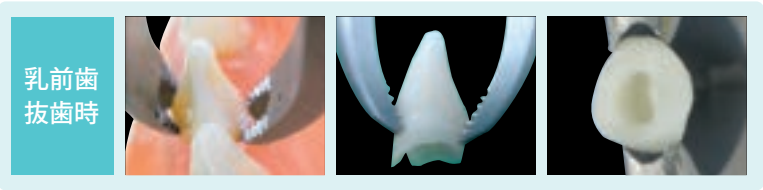


乳前歯
抜歯時

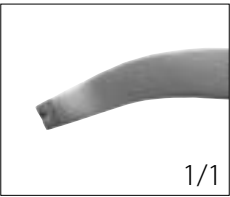

#Po-U コード No.17592
標準価格 28,000円
上顎乳臼歯

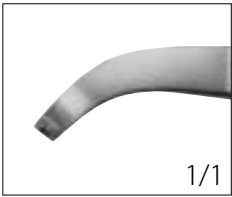

#Po-L コード No.17593
標準価格 28,000円
下顎乳臼歯


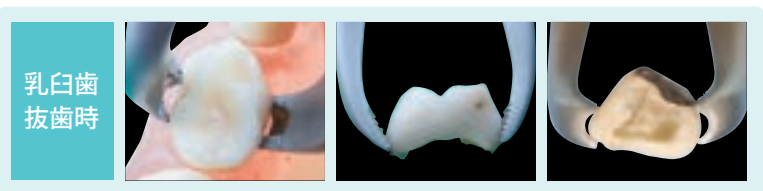


乳臼歯
抜歯時

医療機器届出番号 11B1X1000639D301
一般的名称 抜歯用鉗子 販売名 抜歯鉗子


抜歯鉗子 Claw 残根用

- 4ヶ所の爪が力学的にバランスがとれた状態で歯を保持し、さらに内面ギザのスパイク効果で保持力を高めて確実につかめます。
- ハンドル部のバネにより先端の開閉をコントロールできる為、歯頸部へ容易に適合できます。

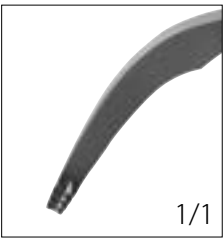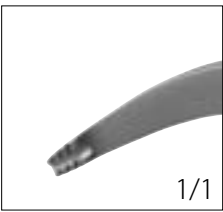

前歯 コード No.17075
標準価格 28,000円

臼歯 コード No.17076
標準価格 28,000円

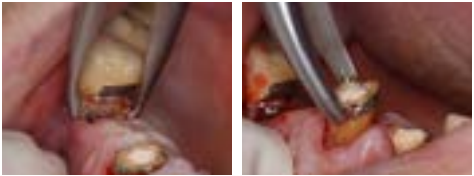


写真提供：奈良 嘉峰 先生（茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック院長）

医療機器届出番号 11B1X1000639D301
一般的名称 抜歯用鉗子 販売名 抜歯鉗子

抜歯鉗子 残根用 タイプ2


- シャープな先端部が歯根膜空隙に入り込み、内面ギザのエッジで強固に残根をつかめます。
- ハンドル部のバネにより、先端の開閉をコントロールできる為、力のかけ過ぎを防ぎます。

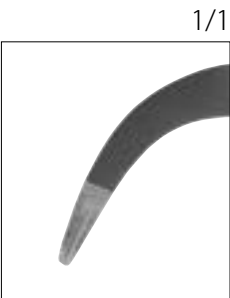

前歯残根用 コード No.17073
標準価格 23,760円



臼歯残根用 コード No.17074
標準価格 23,760円

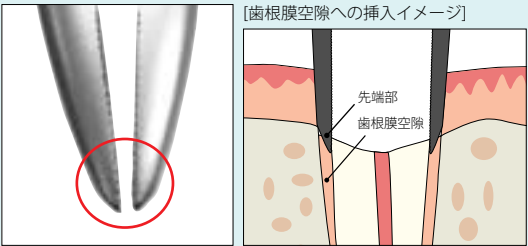

●先端背面部の厚みが薄いため、歯根膜空隙へ挿入できます。

医療機器届出番号 11B1X1000639D301
一般的名称 抜歯用鉗子 販売名 抜歯鉗子

抜歯鉗子



使用部位

	前歯	小白歯	大白歯	智歯	残根	歯根分離
上顎	#1	#32	#10S	#8	#65	#67
下顎	#46	#21	#17・#27	#222	#44 新型	#66



●ハンドルの内側に
使用部位が明記
されています。


1/1



#1
コード No.17001
標準価格 20,790円
上顎前歯



#46
コード No.17046
標準価格 20,790円
下顎前歯

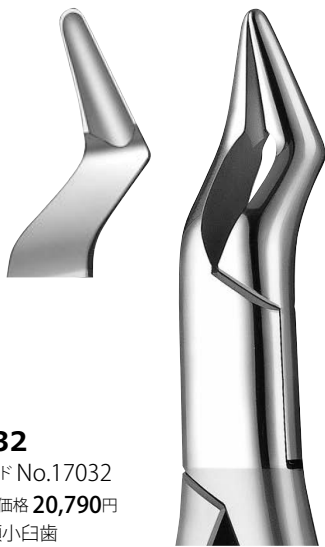

#32
コード No.17032
標準価格 20,790円
上顎小白歯



#21
コード No.17021
標準価格 20,790円
下顎小白歯



#4
コード No.17004
標準価格 20,790円
上下顎 小白歯



#10S
コード No.17010
標準価格 20,790円
上顎大白歯



#17
コード No.17017
標準価格 20,790円
下顎大白歯

抜歯鉗子



1/1



#27
コード No.17027
標準価格 20,790円
下顎大白歯



#8
コード No.17008
標準価格 20,790円
上顎智歯



#222
コード No.17222
標準価格 20,790円
下顎智歯



#65
コード No.17065
標準価格 20,790円
上顎残根



#44
コード No.17044
標準価格 20,790円
下顎残根



#69
コード No.17069
標準価格 20,790円
上下顎 残根



残根用 新型
コード No.17070
標準価格 20,790円
上下顎 残根



#67
コード No.17067
標準価格 20,790円
上顎歯根分離



#66
コード No.17066
標準価格 20,790円
下顎歯根分離

抜歯鉗子 乳歯用




1/1

使用部位				
	乳前歯	乳臼歯		乳歯残根
上顎	# 1	# 10S	# 4	# 69
下顎	# 46	# 21・# 27		



1
コード No.17501
標準価格 19,470円
上顎乳前歯

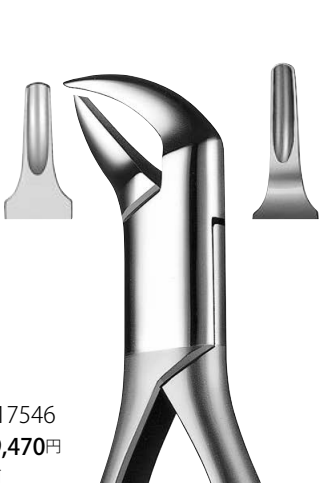


46
コード No.17546
標準価格 19,470円
下顎乳前歯



10S
コード No.17510
標準価格 19,470円
上顎乳臼歯



21
コード No.17521
標準価格 19,470円
下顎乳臼歯

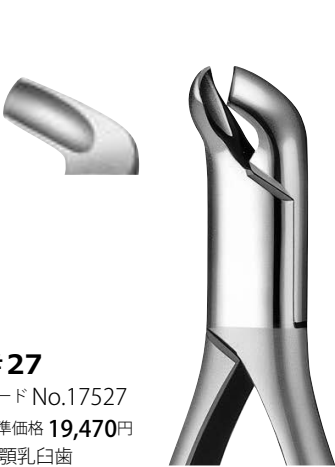

27
コード No.17527
標準価格 19,470円
下顎乳臼歯



4
コード No.17504
標準価格 19,470円
上下顎 乳臼歯



69
コード No.17569
標準価格 19,470円
上下顎 乳歯残根

医療機器届出番号 11B1X1000639D301
一般的名称 抜歯用鉗子 販売名 抜歯鉗子

骨鉗子 平川型



4/5




1/1



サイズ/157mm

1 コード No.17801
標準価格 25,080円
上下顎用

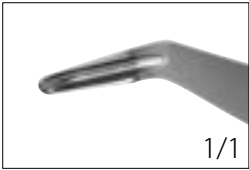

1/1



サイズ/166mm

2 コード No.17802
標準価格 25,080円
上顎用



1/1



サイズ/160mm

3 コード No.17803
標準価格 25,080円
下顎用

医療機器届出番号 11B1X1000639D401
一般的名称 歯科用骨鉗子 販売名 骨鉗子 平川型

骨鉗子 デリケート




4/5

- 先端が小さいため、細部の骨除去に適しています。
- 不良肉芽組織の除去にも使用できます。




1/1

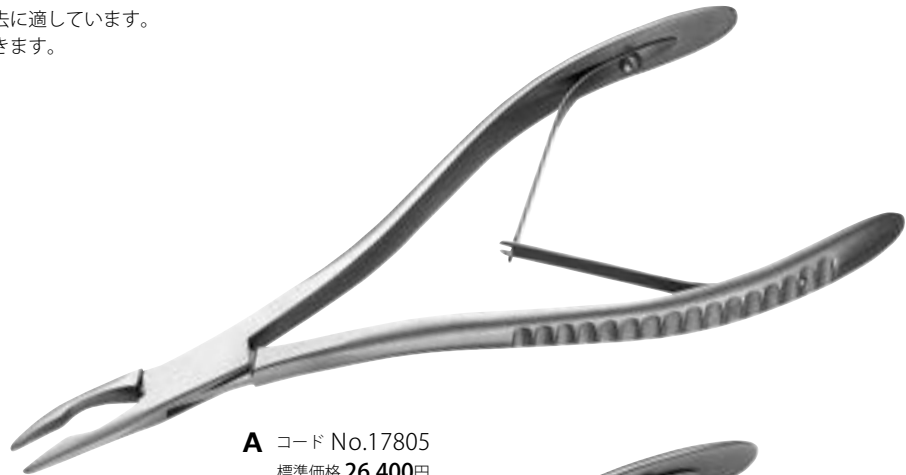


サイズ/152mm

A コード No.17805
標準価格 26,400円

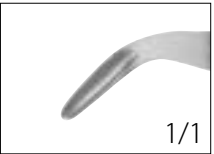

1/1

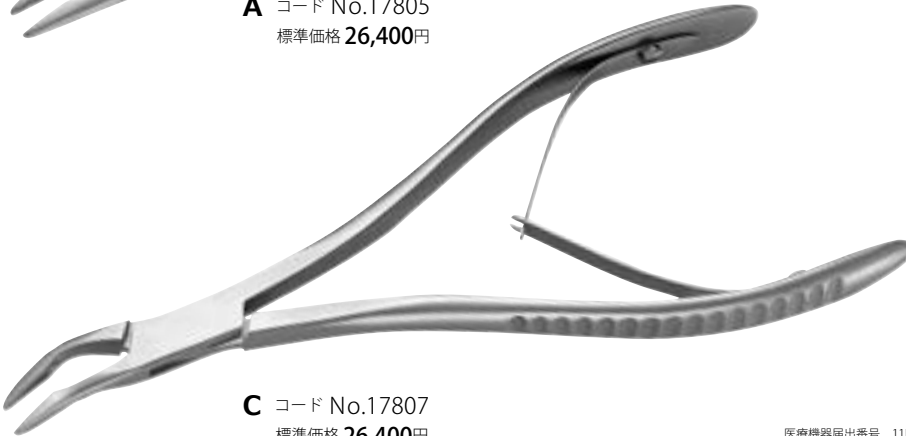

サイズ/150mm

C コード No.17807
標準価格 26,400円


医療機器届出番号 11B1X1000639D403
一般的名称 歯科用骨鉗子 販売名 骨鉗子 デリケート

カートリッジシリンジ タイプ2



ネジタイプ

4/5

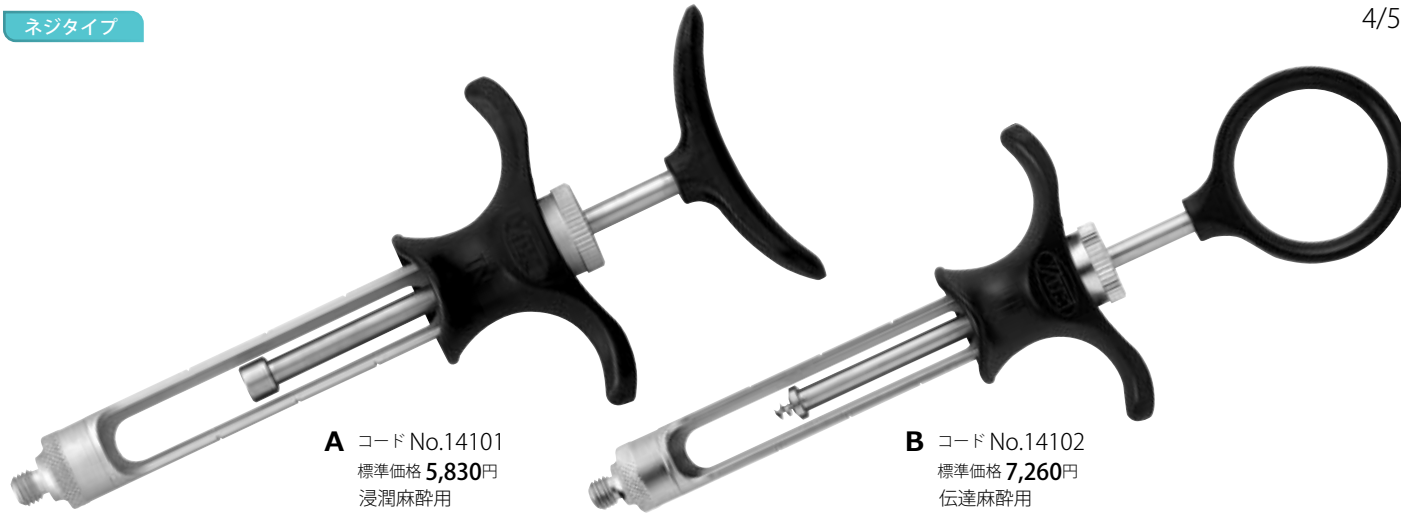

A コード No.14101
標準価格 5,830円
浸潤麻酔用

B コード No.14102
標準価格 7,260円
伝達麻酔用

ロックタイプ



A コード No.14103
標準価格 5,830円
浸潤麻酔用

B コード No.14104
標準価格 7,260円
伝達麻酔用

※黒色部／材質 PPS 耐熱温度271℃

医療機器届出番号 11B1X1000648D002
一般的名称 歯科麻酔用注射筒 販売名 カートリッジシリンジタイプ2

カートリッジシリンジ 1ml用



ネジタイプ

ロックタイプ

4/5



コード No.14115
標準価格 5,830円
浸潤麻酔用

コード No.14116
標準価格 5,830円
浸潤麻酔用

※黒色部／材質 PPS 耐熱温度271℃

医療機器届出番号 11B1X1000648D001
一般的名称 歯科麻酔用注射筒 販売名 カートリッジシリンジ

単品 ※タイプ2、1mL用共通です。

	ネジキャップ コード No.90209 標準価格 1,210円		ルアーロックキャップ コード No.90320 標準価格 1,210円
---	---------------------------------------	---	---

止血鉗子 モスキート



1/1



直 コード No.29001
標準価格 10,070円

曲 コード No.29002
標準価格 10,670円



直 ST コード No.29103
標準価格 11,000円


曲 ST コード No.29104
標準価格 12,100円

医療機器届出番号 11B1X1000639D203
一般的名称 鉗子 販売名 止血鉗子 モスキート

止血鉗子 ペアン




1/1

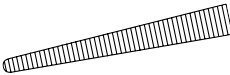

コード No.29004
標準価格 11,440円

医療機器届出番号 11B1X1000639D205
一般的名称 鉗子 販売名 止血鉗子 ペアン


銳匙

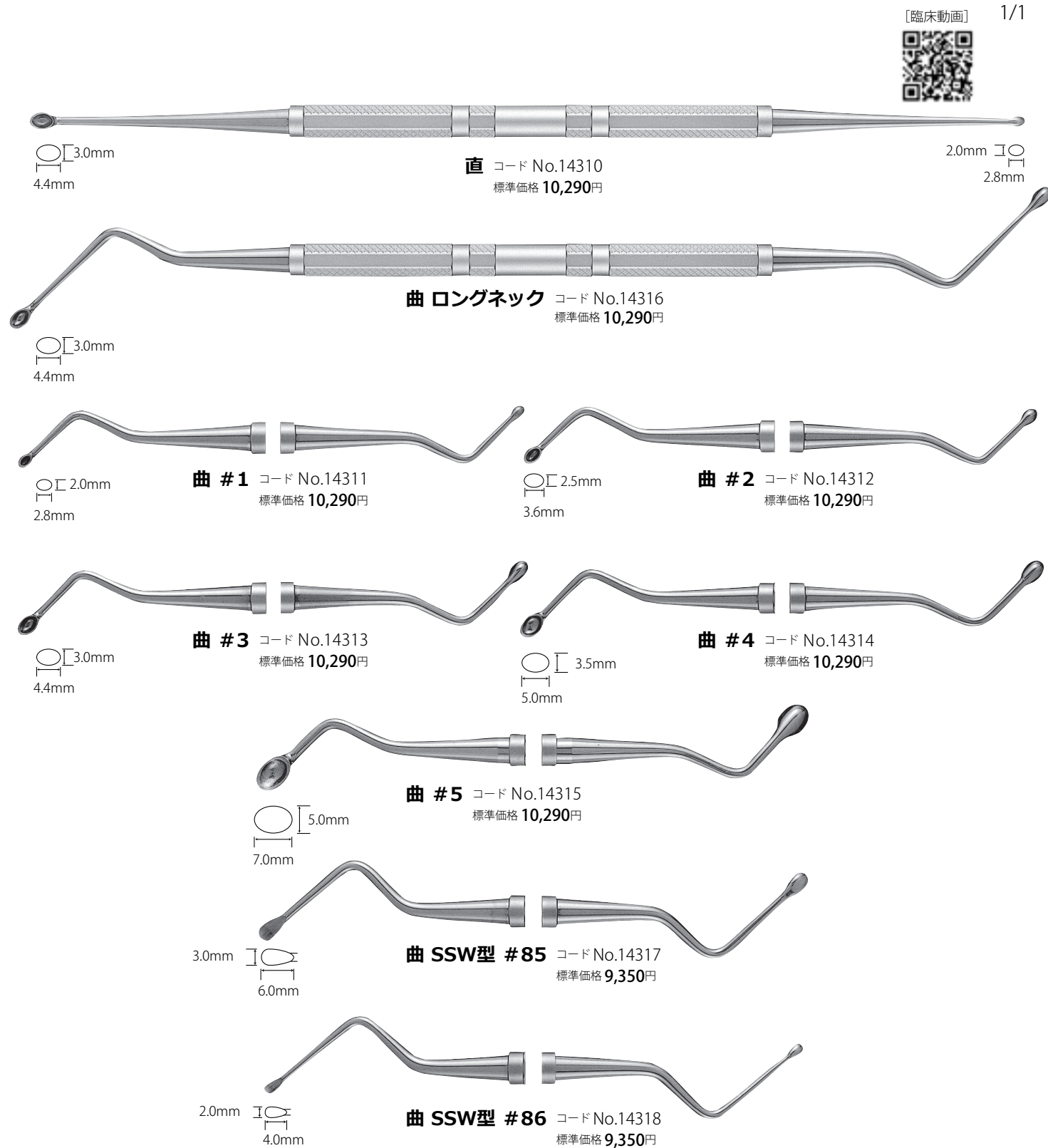

有窓鋭匙

ユニバーサルキュレット ^{エスト} est2


- 根面に付着した不良肉芽や強固な沈着の除去に有効です。
- 細かい肉芽や沈着物にも有効です。

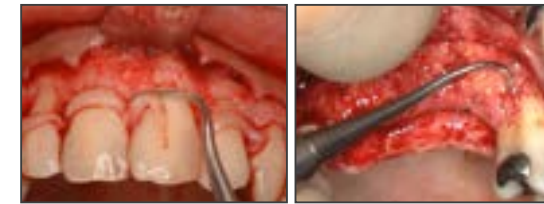

ヤンガーグッド コード No.33341
標準価格 9,800円

※先端幅／1.00mm

- 根面に付着した不良肉芽や強固な沈着の除去に有効です。
- Gキュレットより、シャンク及びブレードが太くしなりにくいため、強固に付着した沈着物の除去に有効です。

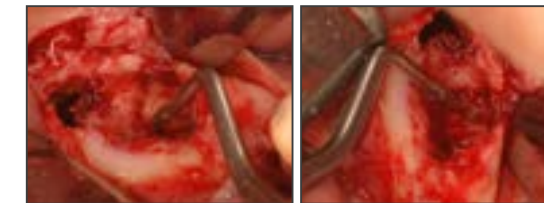

プリチャード コード No.33342
標準価格 **9,800円**

※先端幅/1.60mm

写真提供：築山 鉄平 先生（つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長）


医療機器届出番号 11B1X1000662D213
 一般の名称 歯科用キュレット 販売名 ユニバーサルキュレット est2

鋭匙プライヤー

- バネ付ハンドルのため、微妙な力加減ができ、軟組織をしっかり握めます。
- 先端が細長く作られており、狭い抜歯窩や最後臼歯にも届きやすい形状です。



スリム コード No.14321
標準価格 **29,040円**

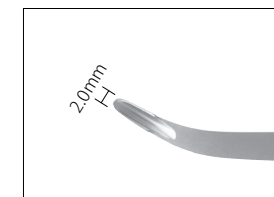

ヘガール型 コード No.14320
標準価格 26,620円

医療機器届出番号 11B1X1000662D001
 一般の名称 歯科用キュレット 販売名 鋭匙プライヤー

エレベーター D型

●しっかりと握れる径の太いハンドルです。

直



#1S

コード No.16121
標準価格 9,570円
先幅4.0mm

#2S

コード No.16122
標準価格 9,570円
先幅3.5mm

#3S

コード No.16123
標準価格 9,570円
先幅3.0mm

#4S

コード No.16124
標準価格 9,570円
先幅2.5mm

#5S

コード No.16125
標準価格 9,570円
先幅2.0mm

反

#1C

コード No.16126
標準価格 9,570円
先幅4.0mm

#2C

コード No.16127
標準価格 9,570円
先幅3.5mm

#3C

コード No.16128
標準価格 9,570円
先幅3.0mm

#4C

コード No.16129
標準価格 9,570円
先幅2.5mm

#5C

コード No.16130
標準価格 9,570円
先幅2.0mm

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

NM

●幅広の先端が特長のエレベーター。



#NM1

コード No.16055
標準価格 9,570円
先幅5.0mm

#NM2

コード No.16056
標準価格 9,570円
先幅4.5mm
(日大型)

#NM2S

コード No.16059
標準価格 9,570円
先幅4.5mm
ストレート

#NM2A

コード No.16058
標準価格 9,570円
先幅4.5mm
リバース

#NM3

コード No.16057
標準価格 9,570円
先幅4.0mm

残根用 NM



残根用 #NM1

コード No.16554
標準価格 9,570円
先幅2.5mm

残根用 #NM1S

コード No.16555
標準価格 9,570円
先幅2.5mm
ストレート

残根用 #NM1R

コード No.16556
標準価格 9,570円
先幅2.5mm
リバース



写真提供：津田 宏尚 先生
(インプラントセンター津田デンタルクリニック院長)

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

智歯用 NM

- 作業長が通常の#NMエレベーターに比べ、10mm長くなっています。
- 指をかけるくぼみがあるため、滑りにくく、力がかけやすいです。



智歯用 #NM2

コード No.16095
標準価格 10,670円
先幅4.5mm

智歯用 #NM2A

コード No.16098
標準価格 10,670円
先幅4.5mm
リバース

※ハンドルに「WT」と刻印が入っています。
智歯：Wisdom Tooth

●操作性の良いスタンダードなハンドルです。

直



#1S

コード No.16101
標準価格 9,570円
先幅4.0mm

#2S

コード No.16102
標準価格 9,570円
先幅3.5mm

#3S

コード No.16103
標準価格 9,570円
先幅3.0mm

#4S

コード No.16104
標準価格 9,570円
先幅2.5mm

#5S

コード No.16105
標準価格 9,570円
先幅2.0mm

反

#1C

コード No.16106
標準価格 9,570円
先幅4.0mm

#2C

コード No.16107
標準価格 9,570円
先幅3.5mm

#3C

コード No.16108
標準価格 9,570円
先幅3.0mm

#4C

コード No.16109
標準価格 9,570円
先幅2.5mm

#5C

コード No.16110
標準価格 9,570円
先幅2.0mm

アングル

●少ない開口量でも臼歯部に届くアングルなので、開口不全の患者さんに有効です。

#20AL

コード No.16015
標準価格 9,570円
先幅3.5mm

#21AL

コード No.16016
標準価格 9,570円
先幅3.5mm



●頬(唇)側に歯質がなく先端部がかかりにくい場合に舌（口蓋）側から少ない開口量でアクセスできます。

写真提供：今北 将人 先生（スマイル歯科・北海道医療大学 非常勤講師）

智歯用

●作業長が通常のエレベーターに比べ20mm長くなっています。
●指をかけるくぼみがあるため、安定します。

智歯用 #1

コード No.16065
標準価格 10,670円
先幅3.0mm
浅曲

智歯用 #2

コード No.16066
標準価格 10,670円
先幅3.0mm
深曲

智歯用 #3

コード No.16067
標準価格 10,670円
先幅3.0mm
逆曲


※ハンドルに「WT」と刻印が入っています。
智歯：Wisdom Tooth

エレベーター B型 スピアー



- 槍状の薄い先端部のため、歯根膜空隙へ挿入がしやすく歯根膜線維を鋭利に切断します。
- インプラントの即時埋入症例の抜歯時、歯周組織をできる限り傷つけずに残すことができます。

1/1

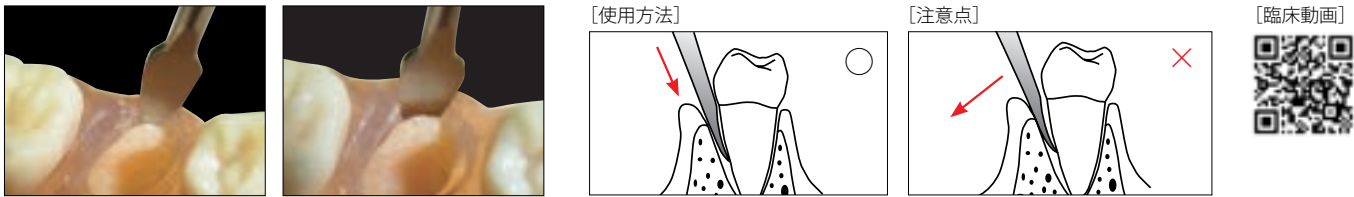

- 槍状の先端が、残根等の見つけにくい歯根膜空隙の探知を可能にします。
- 薄い先端部で、狭窄している歯根膜空隙にも挿入できます。
- 先端部を歯根膜空隙に根尖側方へ挿入することにより、歯周靭帯を切断し、楔作用で歯牙を挺出させます。
- てこの作用で歯根を持ち上げるような操作は行わないでください。先端部が破折、変形する恐れがあります。




写真提供：奈良 嘉峰 先生（茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック院長）

【#1C(カーブ)】




- 先端部が反っているため、歯軸に合わせて挿入しづらい臼歯部での使用に有効です。

【#1R(リバース)】

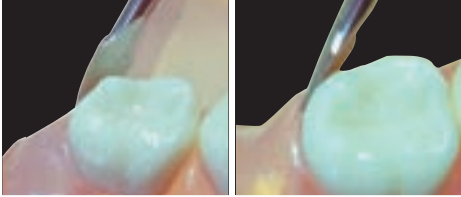

- 先端部が内側に反っているため、臼歯部の遠心面や舌・口蓋側からのアプローチに有効です。

【#2・#3】

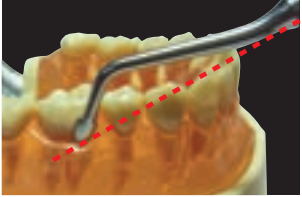

- 臼歯部などストレートシャंकでは届きにくい部位に有効です。
- 作業部の中心がハンドルの延長線上になるように設計されているため、操作バランスがよく、感覚伝達性に優れています。



※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 1181X1000645D005
一般的名称 歯科用エレベーター 販売名 エレベーター B型

ルートチップピックス




1/1

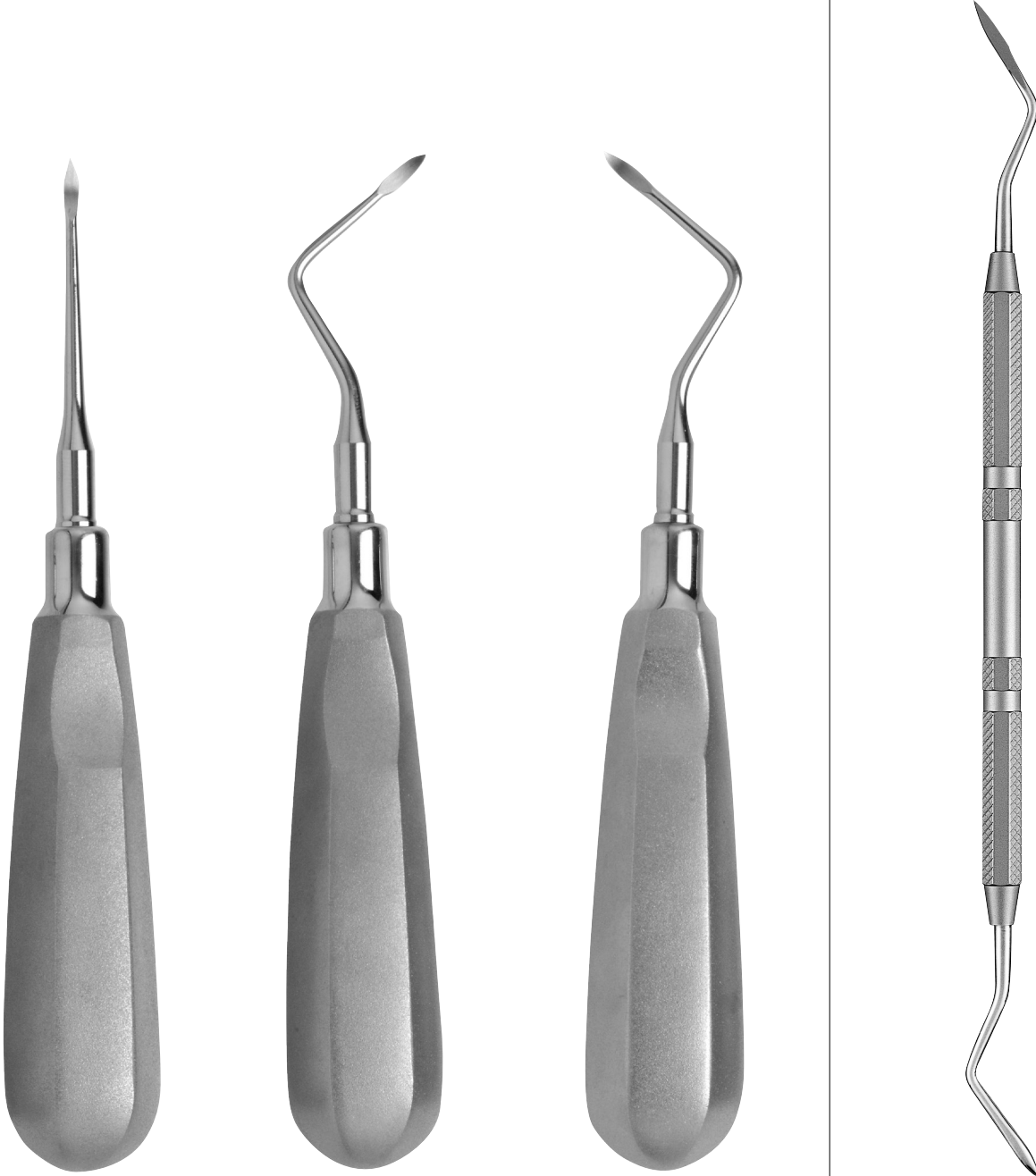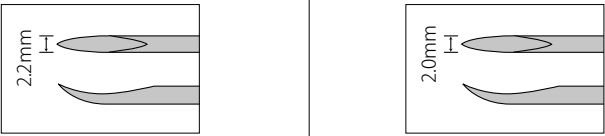

#1S コード No.16085 標準価格 8,030円
#2A コード No.16086 標準価格 8,030円
#3A コード No.16087 標準価格 8,030円
両頭 コード No.14601 標準価格 7,260円

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 1181X1000645D002
一般的名称 歯科用エレベーター 販売名 ルートチップピックス

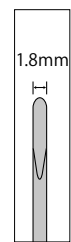

ストレート



#1S-0
コード No.16810
標準価格 9,570円



●前歯部から小臼歯部あたりまでは先端部を歯軸と一致させやすいため、先端方向がわかりやすいストレートをセレクト。臼歯部では初めの歯根膜空隙の拡大に有効です。

カーブ



#1S-15
コード No.16811
標準価格 9,570円
反り角度/15°



●臼歯部はストレートでは先端部を歯軸と一致させにくいため、術歯の部位、傾斜、患者さんの開口量に合わせて2種類のカーブからセレクト。



#1S-30
コード No.16812
標準価格 9,570円
反り角度/30°



リバース




#1S-15R
コード No.16813
標準価格 9,570円
逆反り角度/15°



●臼歯遠心側・舌、口蓋側からのアクセスにはリバースをセレクト。



#1S-30R
コード No.16814
標準価格 9,570円
逆反り角度/30°

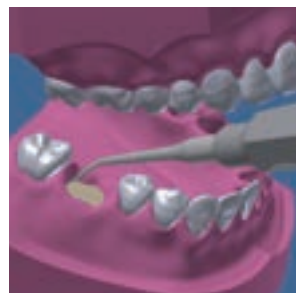

アングル



#2A
コード No.16076
標準価格 9,570円
反り角度/30°



●開口量が少ない患者さん、根尖付近の残根には頸部が屈曲したアングルをセレクト。



#3A
コード No.16077
標準価格 9,570円
反り角度/30°



下顎左側6番 遠心根



下顎左側6番 近心根



下顎右側7番




下顎左側6番 遠心根

写真提供：甘利 佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

骨膜剥離子



1/1

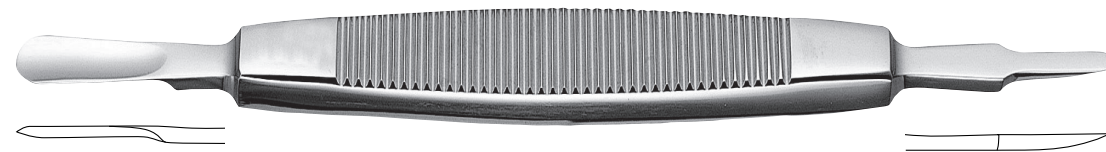

#13 コード No.15130
標準価格 11,440円



#9 コード No.15131
標準価格 11,330円

刃付

●広範囲の骨膜の剥離や組織の排除・保護に使用する《モルト#9》です。

医療機器届出番号 11B1X1000642D012
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 骨膜剥離子

粘膜剥離子



1/1



#13 コード No.15141
標準価格 11,880円

刃付

●広範囲の粘膜や嚢胞壁の剥離、組織の排除・保護に使用します。



#14 コード No.15140
標準価格 10,670円



七浦型 コード No.14230
標準価格 10,670円

医療機器届出番号 11B1X1000642D013
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 粘膜剥離子

Periosteal Order System

剥離子オーダーシステム


手法に合わせて、セレクト自在

「ハンドル」と「双方の先端部」を自由に組み合わせて、オリジナル剥離子をオーダー可能。
スムーズな治療を叶え、インスツルメントに要するコストやスペースの削減にも貢献します。

Point1 ハンドル×3種類、先端部×31種類の
豊富なラインナップ

Point2 手法に合わせ手組み合わせることで、
スムーズな治療が可能


Point3 インスツルメントの本数を減らせるので、
コスト削減に貢献

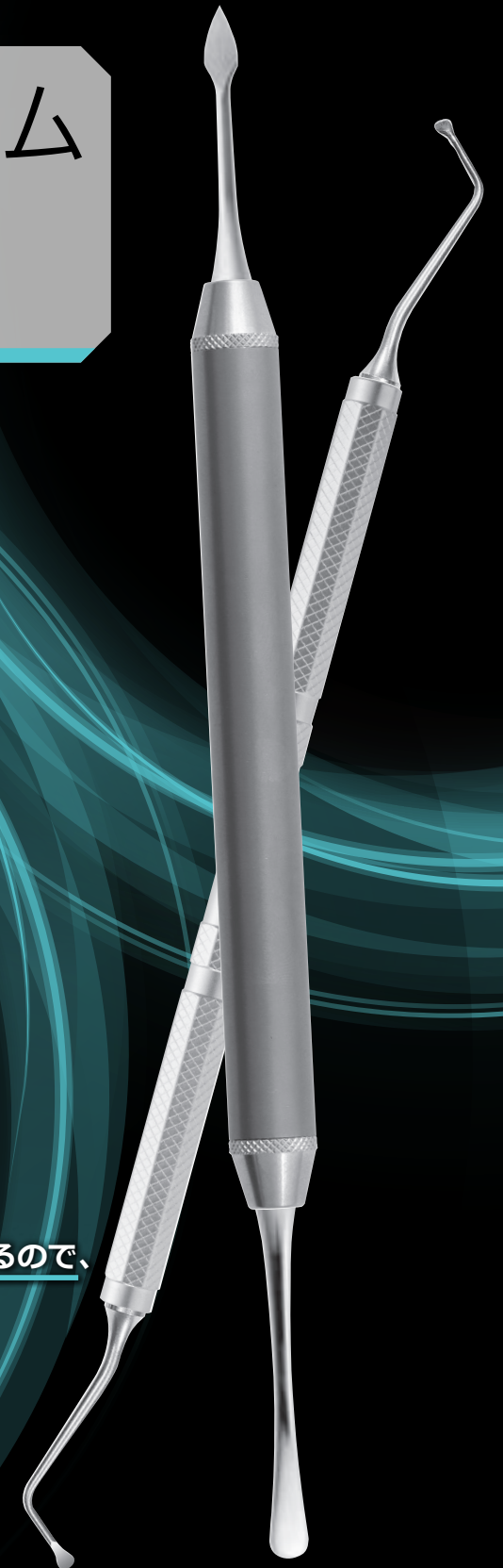

剥離子 オーダーシステム


- ハンドルと先端部を自由に組合わせてオーダーできます。
術者の手法に合った組合せで、治療がよりスムーズになります。
- ハンドルは3種類、先端部は31種類から選べます。

ハンドル

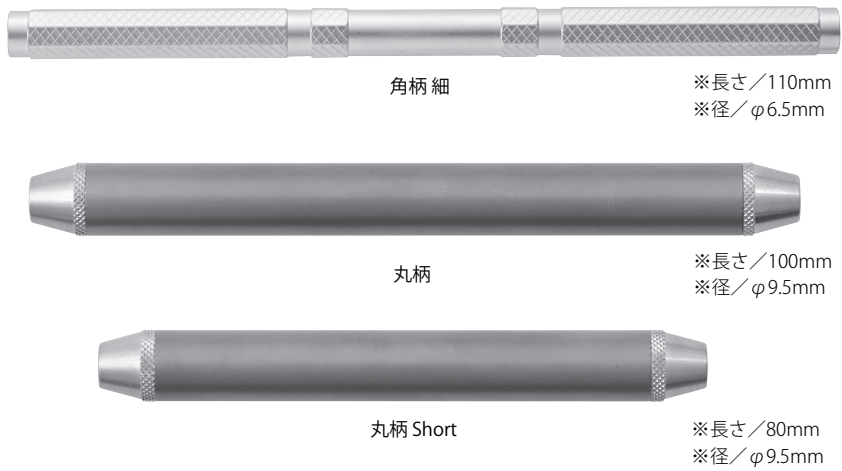


先端部


[粘膜（広範囲）]

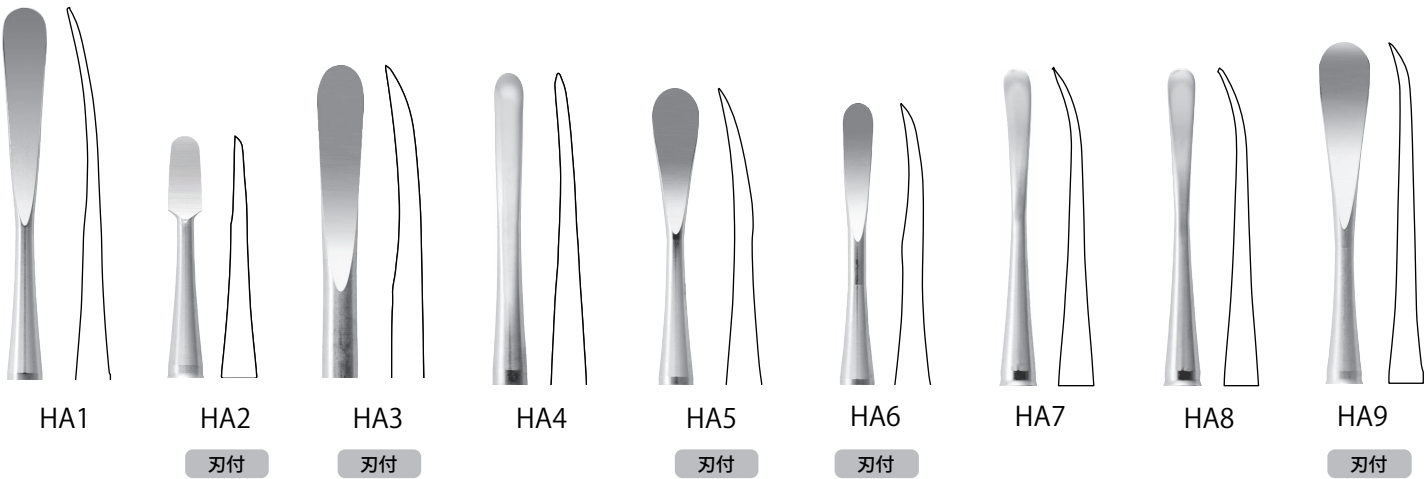

[歯間乳頭]

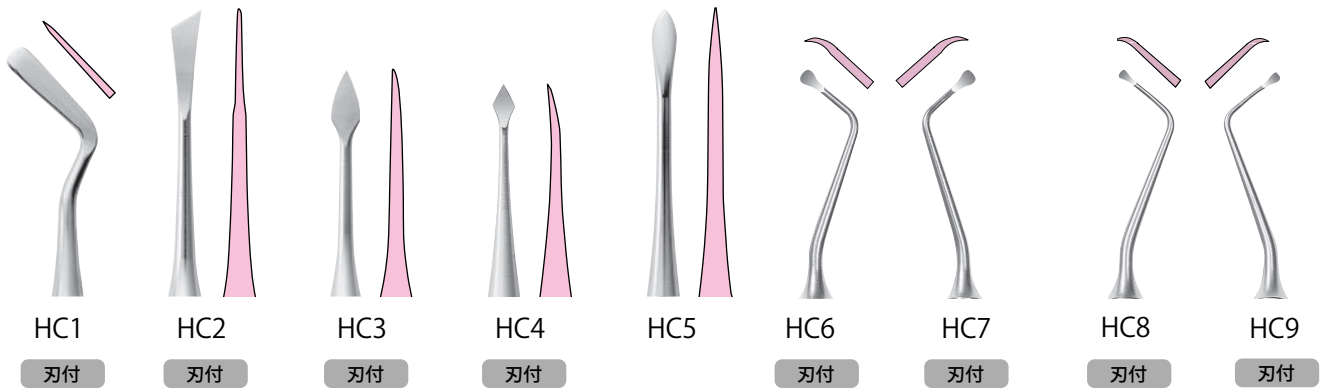

ご注文方法

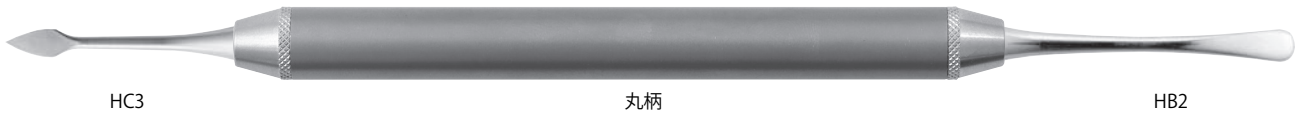

[組合わせ例]


ハンドル：丸柄
先端部：HC3、HB2 をご指定の場合

コード No.15008 「剥離子 オーダーシステム 丸柄 + HC3 + HB2」


コード No.	品名	標準価格
15003	角柄 細	10,670円
15008	丸柄	11,880円
15009	丸柄 Short	11,330円

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

[歯肉排除]

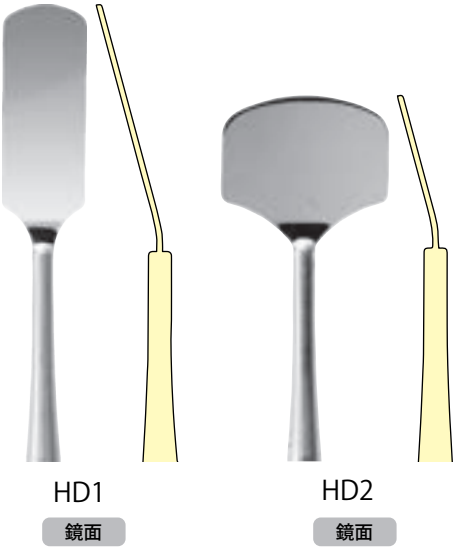

[骨膜]

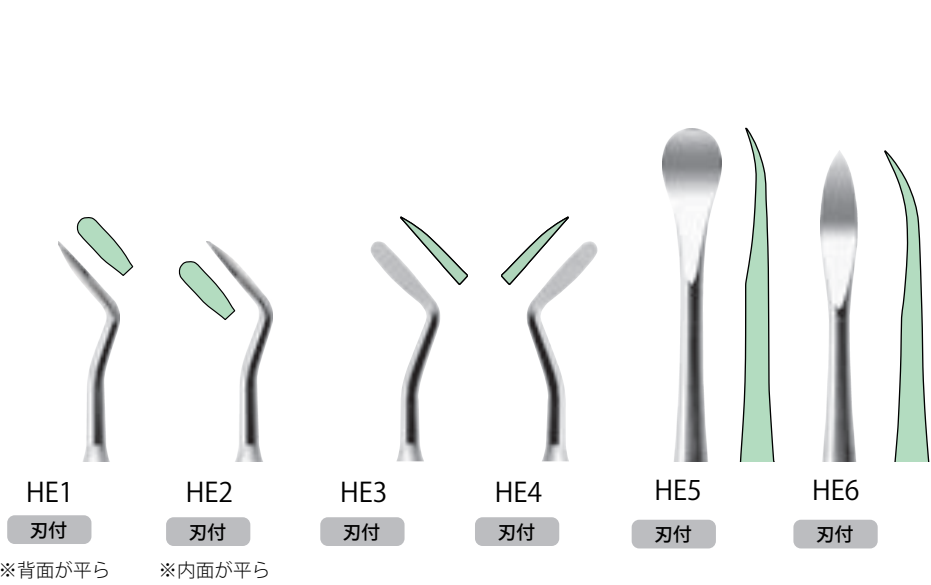

パターン1 保坂 均 先生 ご考案 日本歯周病学会 指導医・専門医

- 頰部に4方向の角度が付与されたブレードが鋭利な骨膜剥離子です。
- 上下・左右を組合せた2本であらゆる部位に対応でき、歯周外科に適しています。



HE1 + 丸柄 + HE2



HE3 + 丸柄 + HE4

[HE1]



●口蓋側を剥離します。

[HE2]



●唇側を剥離します。

パターン2 山本 松男 先生 昭和大学歯学部 歯周病学講座 教授

- スプーン状の先端部には周囲300°に鋭いブレードが付いています。
- 極小サイズのため、狭い歯間部等でも歯周組織に与えるダメージを最小限に抑えて剥離できます。
- 鋭匙として狭い部分での不良肉芽の除去にも有用です。



HC6 + 丸柄 + HC7



HC8 + 丸柄 + HC9

[HC6]



●歯間が2mm程度の狭い場合に、極小サイズの先端部が有効。
歯肉弁の直下にある骨膜（結合組織）を剥離することができ、
狭い（血流の乏しい）歯肉組織へのダメージを減少させます。

[HC8]



●極小スプーン状の先端部は鋭匙としても有用。
クレーター状骨欠損部等でも骨を削除すること
なく、不良肉芽のみを掻き出すことができます。

パターン3 多保 学 先生 たば歯科医院 理事長 日本歯科大学附属病院 臨床准教授



HB3 + 丸柄 + HC4

[HB3]



[HC4]



パターン4 上田 秀朗 先生 上田塾主宰

1/1



HB4 + 丸柄 + HC4



HA2 + 丸柄 + HB5

パターン5 青井 良太 先生 ご考案 SBC (Surgical Basic Course) 主幹


- 歯肉排除用の組み合わせ。1本で大小揃い、術部の広さに合わせてスムーズに対応でき便利です。
- 術部確認のミラー機能も併用できます。




HB1 + 丸柄 + HC1 (ハーシュフェルト)



HC6 + 丸柄 + HC7

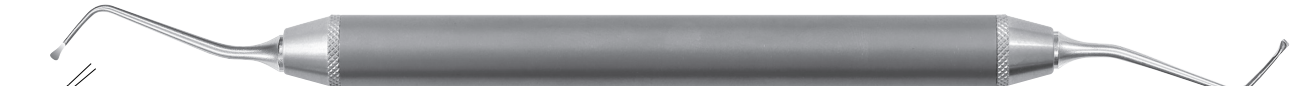

HC8 + 丸柄 + HC9

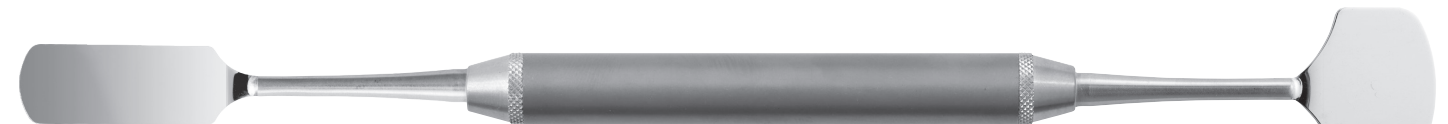

HD1 + 丸柄 Short + HD2

[HD2]




●広範囲の歯肉を排除できます。

パターン6 石井 宏 先生 ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師




HB2 + 丸柄 + HC2 (ペリオスチール24G)


パターン7 渥美 克幸先生 デンタルクリニック K 院長

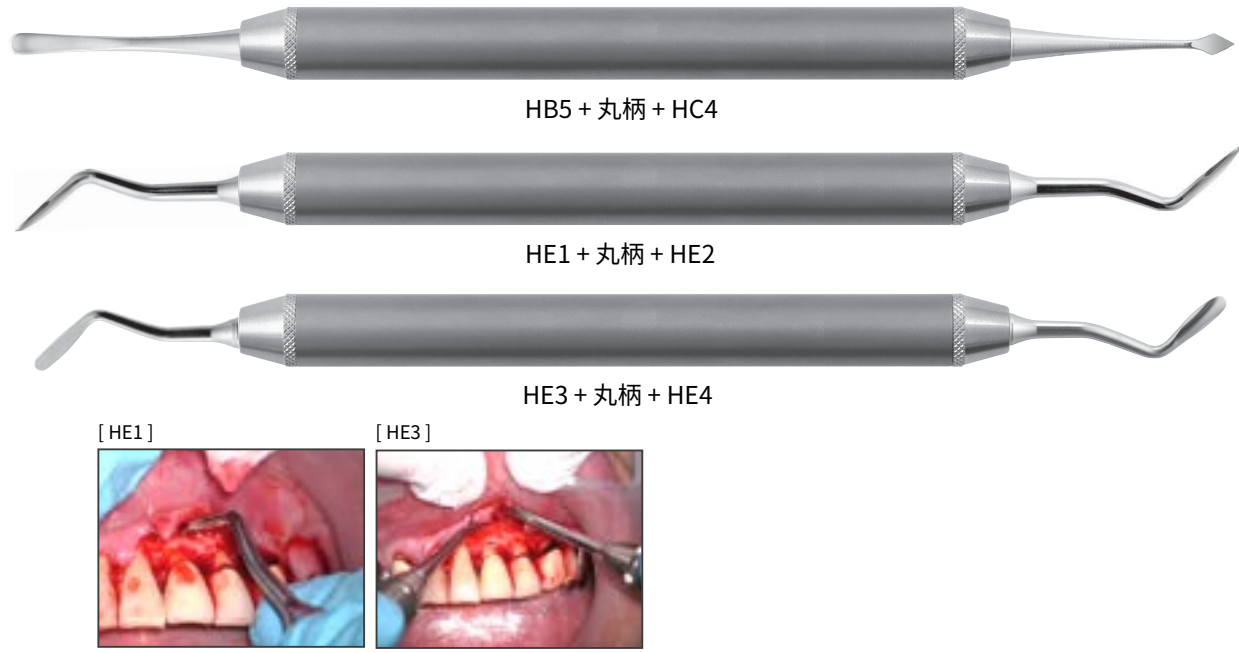

パターン8 奈良 嘉峰先生 茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長

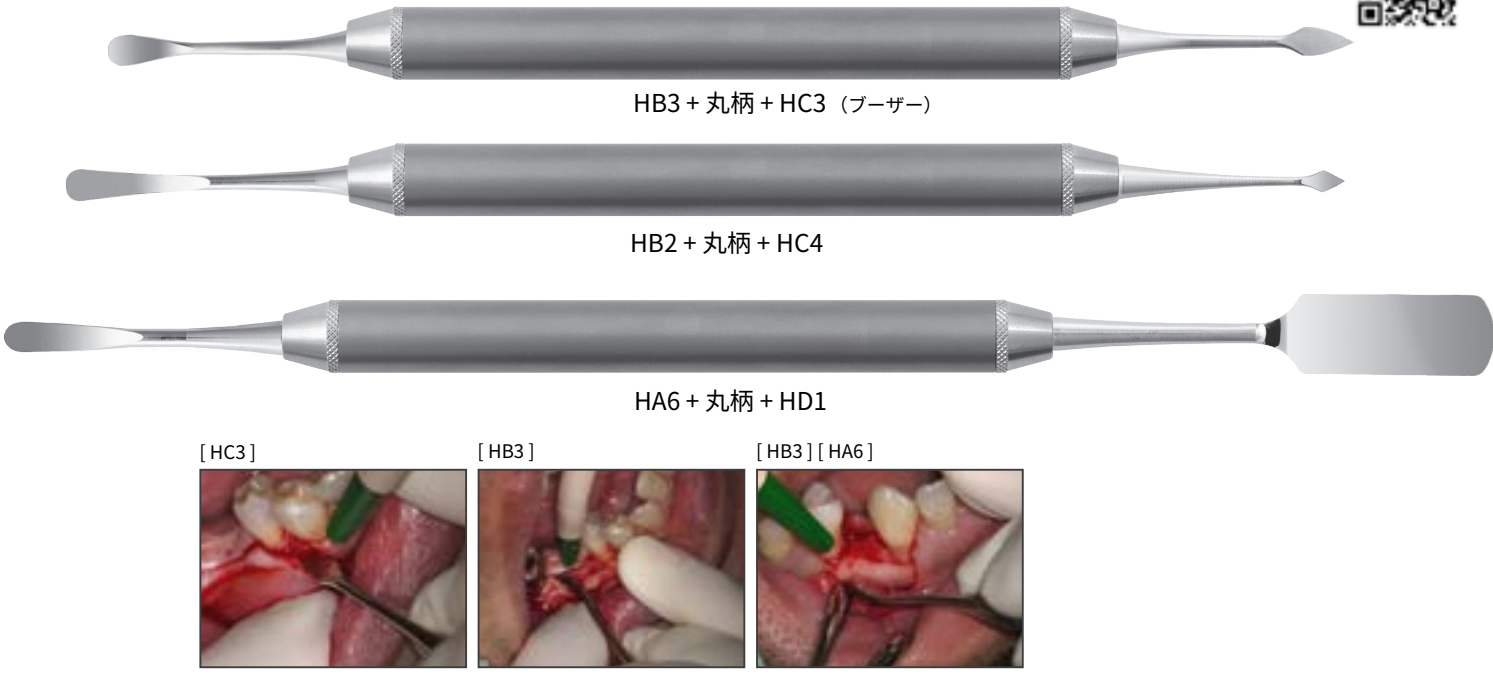


パターン9 中家 麻里先生 なかや歯科 院長

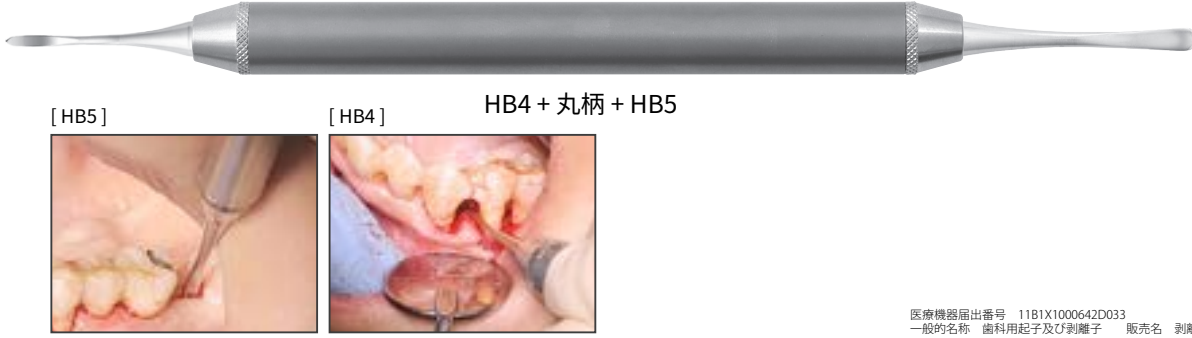


医療機器届出番号 1181X1000642D033
一般名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

パターン10 築山 鉄平先生 つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長

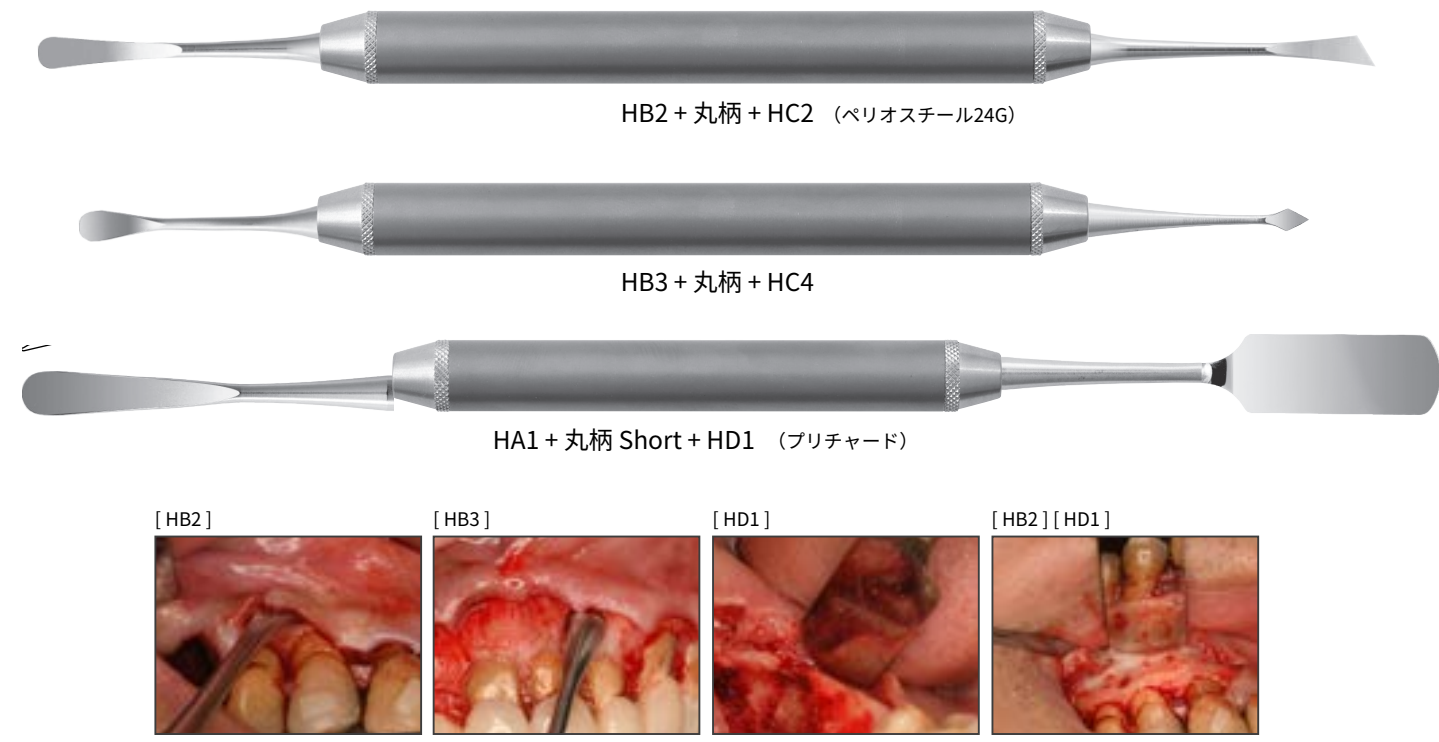

パターン11 増田 英人先生 ますだ歯科医院 院長

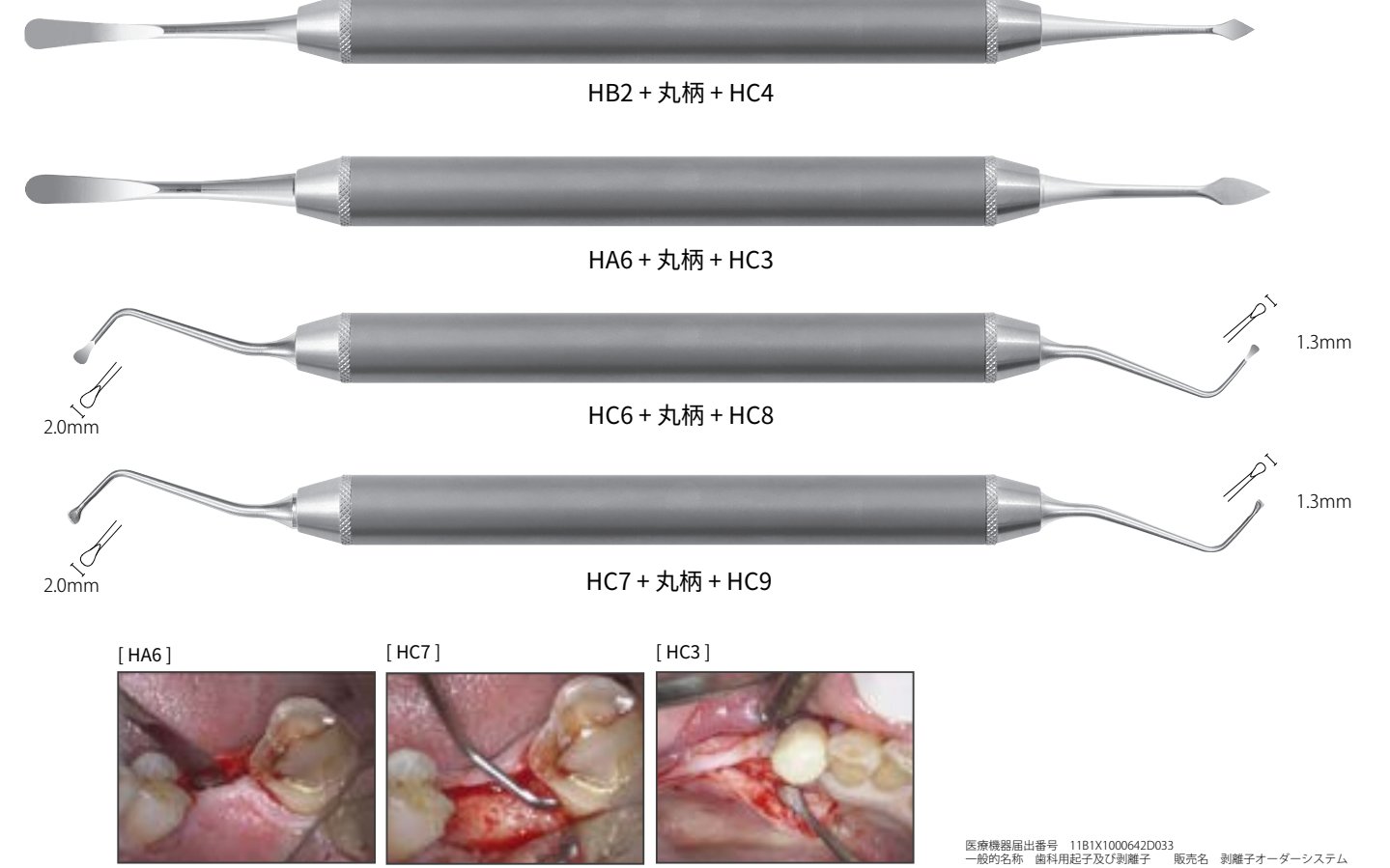

医療機器届出番号 1181X1000642D033
一般名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

剥離子 オーダーシステム



パターン 12 大森 有樹 先生 大阪 SJCD 会長 歯科勉強会大森塾主宰

1/1



HB1 + 丸柄 + HC1 (ハーシュフェルト)

[HB1]




[HC1]



パターン 13 尾野 誠 先生 四条烏丸歯科クリニック



HB5 + 丸柄 + HC4

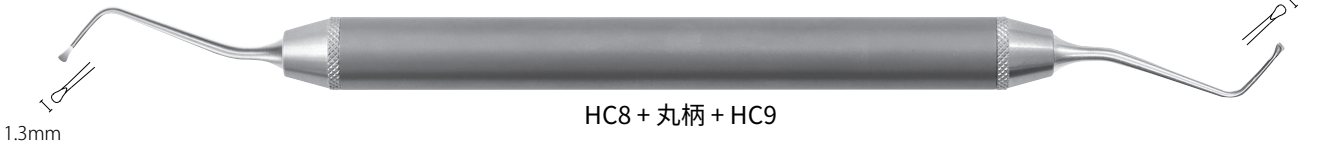

HC8 + 丸柄 + HC9

[HB5]



ディセクター




コード No.30020
標準価格 8,030円




写真提供：中家 麻里 先生
(なかや歯科 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000634D301
一般的名称 歯肉切除メス 販売名 ディセクター

剥離子MS

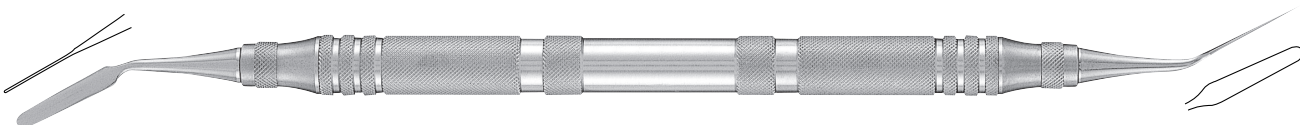

#1 コード No.32341
標準価格 10,670円

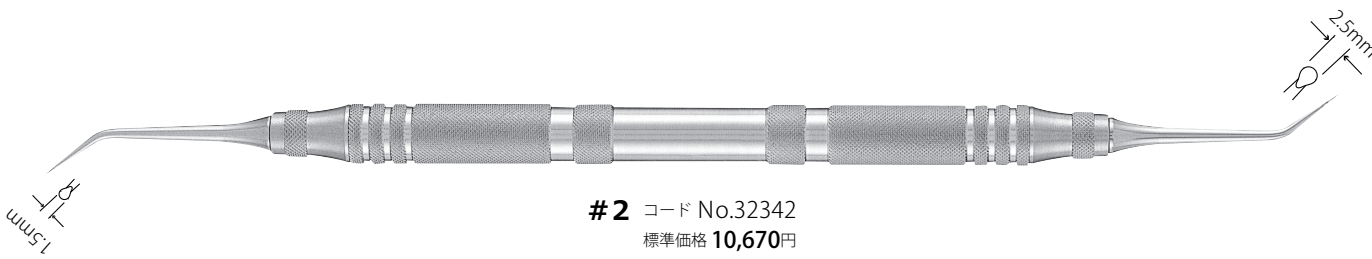

#2 コード No.32342
標準価格 10,670円



写真提供：石井 宏 先生
(ペンシルバニア大学 非常勤講師
神奈川歯科大学 非常勤講師)



写真提供：安斉 昌照先生
(あんざい歯科医院 理事長)



医療機器届出番号 11B1X1000642D016
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子 MS

Tungsten Carbide

超硬 (持針器・ハサミ 超硬加工モデル) 耐摩耗性 × 耐久性で選ぶなら「超硬」

優れた耐摩耗性・耐久性をインスツルメントに与えてくれる、「超硬」加工。
こだわりあるドクターに、より長く愛用いただきたいセレクションです。

Point 1 耐摩耗性に優れた超硬チップにより、
安定した把持力を維持

Point 2 ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ超硬により、
更に滑らかなハサミの切れ味と耐久性を実現

Point 3 長寿命の実現で、
インスツルメントのコスト削減に寄与

持針器



4/5

新型



※超硬付
サイズ／170mm
指定縫合糸／3-0 ～ 5-0
指定縫合針φ 0.38 ～ φ 0.63mm

コード No.14505
標準価格 33,330円

七浦型



サイズ／168mm
指定縫合糸／3-0 ～ 5-0
指定縫合針φ 0.38 ～ φ 0.63mm

直 コード No.14501
標準価格 18,700円

ペリオ



サイズ／141mm
指定縫合糸／3-0 ～ 5-0
指定縫合針φ 0.38 ～ φ 0.63mm

直 コード No.14506
標準価格 18,700円

曲 コード No.14509
標準価格 18,700円

新型	医療機器届出番号	1181X1000630D003	一般的名称	持針器	販売名	持針器	新型
七浦型	医療機器届出番号	1181X1000630D001	一般的名称	持針器	販売名	持針器	七浦型
ペリオ	医療機器届出番号	1181X1000630D005	一般的名称	持針器	販売名	持針器	ペリオ

持針器

マチュー



4/5

直

コード No.29012
標準価格 34,650円

曲

コード No.29017
標準価格 34,650円

※超硬付
サイズ／141mm
指定縫合糸／3-0～5-0
指定縫合針φ 0.38～φ 0.63mm

マチュー ソフト

曲

コード No.29018
標準価格 37,730円

※超硬付
サイズ／159mm
指定縫合糸／3-0～5-0
指定縫合針φ 0.38～φ 0.63mm

[マチューソフト 曲／口蓋裂用]

閉

開

- ラチェットが柔らかいため、ペングリップでの開閉が可能な上、繰り返しの開閉での疲労感が少ないです。
- ハンドル中央部の幅を狭くし、操作しやすくしました。

口蓋裂用

コード No.14521
標準価格 41,800円

※超硬付
サイズ／190mm
指定縫合糸／3-0～5-0
指定縫合針φ 0.38～φ 0.63mm

マチュー マチューソフト
口蓋裂用

医療機器届出番号 1181X1000630D014
一般的名称 持針器 販売名 持針器 マチュー
医療機器届出番号 1181X1000630D016
一般的名称 持針器 販売名 持針器 口蓋裂用

持針器 スティル



4/5

●先端が薄く、狭い部位での操作性に優れています。

L

コード No.14513
標準価格 33,330円

※超硬付
サイズ／170mm
指定縫合糸／4-0～6-0
指定縫合針φ 0.33～φ 0.53mm

スティル

通常の持針器

医療機器届出番号 1181X1000630D006
一般的名称 持針器 販売名 持針器 スティル

持針器 ライダー



4/5

●先端が薄く、狭い部位での操作性に優れています。

コード No.14515
標準価格 33,330円

※超硬付
サイズ／138mm
指定縫合糸／4-0～6-0
指定縫合針φ 0.33～φ 0.53mm

ライダー

通常の持針器

医療機器届出番号 1181X1000630D007
一般的名称 持針器 販売名 持針器 ライダー

持針器

ヘガール



4/5



コード No.14510
標準価格 32,010円

※超硬付
サイズ／160mm
指定縫合糸／3-0～5-0
指定縫合針φ0.38～φ0.63mm

ベビークライルウッド



コード No.29014
標準価格 26,620円

※超硬付
サイズ／149mm
指定縫合糸／3-0～5-0
指定縫合針φ0.38～φ0.63mm

ホルセイ



コード No.29013
標準価格 26,620円

※超硬付
サイズ／134mm
指定縫合糸／3-0～5-0
指定縫合針φ0.38～φ0.63mm

ヘガール	医療機器届出番号 1181X1000630D012	一般名称 持針器	販売名 持針器	ヘガール
ベビークライルウッド	医療機器届出番号 1181X1000630D011	一般名称 持針器	販売名 持針器	ベビークライルウッド
ホルセイ	医療機器届出番号 1181X1000630D013	一般名称 持針器	販売名 持針器	ホルセイ

インスツルメントオイル（防錆剤入）

鉗子類のメンテナンスに！

- 鉗子、持針器、ハサミなどの可動部（ジョイント部）を有するインスツルメントには動きを維持するため、定期的に注油を行って下さい。油切れを起こすと機能を損なう恐れがあります。また、防錆剤により、錆びやすいジョイント部からの錆びの発生を防ぎます。
- インスツルメントを洗浄後、オートクレーブ前に少量塗布して下さい。



持針器 カストロビージョ



4/5

●少ない動きで開閉し、スムーズでスピーディーな操作ができます。

〔臨床動画〕



HU型



コード No.29010
標準価格 85,800円

※超硬付
サイズ／138mm
指定縫合糸／4-0～6-0
指定縫合針φ0.33～φ0.38mm
考案：上田秀朗先生（北九州歯学研究会 会長 USC客員講師）

超硬付



直 コード No.29011
標準価格 71,940円

曲 コード No.29015
標準価格 71,940円

※超硬付
サイズ／138mm
指定縫合糸／5-0～6-0
指定縫合針φ0.33～φ0.38mm



直 コード No.14511
標準価格 33,330円

曲 コード No.14512
標準価格 33,330円

サイズ／138mm
指定縫合糸／5-0～6-0
指定縫合針φ0.33～φ0.38mm

替刃メスハンドル



1/1



#3 コード No.29091
標準価格 3,200円



リップセーフ コード No.15304
標準価格 13,200円

医療機器届出番号 1181X1000634D001
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 替刃メスハンドル

メス



1/1



歯根膜剥離用 コード No.14003
標準価格 4,400円



- 抜歯の際、効果的に歯根膜を剥離します。
- 刃部が三角形で、押しても操作できます。

医療機器届出番号 1181X1000634D101
一般的名称 メス 販売名 メス

オルバンメス



1/1

- 切開や歯間部歯肉組織の切除に有効です。
- 角度の付いたブレードと複屈曲のシャンクで臼歯部に適用し、隣接歯間部歯肉切除にも有効です。



コード No.29076
標準価格 9,800円



写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)




写真提供：多保 学 先生
(たば歯科医院 理事長
日本歯科大学付属病院 臨床准教授)

医療機器届出番号 1181X1000634D106
一般的名称 メス 販売名 オルバンメス

骨ノミ




1/1

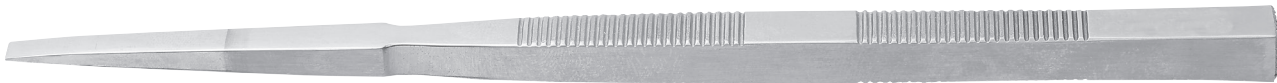

先幅4.0mm

両刃 角柄 コード No.14013
標準価格 12,100円

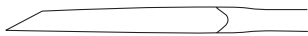

先幅3.5mm

片刃 角柄 コード No.14014
標準価格 12,100円



先幅3.5mm

溝刃 角柄 コード No.14015
標準価格 12,100円

両刃	医療機器届出番号	1181X1000641D009
片刃	一般的名称	のみ 販売名 骨ノミ 両刃
溝刃	医療機器届出番号	1181X1000641D009
	一般的名称	のみ 販売名 骨ノミ 片刃
	医療機器届出番号	1181X1000641D009
	一般的名称	のみ 販売名 骨ノミ 溝刃

チゼル バックアクション



1/1

- 歯肉切除と剥離に有効です。
- フラップ手術、根面の搔爬、残存歯肉繊維の除去に有効です。



コード No.29077
標準価格 9,800円



写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)



写真提供：多保 学 先生
(たば歯科医院 理事長
日本歯科大学付属病院 臨床准教授)


医療機器届出番号 1181X1000634D106
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 チゼル バックアクション

マレット ユニバーサル



●コンパクトで軽量なため、力の入れすぎを防ぎます。

1/1

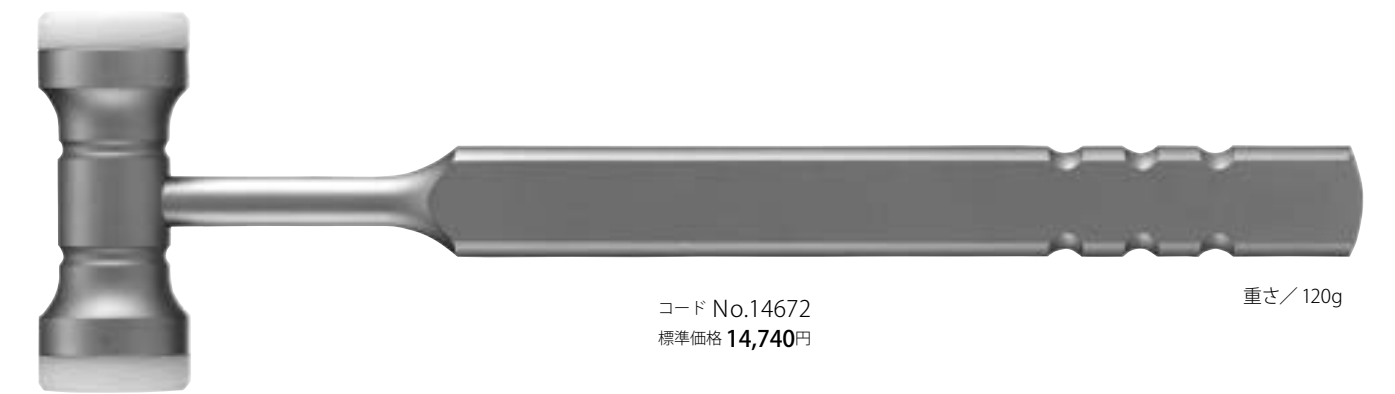

コード No.14672
標準価格 14,740円

重さ／120g

※白色部／材質 PTFE 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 1181X1000643D004
一般的名称 つち 販売名 マレット ユニバーサル

マレット 外科用



●ベースが硬めな樹脂のため、力が伝わりやすいです。

1/1



ハード コード No.15211
標準価格 13,310円

重さ／220g

※白色部／材質 PFA 耐熱温度260℃

●ベースがシリコンのため、ソフトな打感です。



ソフト コード No.15210
標準価格 12,100円

重さ／220g

※灰色部／材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 1181X1000643D001
一般的名称 つち 販売名 マレット 外科用

骨ヤスリ



1/1



#11 コード No.14411
標準価格 14,740円



#12 コード No.14412
標準価格 14,740円



ミニ コード No.14413
標準価格 14,740円

● #12より一回り小さなサイズです。

医療機器届出番号 1181X1000644D001
一般的名称 やすり 販売名 骨ヤスリ

開口器



3/4



ローゼル ケーニツヒ コード No.14642
標準価格 34,650円 (シリコンカバー4入)

サイズ／185mm

単品

シリコンカバー
コード No.90394
標準価格 490円 (2入)
内径φ7mm

※シリコンカバー／材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 1181X1000650M101
一般的名称 開口器 販売名 開口器

開創鉤 ランゲンベック


- 扁平で長い鉤のため、組織を大きく圧排でき、視野拡大に有効です。
- ハンドルから鉤までが長いため、アシスタントが保持しても邪魔になりません。




3/4



サイズ／210mm

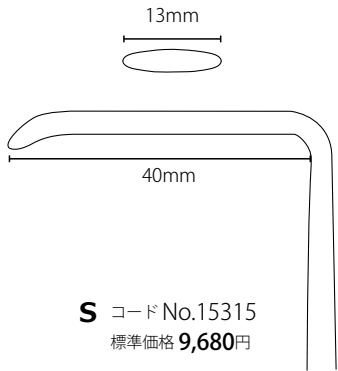

S コード No.15315
標準価格 9,680円

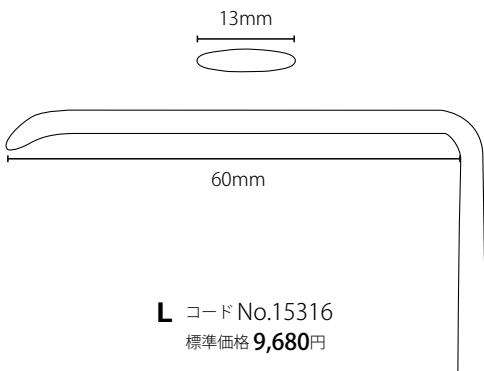

L コード No.15316
標準価格 9,680円

医療機器届出番号 11B1X1000638M101
一般的名称 鉤 販売名 開創鉤

L字鉤

- 手術時の歯肉弁開拡・牽引に適しています。



1/1



コード No.15314
標準価格 5,830円

6.0mm

医療機器届出番号 11B1X1000650D102
一般的名称 歯科用開創器 販売名 L字鉤

チークリトラクター

- 骨削除時における骨膜弁基底部の圧排・保護に適しています。
- 口角・口唇の保護や舌圧子としても使用できます。



1/1




コード No.14620
標準価格 5,340円

医療機器届出番号 11B1X1000650D101
一般的名称 歯科用開創器 販売名 チークリトラクター



口角鉤 ステンベルヒ




1/1

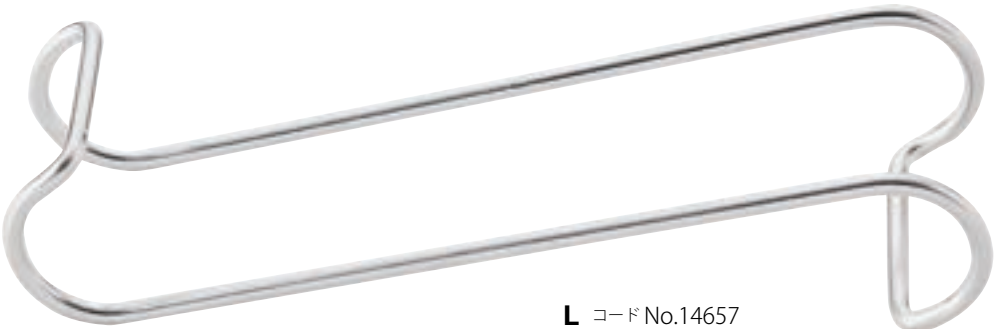

L コード No.14657
標準価格 4,400円

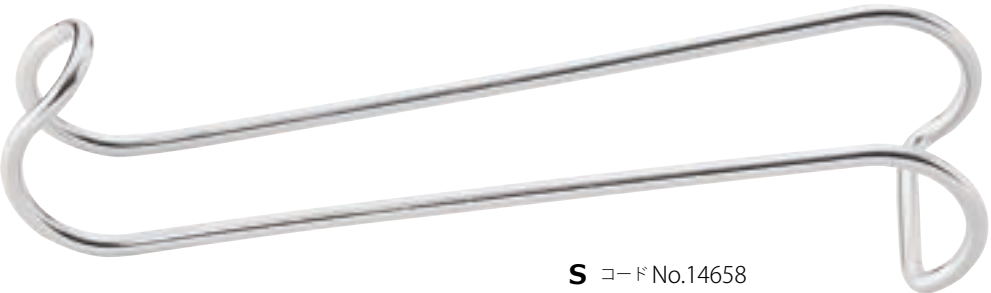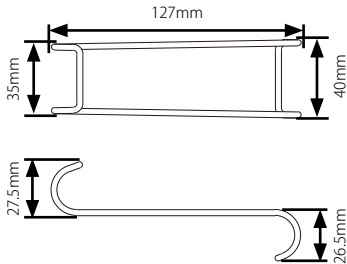

S コード No.14658
標準価格 4,400円

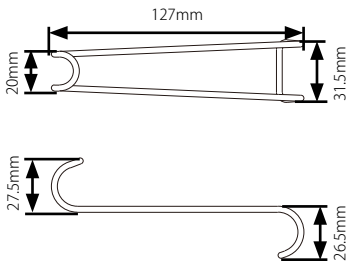

医療機器届出番号 11B1X1000650D103
一般的名称 歯科用開創器 販売名 口角鉤 ステンベルヒ

舌圧子 スタンダード



1/1




コード No.14661
標準価格 1,600円

医療機器届出番号 11B1X1000615D002
一般的名称 舌圧子 販売名 舌圧子 スタンダード



スペンサー 直
コード No.29026
標準価格 14,520円

サイズ／115mm

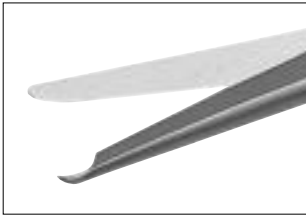

●片方の先端部分が半月状態になっているため、縫合糸をひっかけやすく、切る時に糸が逃げません。



スペンサー 曲
コード No.29029
標準価格 16,060円

サイズ／114mm



●最後臼歯部遠心にも挿入できます。



セイフティ
コード No.12828
標準価格 10,670円

サイズ／110mm




●先端が球状なので歯肉を傷つける心配がありません。



スリム
コード No.12831
標準価格 9,350円

サイズ／108mm

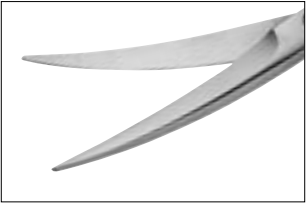

●先端が細く丸いので、縫合糸の隙間に挿入しやすくなっています。



ロングスリム
コード No.12832
標準価格 12,760円

サイズ／150mm



〔ロングスリム〕

〔標準タイプ〕

●臼歯部の抜糸時に手指を口腔内に入れることなく術部まで届くため、視野の邪魔になりません。

写真提供：林 康弘先生（林歯科医院 院長）

歯肉バサミ

ゴールドマンフォックス



1/1



1 コード No.12801
標準価格 16,060円

※刃部ギザ付
サイズ／130mm



1 TC コード No.12803
標準価格 29,370円

※超硬付
※刃部ギザ付
サイズ／130mm



2 コード No.12802
標準価格 16,060円

※刃部ギザ付
サイズ／127mm



1 ST コード No.29105
標準価格 17,500円

※刃部ギザ付
サイズ／130mm

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000635D201
一般的名称 歯科用歯肉はさみ 販売名 歯肉バサミ

歯肉バサミ



1/1



ラグランジュ コード No.29023
標準価格 14,520円

※刃部ギザ付
サイズ／112mm

アイリス



サイズ／114mm



直 コード No.29021
標準価格 12,100円



曲 コード No.29022
標準価格 12,760円

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000635D201
一般的名称 歯科用歯肉はさみ 販売名 歯肉バサミ



18 コード No.15180
標準価格 16,060円

※刃部ギザ付
サイズ／123mm



27 コード No.12827
標準価格 14,520円

サイズ／137mm



ジョセフ コード No.12830
標準価格 12,760円

サイズ／150mm

●柄の部分が長く、臼歯部に届きやすくなっています。

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 1181X1000635D201
一般的名称 歯科用歯肉はさみ 販売名 歯肉バサミ

外科ピンセット



有 鉤

1/1



直 コード No.11333
標準価格 5,230円



曲 コード No.11334
標準価格 5,230円



#4 コード No.15040
標準価格 5,280円

無 鉤



直 コード No.11331
標準価格 5,230円



曲 コード No.11332
標準価格 5,230円

外科ピンセット マッカンドー



1/1



有鉤 コード No.11335
標準価格 7,920円




無鉤 コード No.11336
標準価格 7,920円

外科ピンセット 鋭匙形

135℃

●鋭匙状の先端で、不良肉芽や嚢胞を効率よく除去できます。



1/1

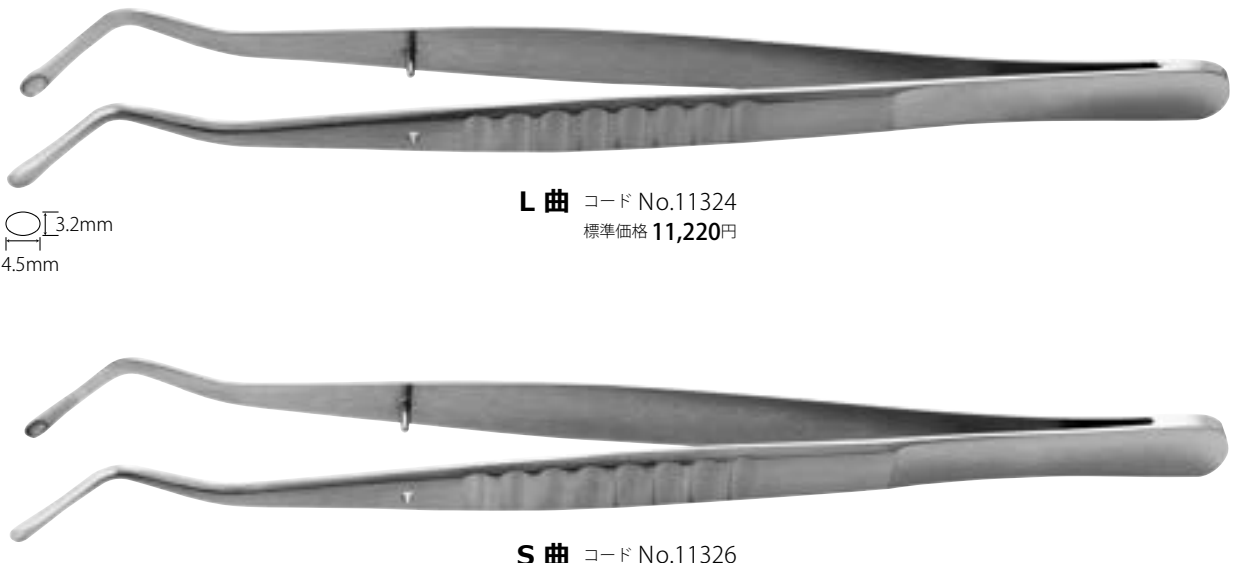

L 曲 コード No.11324
標準価格 11,220円

S 曲 コード No.11326
標準価格 11,220円

医療機器届出番号 11B1X1000636D011
一般的名称 ピンセット 販売名 外科ピンセット

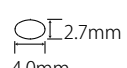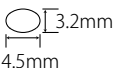

外科ピンセット ルツツエ

135℃

1/1



コード No.11210
標準価格 4,840円

医療機器届出番号 11B1X1000636D011
一般的名称 ピンセット 販売名 外科ピンセット

外科ピンセット 縫合用


135℃

1/1



コード No.11216
標準価格 13,310円

医療機器届出番号 11B1X1000636D001
一般的名称 ピンセット 販売名 外科ピンセット 縫合用

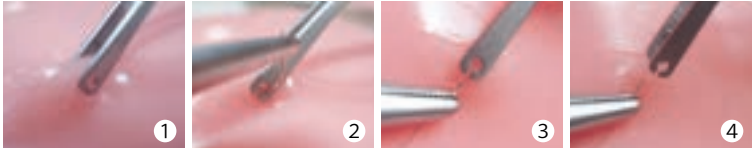


●ピンセットで歯肉を保持したまま縫合針を通せるため、ズレることなく縫合できます。

外科ピンセット アドソン

135℃

●縫合時やオペ時に繊細に軟組織を把持します。

1/1

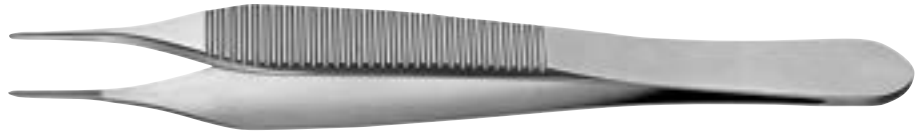

有鉤 直 コード No.29041
標準価格 8,360円

無鉤 直 コード No.30041
標準価格 8,360円

有鉤 曲 コード No.29045
標準価格 8,360円

無鉤 曲 コード No.29046
標準価格 8,360円

医療機器届出番号 11B1X1000636D002
一般的名称 ピンセット 販売名 外科ピンセット アドソン




外科ピンセット グレーフエ

135℃

●ギザの付いた幅広の先端で、歯肉を傷つけずにしっかりと把持できます。



1/1

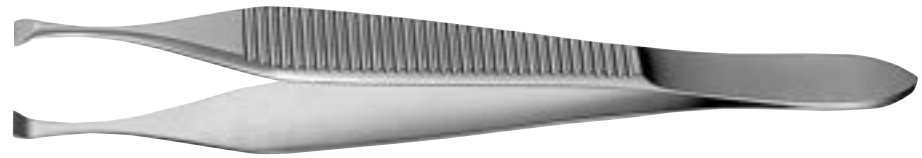

直 コード No.29043
標準価格 10,670円

曲 コード No.29044
標準価格 10,670円


医療機器届出番号 11B1X1000636D004
一般的名称 ピンセット 販売名 外科ピンセット グレーフエ

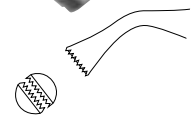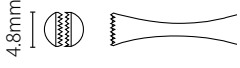

吸引管

本体



4/5

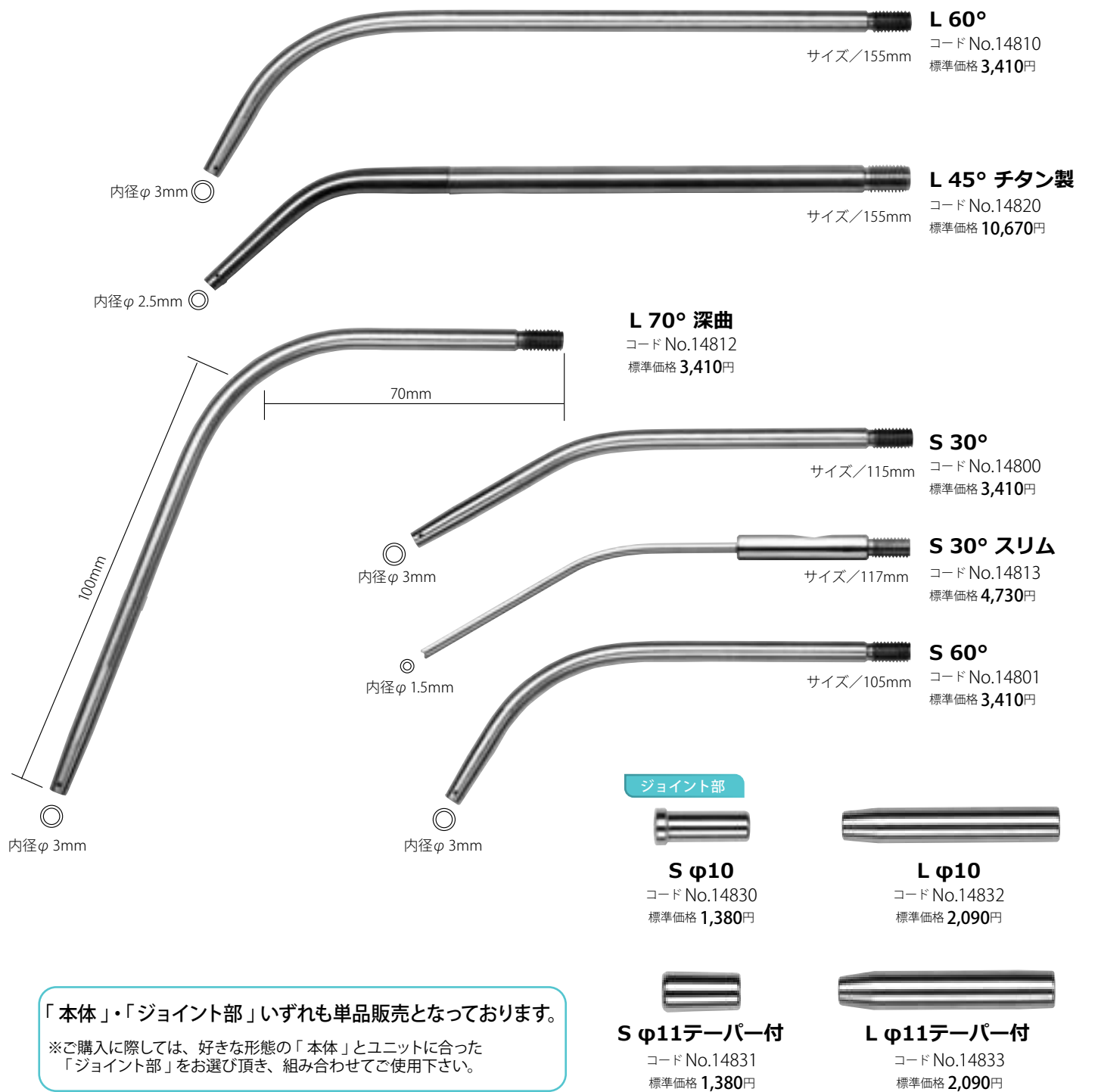

「本体」・「ジョイント部」いずれも単品販売となっております。

※ご購入に際しては、好きな形態の「本体」とユニットに合った「ジョイント部」をお選び頂き、組み合わせてご使用下さい。

別 売

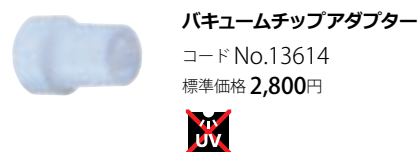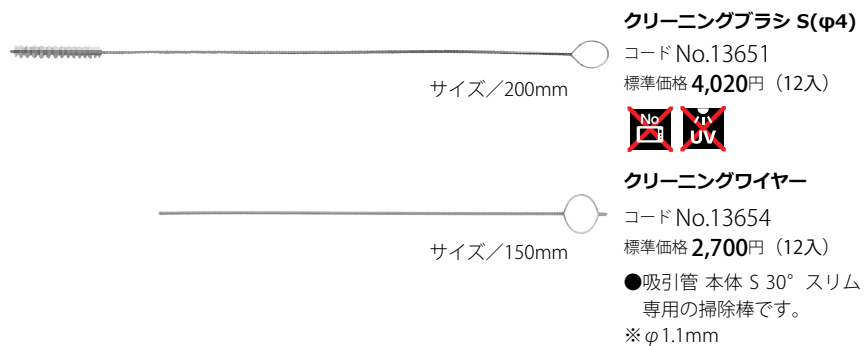


●バキューム部内径φ16mmのユニットに
ご使用下さい。
※「φ11テーパ付」のジョイント部に
付けて使用します。
※材質 PTFE 耐熱温度260℃

医療機器承認番号 21900BZX00982000
 一般の名称 歯科用吸引管 販売名 吸引管

吸引管アダプター 排唾管接続部用


●すべてのユニットラインに対応しています。

1/1

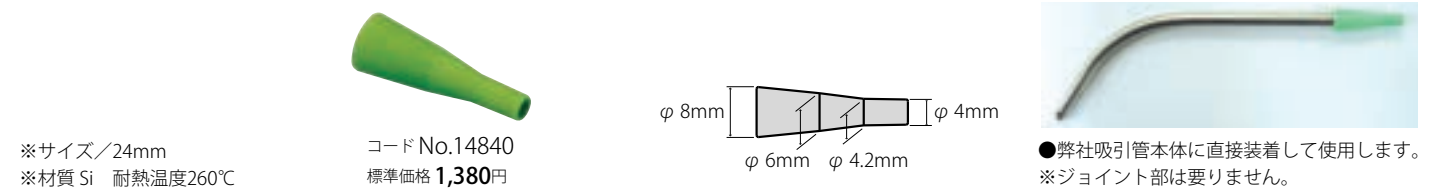

ゾンデ

1/1

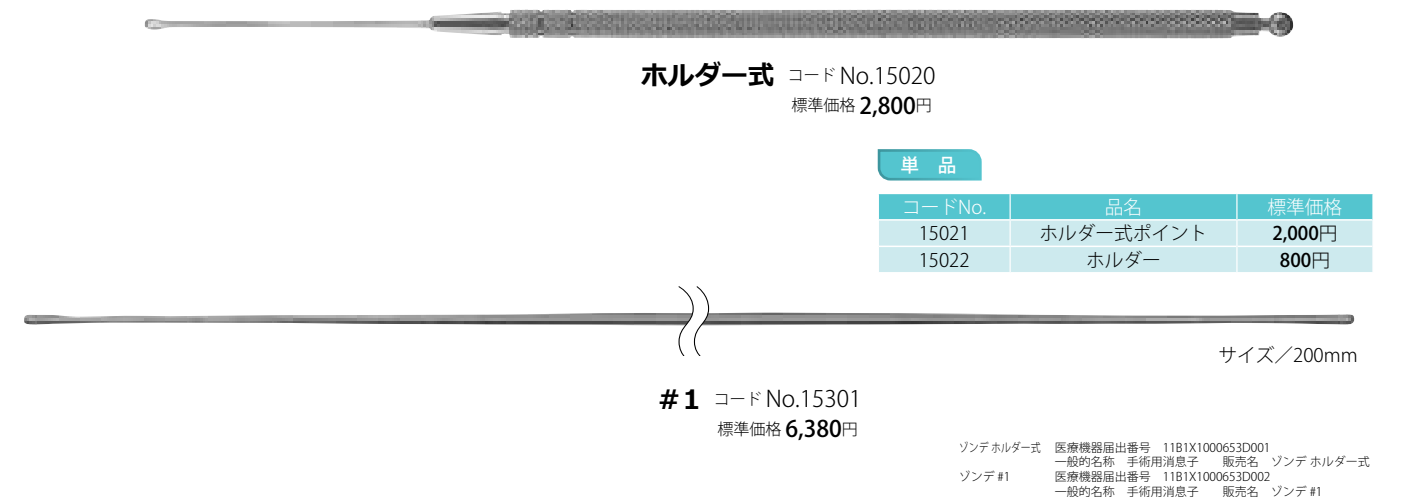

ソンデホルダー式 医療機器届出番号 11B1X1000653D001
 一般の名称 手術用消息子 販売名 ソンデホルダー式
 ソンデ #1 医療機器届出番号 11B1X1000653D002
 一般の名称 手術用消息子 販売名 ソンデ #1

ナイロン縫合糸 青

1/1



コードNo.	規格	太さ	ボビンの色	標準価格
15233	3-0	φ0.20~0.25mm	緑	3,520円
15234	4-0	φ0.15~0.20mm	青色	3,520円
15235	5-0	φ0.10~0.15mm	半透明	3,520円

- ※ナイロン製(紺色)
- ※モノフィラメント(単糸)
- ※長さ/約20m
- ※EOG滅菌可能

医療機器承認番号 20400BZZ00910000
 一般の名称 ポリアミド縫合糸 販売名 ナイロン縫合糸

洗浄用シリンジ 3ml タイプ2



1/1

※本体／材質 PFA 耐熱温度260℃
※指かけ・押棒／材質 PP 耐熱温度155℃

コード No.13228
標準価格 8,860円


医療機器届出番号 11B1X100065SD101
一般的名称 歯科用シリンジ 販売名 洗浄用シリンジ

開口訓練器



- 顎関節症の患者さんの開口訓練に使用します。
- Oリングで開口させる力を調整するため、負担のかかり過ぎを防ぎます。
- 樹脂製のため、水切れがよく、お風呂での訓練にも使えます。

1/1

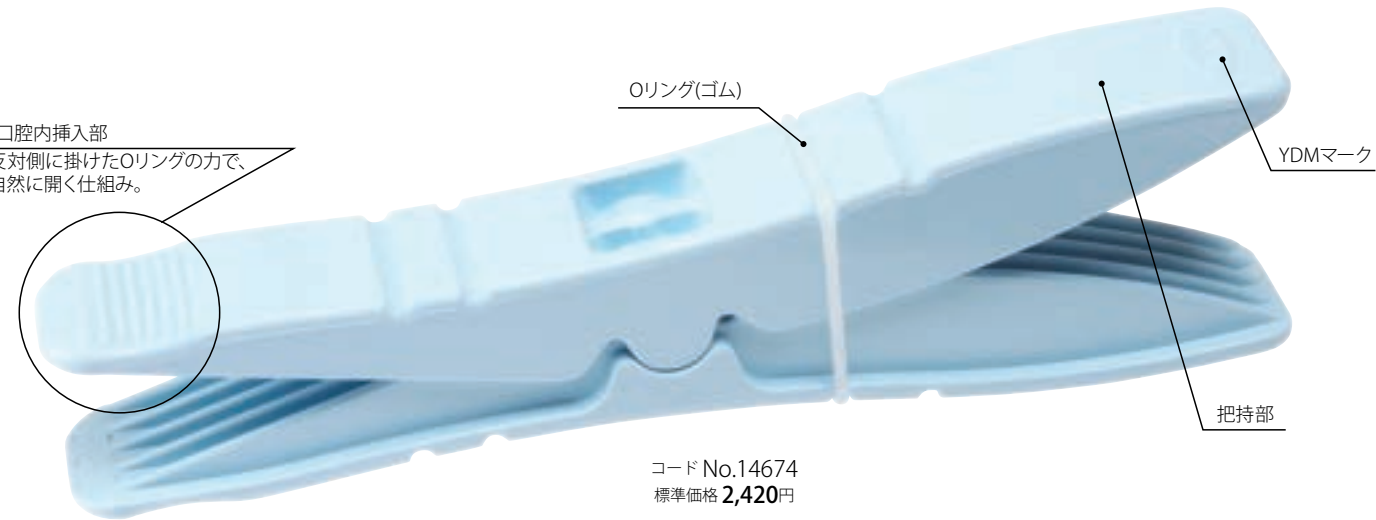

コード No.14674
標準価格 2,420円


[使用方法]



- ①口腔内挿入部（YDMマークがない少しくぼみがある側）を手で閉じ、口の中へ挿入します。
- ②挿入部のくぼみが、犬歯付近になるように位置を調整します。
- ③位置を合せた犬歯と同側の手で把持部を握ります。ゴムの力で口腔内挿入部側が自然に開きます。

ご協力：東京科学大学歯学部顎関節咬合学分野(顎関節治療部)

※耐久咬合圧／490N
※本体／材質 PC/ABS 耐熱温度80℃
※Oリング／材質 Si 耐熱温度200℃

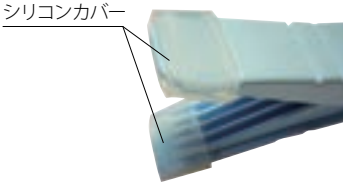

別 売
シリコンカバー
コード No.90424
標準価格 490円（2入）

単 品
Oリング
コード No.90425
標準価格 370円

医療機器届出番号 11B1X100065SD206
一般的名称 歯科用開口器 販売名 開口訓練器

ボーンスクレイパー タイプ2



4/5

- 自家骨の皮質骨表部を剃るように削り取るので、外科的侵襲を抑えられます。
- 切削骨は透明の本体収納部に入るので、採取量を確認しながら切削できます。
- 先端頭部は自家骨を採取しやすい角度に曲がっています。



サイズ／155mm

コード No.30495
標準価格 11,990円（3本組）



- ホルダー部をスライドさせて収納部から採取骨を取出します。

※収納部容量／約1cc
※刃部幅／6.4mm
※透明部／材質 TPX 耐熱温度160℃
※ディスポーザブルタイプ（未滅菌）

医療機器届出番号 11B1X1000634D202
一般的名称 骨刀 販売名 ボーンスクレイパー タイプ2


ボーンミル ex-2



1/2

- 鋭い切れ味で、0.1～1.0mmに骨を粉碎します。
- 軽い力で粉碎可能なラチェット式ハンドル。無理なく粉碎でき、時間短縮にも繋がります。
- 組立・分解が簡単なシンプル構造で、準備や片付けに時間を取られません。

[分解図]

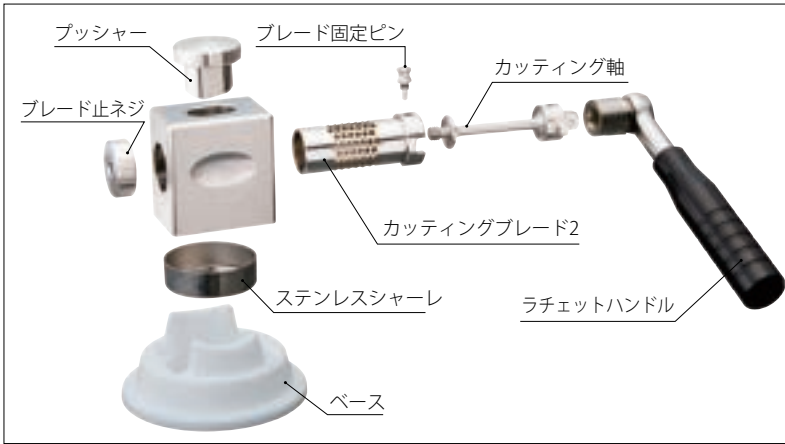

コード No.30480
標準価格 435,600円



単 品
カッティングブレード2
コード No.90402
標準価格 121,000円

※骨挿入穴／26×17mm
※ベース／材質 レーデルR 耐熱温度190℃
※ハンドル 黒色部／材質 ベークライト 耐熱温度170℃


医療機器届出番号 11B1X100065SD001
一般的名称 ボーンミル 販売名 ボーンミル

ボーンキャリア

- 自家骨や人工骨の移送、填入に使用します。
- 操作部と填入部が近いため、安定した操作ができます。



1/1

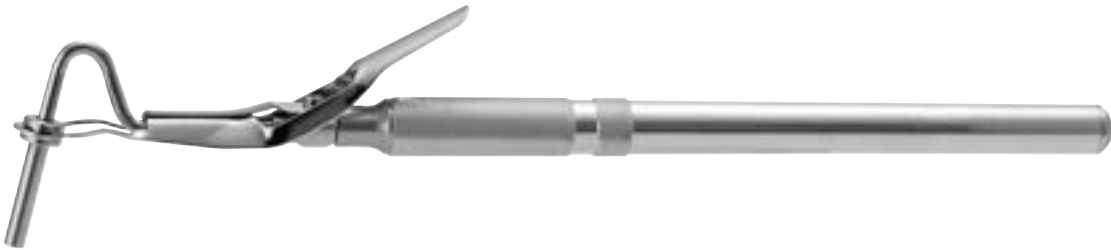

コードNo.	規格	先端外径 (mm)	収納容量 (cc)	標準価格
30462	φ2.9	φ2.9	0.02	10,290円
30463	φ3.4	φ3.4	0.03	10,290円

医療機器届出番号 1181X1000658D126
一般的名称 歯科用インプラント手術器具 販売名 ボーンキャリア

ボーンスプーン

- 粉碎した骨等を移植部位へ運ぶスプーンです。



1/1



S コード No.30178
標準価格 10,670円


医療機器届出番号 1181X1000658D102
一般的名称 歯科用インプラント手術器具 販売名 ボーンスプーン

サイナスリフト インスツルメント



1/1


- シュナイダー膜(上顎洞膜)が傷つかないような先端形態になっています。
- 上顎洞底の内面に入り込んだ骨の探索にも有効です。

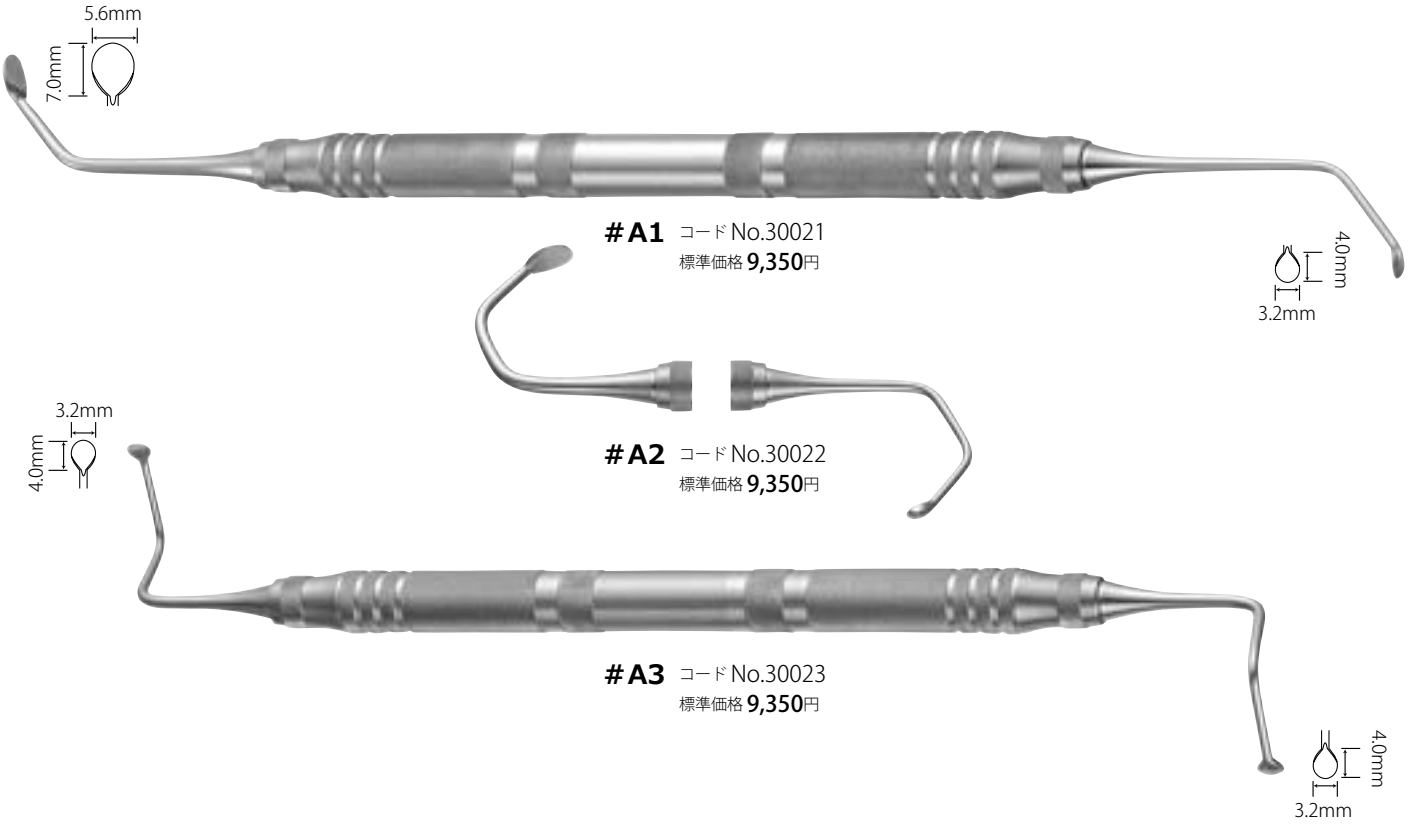

#A1 コード No.30021
標準価格 9,350円

#A2 コード No.30022
標準価格 9,350円

#A3 コード No.30023
標準価格 9,350円

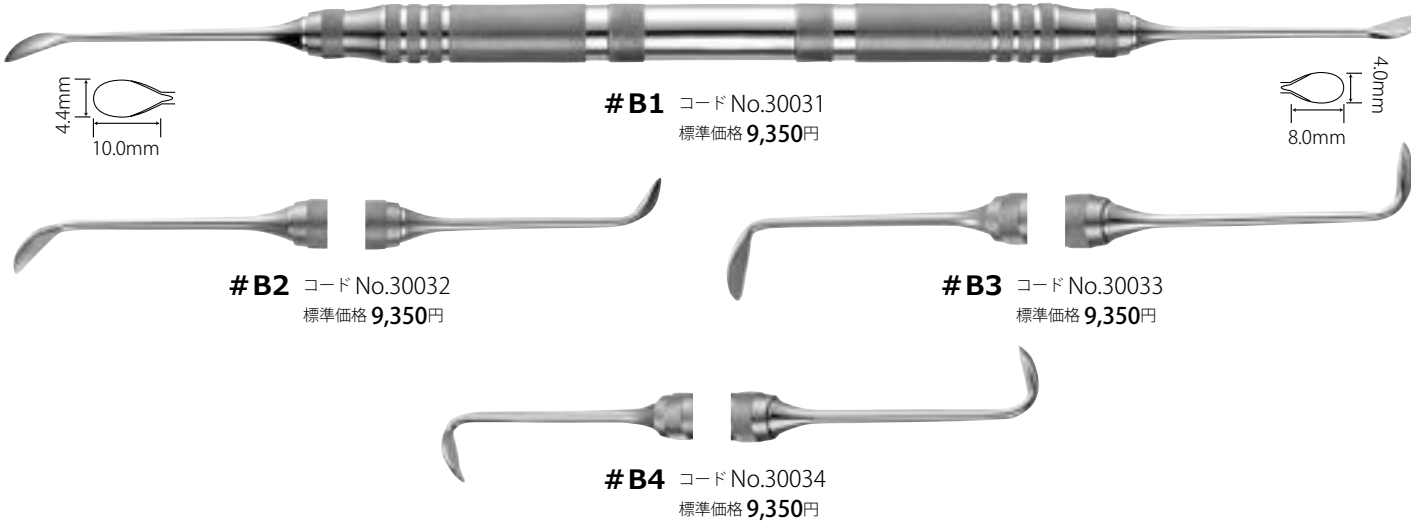

#B1 コード No.30031
標準価格 9,350円

#B2 コード No.30032
標準価格 9,350円

#B3 コード No.30033
標準価格 9,350円

#B4 コード No.30034
標準価格 9,350円



#B5 コード No.30035
標準価格 9,350円

医療機器届出番号 1181X1000658D108
一般的名称 歯科用インプラント手術器具 販売名 サイナスリフトインスツルメント

ペリオトーム

●インプラントの即時埋入症例の抜歯時、歯周組織をできる限り傷つけずに残すことができます。

ポイント



#1
コード No.30016
標準価格 **4,020**円
前歯用
先幅1.7mm



#2
コード No.30017
標準価格 **4,020**円
前歯用
先幅2.7mm



#3
コード No.30018
標準価格 **4,020**円
臼歯用
先幅1.7mm

ハンドル



P-Aハンドル
コード No.10201
標準価格 **2,450**円
サイズ／φ8.0mm

医療機器届出番号 1181X1000642D002
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 ペリオトーム ポイント
医療機器届出番号 1181X1000634D003
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル

1/1

平行測定器



コード No.21122
標準価格 **12,980**円

医療機器届出番号 1181X1000658D402
一般的名称 整形外科用カリバ 販売名 平行測定器

4/5


X線ゲージ

●根管治療、インプラント埋入の事前検査、歯石量・部位の確認、等に有効です。

スリーブ




X線ゲージ

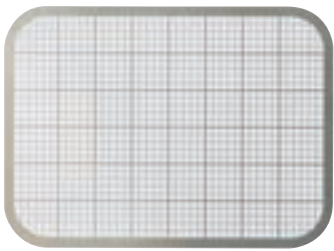

コード No.21157
標準価格 **8,030**円 (2入)

サイズ／X線ゲージ W33×D45mm
スリーブ W38×D48×H8.5mm

[装着方法]

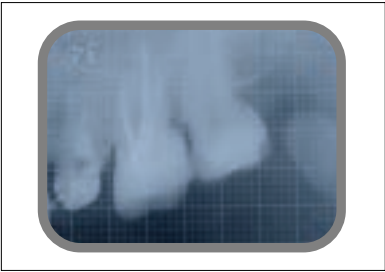

※スリーブ／材質 Si 耐熱温度260℃

デブライドメント用インスツルメント



- 鋭利すぎないカッティングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。
- インプラント上部構造の基底部に有効です。

〔臨床動画〕 1/1



11-12 チタン製 コード No.09226
標準価格 5,800円



丸柄 # 11-12 チタン製 コード No.09230
標準価格 6,600円

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃
※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。




写真提供：長内 香織 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)



写真提供：延田 万里 歯科衛生士
(歯科・林 美穂医院)

DBI = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)

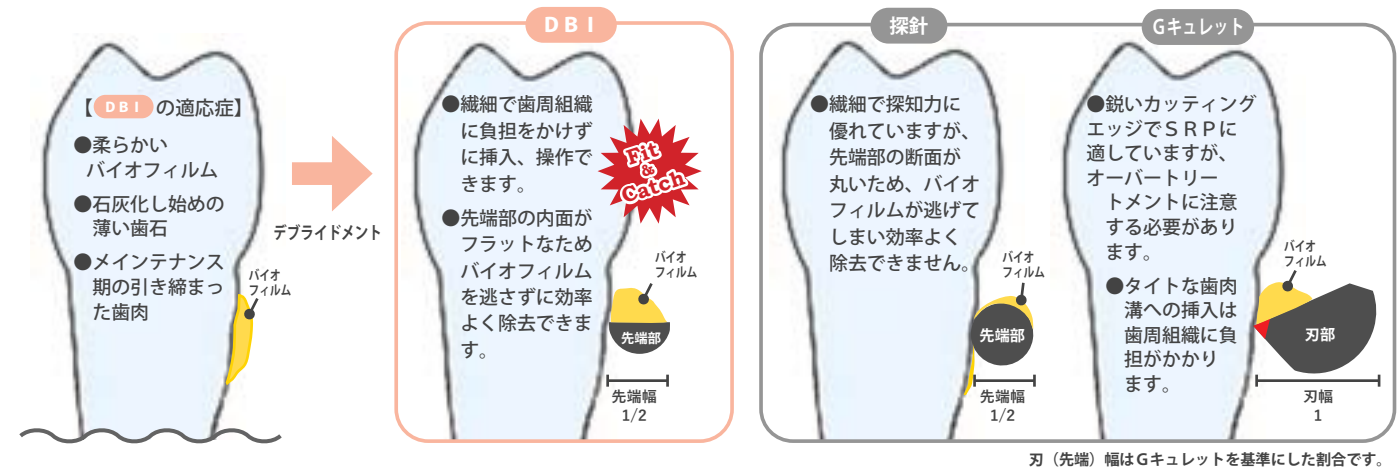


医療機器届出番号 11B1X1000662D211
一般的名称 歯科用スケラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント

カラープローブ ポイント式



- 樹脂製のため、インプラントや補綴物を傷つけません。
- 測定値が見やすいカラーリングです。
- 先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- ハンドルはミラーハンドルを使用します。専用ハンドルではないのでコストを抑えられます。

1/1

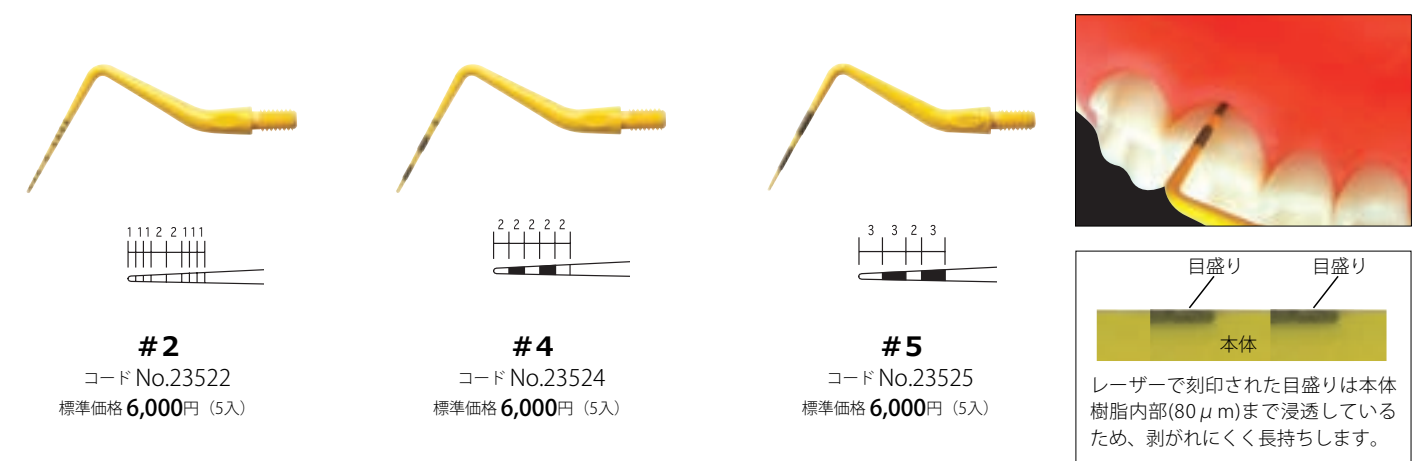

2
コード No.23522
標準価格 6,000円 (5入)

4
コード No.23524
標準価格 6,000円 (5入)

5
コード No.23525
標準価格 6,000円 (5入)

目盛り 目盛り
本体
レーザーで刻印された目盛りは本体樹脂内部(80μm)まで浸透しているため、剥がれにくく長持ちします。

※材質 PPSU 耐熱温度200℃

医療機器届出番号 11B1X1000664D007
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 カラープローブ ポイント式

ペリオプローブ チタン製 #5



1/1



コード No.09575
標準価格 5,850円

医療機器届出番号 11B1X1000664D003
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ