

マイクロ  
Micro Surgery



128・131 歯肉バサミ

129・131 持針器

130 ピンセット

135 逆根管充填用インストルメント


138 レジン充填形成器

139 エキスカベーター

140 マイクロミラー



**マイクロスコープ下での使用に適したMDSシリーズ。**  
視界に手指が入り込みずらく視野を妨げない、180mmの歯肉バサミ・持針器・ピンセットです。操作性を追求し細部までこだわりました。

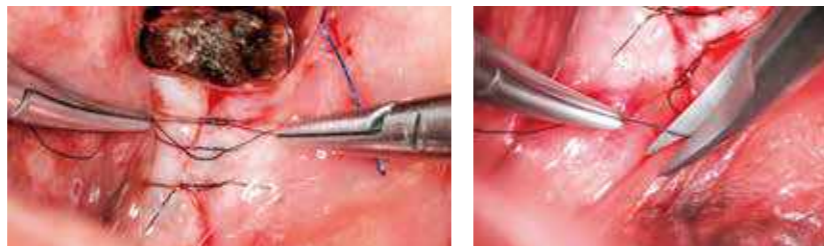


写真提供：千栄寿先生（せん歯科医院／CID-club,SJCD）

## 歯肉バサミ MDS-180 ラウンドハンドル



1/1

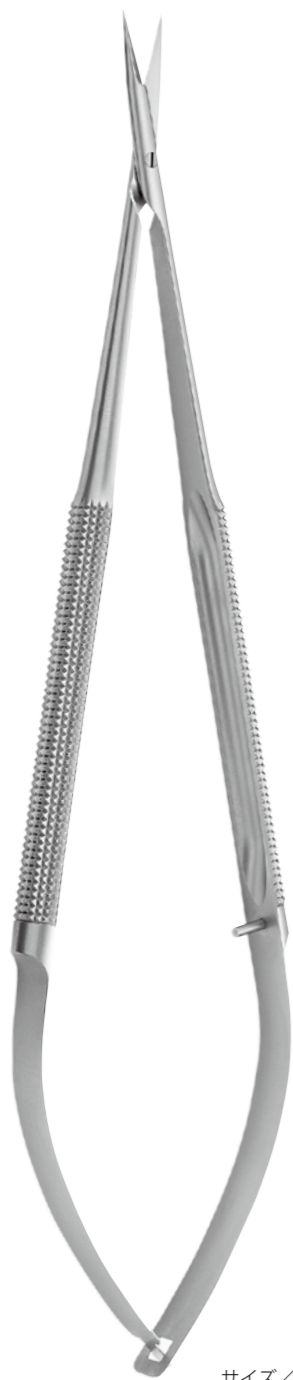

サイズ／180mm



**直** コード No.32411  
標準価格 **58,000円**



**曲** コード No.32412  
標準価格 **58,000円**

## 持針器 MDS-180 ラチェット付

▶保持部／超硬溶射付



サイズ／180mm

0.8mm



**直** コード No.32401  
標準価格 **76,000円**

0.8mm



**曲** コード No.32402  
標準価格 **76,000円**

指定縫合糸／6-0～8-0  
指定縫合針／φ0.14～φ0.33mm


### 回転操作性のよい円形ハンドル

●ラチェットを閉じた時のハンドル形状が円形に近くなるため、指先での回転操作性に優れています。

MDS-180



従来品

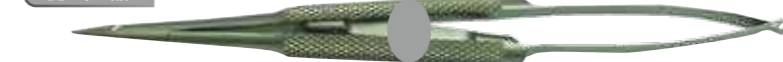


# ピンセット MDS-180



▶保持部/超硬溶射付

1/1

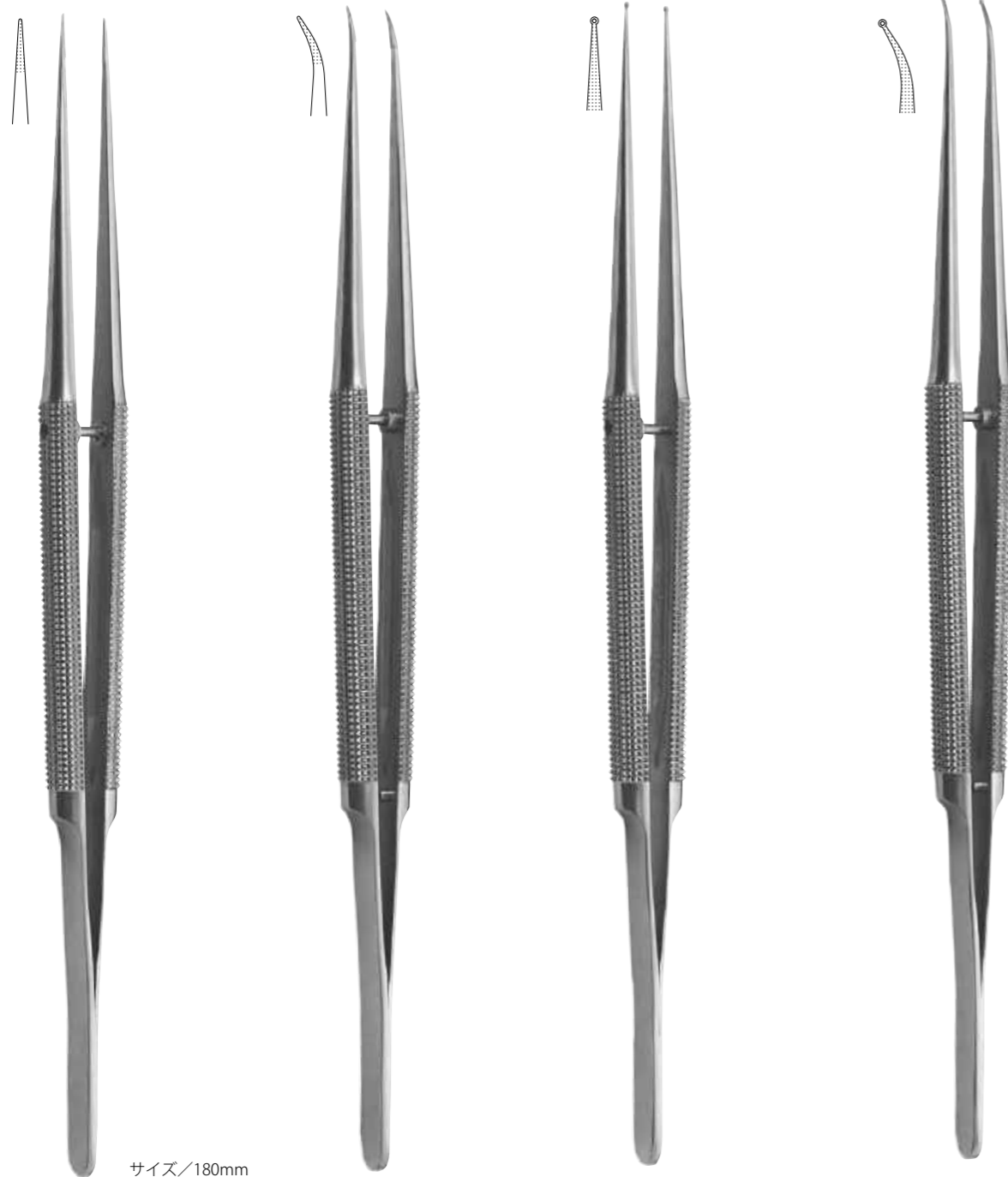

直  
コード No.32421  
標準価格 68,000円  
縫合糸保持許容サイズ/  
6-0~8-0mm

曲  
コード No.32422  
標準価格 68,000円  
縫合糸保持許容サイズ/  
6-0~8-0mm

リング直  
コード No.32423  
標準価格 68,000円

リング曲  
コード No.32424  
標準価格 68,000円

医療機器届出番号 11B1X1000636D023  
一般的名称 ピンセット 販売名 ピンセット MDS

### 先端精度




●先端が点ではなく、面で合わせり微細な組織、縫合糸を確実に保持します。

### 保持力



●保持部に滑り止めの超硬を溶射しており、高い保持力が得られます。

### 操作性

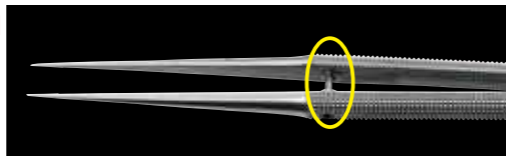

●ハンドル部に開閉距離を一定に保つストッパーがついています。過度な先端の開きと握りこみを防ぎ、スムーズに操作できます。

# 歯肉バサミ MS-150 ラウンドハンドル



1/1



サイズ/ 150mm



直 コード No.32131  
標準価格 58,100円



曲 コード No.32132  
標準価格 59,300円


※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000635D202  
一般的名称 歯科用歯肉はさみ 販売名 歯肉バサミ MS

# 持針器 MS-150 ラチェット付



1/1

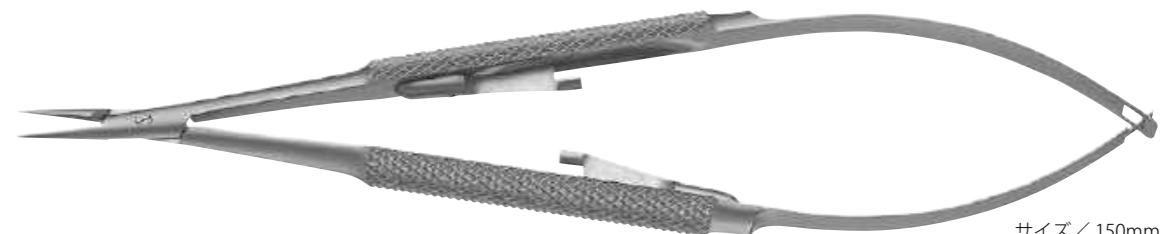

サイズ/ 150mm  
指定縫合糸/ 6-0~8-0mm  
指定縫合針/ φ0.14~φ0.33mm



0.6mm 直 コード No.32003  
標準価格 67,800円



曲 コード No.32004  
標準価格 70,200円



写真提供: 石井宏先生  
(ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X1000630D015  
一般的名称 持針器 販売名 持針器 MS


# ピンセット MS-150S




1/1



サイズ/ 150mm

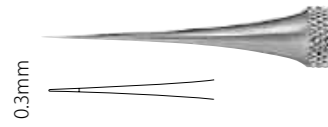

**直** コード No.32201  
標準価格 48,400円

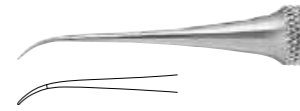

**曲** コード No.32202  
標準価格 49,500円



写真提供：石井 宏 先生  
(ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X1000636D018  
一般的名称 ピンセット 販売名 ピンセット MS


# ピンセット MS-150L




1/1



サイズ/ 150mm

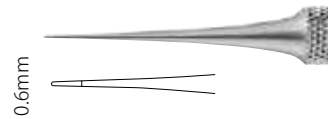

**直** コード No.32203  
標準価格 48,400円

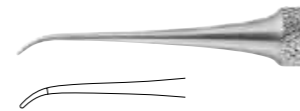

**曲** コード No.32204  
標準価格 49,500円

医療機器届出番号 11B1X1000636D018  
一般的名称 ピンセット 販売名 ピンセット MS

# ピンセット マイクロアドソン



1/1



サイズ/ 120mm




**有鉤 S 直**  
コード No.32211  
標準価格 6,600円



**有鉤 S 曲**  
コード No.32212  
標準価格 7,950円



**無鉤 S 直**  
コード No.32213  
標準価格 6,050円

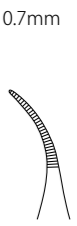

**無鉤 S 曲**  
コード No.32214  
標準価格 7,300円

※先端サイズが異なる「外科ピンセット アドソン」もございます。(P.122参照)

●ハンドル部が長く、臼歯部に届きやすいです。




サイズ/ 150mm




**有鉤 L 直**  
コード No.32215  
標準価格 6,600円



**有鉤 L 曲**  
コード No.32216  
標準価格 7,950円

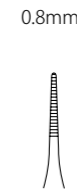

**無鉤 L 直**  
コード No.32217  
標準価格 6,050円

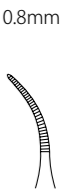

**無鉤 L 曲**  
コード No.32218  
標準価格 7,300円



写真提供：石井 宏 先生  
(ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X1000636D007  
一般的名称 ピンセット 販売名 ピンセット マイクロアドソン

# MTAピンセット HK型

●歯根端切除後の逆根管充填時、操作しにくいMTAセメントを効率よく根管に移送、填入します。

PAT.4886919




1/1



コード No.32305  
標準価格 28,600円

サイズ/150mm

[MTA 収納部]

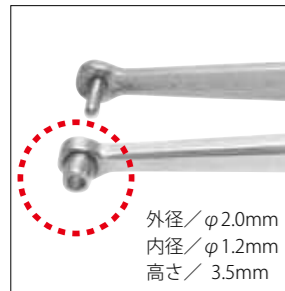


写真提供：栗原 仁 先生  
(秩父臨床デンタルクリニック CT インプラントセンター)

医療機器届出番号 11B1X1000665D623  
一般的名称 歯科用充填器 販売名 MTAピンセット

# ルートチャンネルプラグー MS




1/1

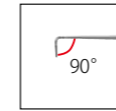

3.0mm  
φ0.4mm

#1 コード No.32301  
標準価格 6,050円

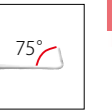

3.0mm  
φ0.6mm

#2 コード No.32302  
標準価格 6,050円

6.0mm  
φ0.6mm

#2L コード No.32303  
標準価格 6,600円

●深さ6.0mmに形成した根管に対応するロングタイプです




写真提供：石井 宏 先生  
(ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X1000665D504  
一般的名称 歯科用根管プラグ 販売名 ルートチャンネルプラグーMS

## バニッシャー MS #1



1/1

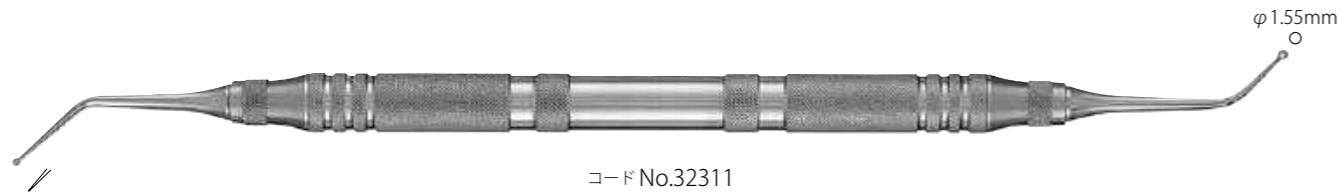

コード No.32311  
標準価格 6,050円

医療機器届出番号 11B1X100065D607  
一般的名称 歯科用充填器 販売名 バニッシャー MS

## 鋭匙 MS



1/1



#1 コード No.32321  
標準価格 6,050円



#1L コード No.32325  
標準価格 6,050円



#2L コード No.32326  
標準価格 6,050円

[#1L・#2L]



●ロングネックのため深い術部にも届き、顕微鏡下で視野の邪魔になりません。



写真提供：石井 宏先生  
(ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X100062D003  
一般的名称 歯科用キュレット 販売名 鋭匙 MS


## エキスプローラー MS #1P



1/1

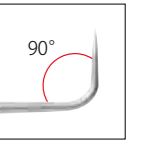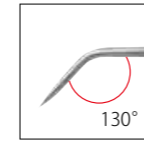

コード No.32351  
標準価格 6,050円

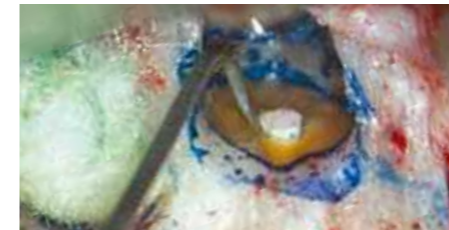

写真提供：石井 宏先生  
(ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X100064D109  
一般的名称 歯科用探針 販売名 エクスプローラー MS

## 剥離子 MS



1/1



#1 コード No.32341  
標準価格 9,700円



#2 コード No.32342  
標準価格 9,700円



写真提供：石井 宏先生  
(ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X100064D016  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子 MS

# レジン充填形成器 TMDU型 タイプ2



▶ダイヤモンドライクカーボンコーティング

1/1

## DLC (Diamond Like Carbon) コーティングの利点

- DLCは高硬度 (Hv3000～4500) の為、レジン含有の無機フィラー (Hv1000～1500) よりも低硬度のステンレス鋼にコーティングすることで、摩耗・キズを防ぎ、金属粉によるレジンの黒ずみ、キズついた粗造面によるベタつきを解消します。
- 非晶質構造のDLC膜は、窒化チタンなどの多結晶構造の硬質薄膜と比べて非常に平滑な表面をしているため、レジン剥離性に優れ、操作性、機能が向上します。

●先端部の厚さが薄く、小さいため、マイクロスコープや拡大鏡下での審美充填に有効です。



**#2 ブルー** コードNo.03392  
標準価格 5,700円



**#5 イエロー** コードNo.03395  
標準価格 5,700円



[小白歯部唇側面]  
頸部が屈曲しているので  
口唇が邪魔になりません。

**#2  
ブルー**

[白歯部咬合面]  
小窩裂溝の形成。

[白歯部咬合面]  
副隆部の形成。

**#5  
イエロー**

[白歯部咬合面]  
小窩の形成。

※カラーリング/材質Si 耐熱温度 260℃

医療機器届出番号 11B1X1000665D615  
一般的名称 歯科用充填器 販売名 レジン充填形成器

# ミラートップ フロントサーフェイス



- 鏡表面で反射するため、像が二重にならずに鮮明に映ります。また、反射率は約98%で明るく見えます。
- マイクロスコープや拡大鏡下では特に有効です。

▶表面反射式  
▶チタンコーティング



**3P** コードNo.13077  
標準価格 7,920円 (12枚入)



**4P** コードNo.13079  
標準価格 7,920円 (12枚入)

※反射率 約98%  
※鏡面厚さ 1.9mm  
※耐熱温度 200℃  
※ハンドルはP.10をご参照ください。

医療機器届出番号 11B1X1000625D007  
一般的名称 歯鏡 販売名 ミラートップ

# エキスカベーター ラウンド




1/1

- 極小のサイズのスプーンで、微細な窩洞形成に有効です。
- シャンクが長い為、マイクロスコープ下で視野の妨げになりません。



**直 #4** コードNo.01604  
標準価格 4,950円

**曲 #4** コードNo.01704  
標準価格 4,950円

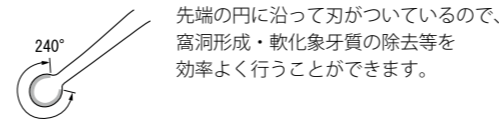

先端の円に沿って刃がついているので、窩洞形成・軟化象牙質の除去等を効率よく行うことができます。



**直** 窩壁・窩底  
平面の窩洞形成

**曲** アンダーカット部  
狭い切削開口部付近  
隅角部の作業時

※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000662D301  
一般的名称 歯科用エキスカベーター 販売名 エキスカベーター

# ブレードブレイカー



1/1


- 眼科用メスを先端部で挟んで小さく折ります。
- ハンドルロック機構によりメスを確実に保持し、そのままホルダーとして使用できます。



コード No.32361  
標準価格 48,000円

サイズ/120mm

[使用手順]

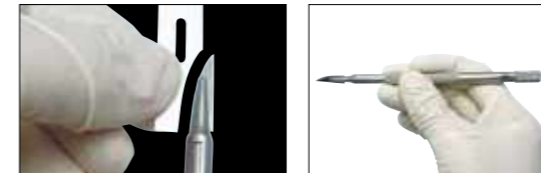

- ①眼科用メスを挟みハンドルをロックします。ブレードブレイカーを下向きにひねりメスを折ります。
- ②折ったメスは把持したまま使用できます。

医療機器届出番号 11B1X1000634D010  
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 ブレードブレイカー

# マイクロミラー タイプ2



●表面反射のステンレス製メタルミラーです。  
 ※マイクロハンドルに装着して使用します。


1/1

  <b># 1</b> コード No.14901 標準価格 5,500 円 (5 入)	  <b># 2</b> コード No.14902 標準価格 5,500 円 (5 入)	  <b># 3</b> コード No.14903 標準価格 5,500 円 (5 入)	  <b># 4</b> コード No.14904 標準価格 5,500 円 (5 入)	  <b># 5</b> コード No.14905 標準価格 5,500 円 (5 入)	  <b># 6</b> コード No.14906 標準価格 5,500 円 (5 入)
--	--	--	--	--	--



●ミラーの縁角がしっかりと  
 できているため縁付近まで像が  
 明瞭に写ります。

写真提供：吉岡隆知先生  
 (吉岡デンタルオフィス 院長)

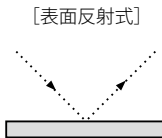

医療機器届出番号 11B1X1000625D019  
 一般的名称 歯鏡 販売名 マイクロミラー タイプ2

# マイクロハンドル



●ペリオ・インプラント等、マイクロサージェリー用ミラー・メスに使用するハンドルです。  
 ●ハンドル後部を回すだけで、簡単に着脱ができます。

1/1

 <b>L</b> コード No.14689 標準価格 18,200 円	サイズ/φ8.0mm
 コード No.14690 標準価格 18,200 円	サイズ/φ6.0mm

[装着方法]



医療機器届出番号 11B1X1000634D006  
 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 マイクロハンドル

# マイクロミラーセット タイプ2




コード No.14900  
 標準価格 20,900 円

(マイクロハンドル、マイクロミラー タイプ2  
 [# 1・# 2・# 3・# 4] 各 1 入)

マイクロミラー タイプ2

マイクロハンドル

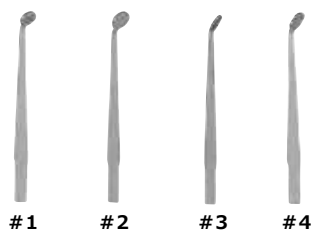

医療機器届出番号 11B1X1000625D020  
 一般的名称 歯鏡  
 販売名 マイクロミラーセット タイプ2