

SINCE 1948

With the utmost care, and the most advanced manufacturing technology, our innovative products are designed and produced!

YDM オフィシャル SNS では様々な情報を発信しております。


















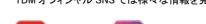

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

製造販売元 株式会社YDM

マイクロスコープ下での使用に適したMDSシリーズ。

視界に手指が入り込みずらく視野を妨げない、180mmの歯肉バサミ・持針器・ピンセットです。 操作性を追求し細部までこだわりました。





写真提供: 千 栄寿 先生(せん歯科医院/CID-club,SJCD)

歯肉バサミ MDS-180 ラウンドハンドル



1/1



持針器 MDS-180 ラチェット付




▶保持部/超硬溶射付 1/1



指定縫合糸/6-0 \sim 8-0 指定縫合針 $/\varphi$ 0.14 $\sim \varphi$ 0.33mm

回転操作性のよい円形ハンドル

●ラチェットを閉じた時のハンドル形状が円形に近く なるため、指先での回転操作性に優れています。

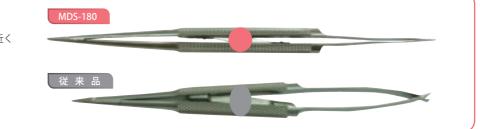


 ※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。
 医療機器出番号 11B1X1000635D205

 一般的名称 歯科用歯肉はさみ 販売名 歯肉/けき MDS


療機器届出番号 11B1X1000630D018 船的名称 持針器 販売名 持針器 MD




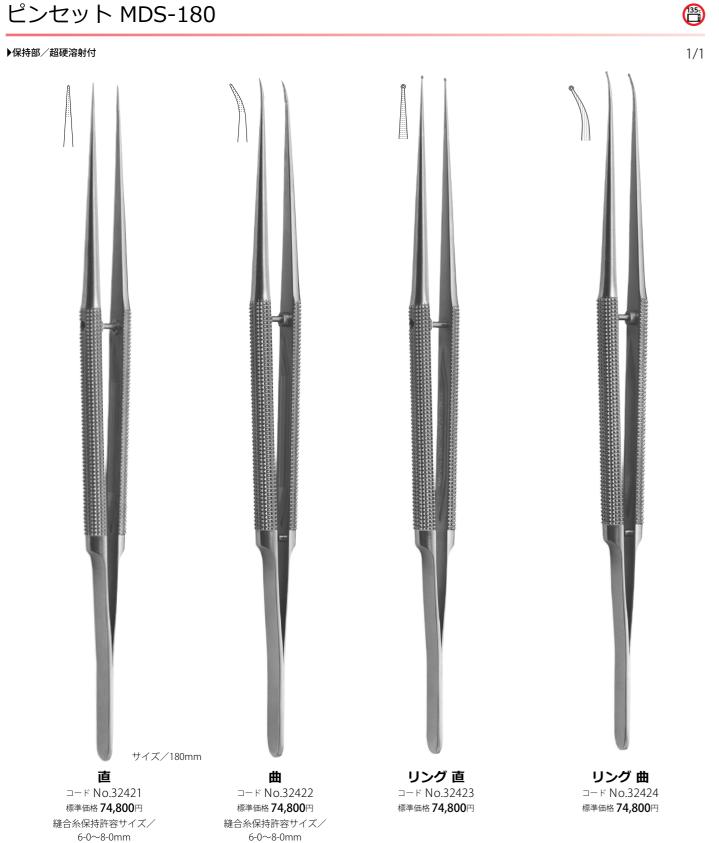

医療機器届出番号 11B1X1000636D023 一般的名称 ピンセット 販売名 ピンセット MDS



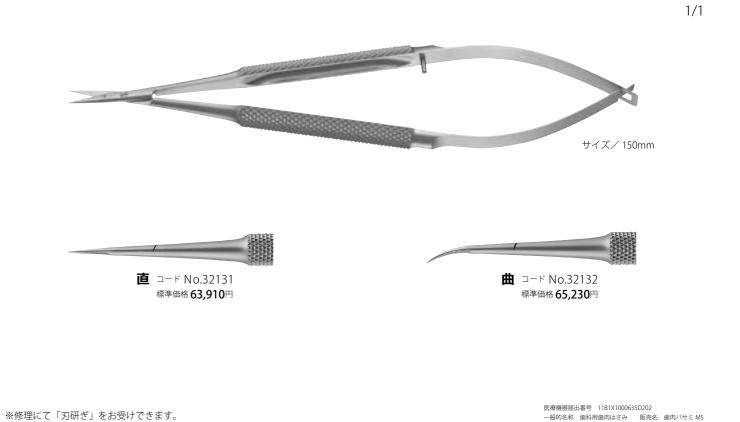

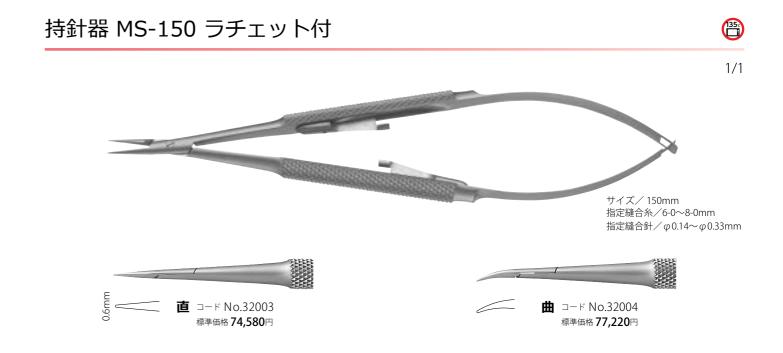



医療機器届出番号 11B1X1000630D015 (ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師) 一般的名称 持針器 販売名 持針器 MS

3

1/1


無鈎S曲

コード No.32214

標準価格 8,800円

1/1

(35)

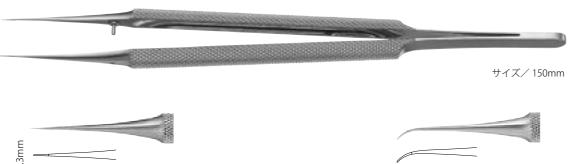

直 コード No.32201


標準価格 53,240円

写真提供:石井 宏 先生 (ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

曲 コード No.32202

標準価格 54,450円

医療機器届出番号 11B1X1000636D018 一般的名称 ピンセット 販売名 ピンセット MS

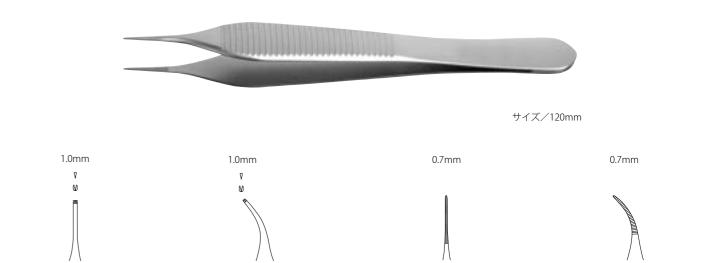

無鈎S直

コード No.32213

標準価格 8,800円

有鈎S曲

コード No.32212


標準価格 8,800円

●ハンドル部が長く、臼歯部に届きやすいです。

有鈎S直

コード No.32211

標準価格 8,800円

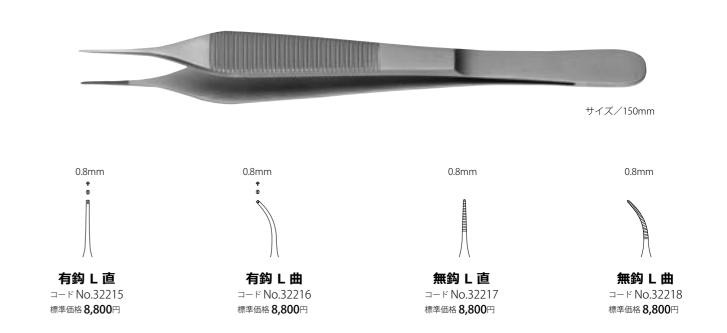



写真提供:石井宏先生 (ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X1000636D007 一般的名称 ピンセット 販売名 ピンセット マイクロアドソン

MTAピンセット HK型



バニッシャー MS #1



 φ 1.55mm

1/1





鋭匙 MS



1/1

医療機器届出番号 11B1X1000662D003 一般的名称 歯科用キュレット 販売名 鋭匙 MS










[#1L · #2L]

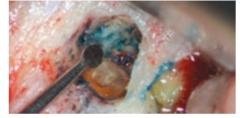

●ロングネックのため深い術部にも届き、顕微鏡下で 視野の邪魔になりません。

写真提供:石井宏先生 (ペンシルパニア大学非常勤講師 神奈川歯科大学非常勤講師)

ルートキャナルプラガー MS











写真提供:吉岡 隆知 先生

(吉岡デンタルオフィス 院長 東京医科歯科大学 臨床教授)

写真提供:石井 宏 先生 (ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師) 医療機器届出番号 11B1X1000665D504 一般的名称 歯科用根管プラガ 販売名 ルートキャナルプラガーMS

7

エキスプローラー MS #1P



1/1


レジン充填形成器 TMDU型 タイプ2



医療機器届出番号 11B1X1000665D615 一般的名称 歯科用充填器 販売名 レジン充填形成器

10

1/1

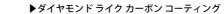

- ~ 1500) よりも低硬度のステンレス鋼にコーティングすることで、摩耗・ キズを防ぎ、金属粉によるレジンの黒ずみ、キズついた粗造面によるベタ つきを解消します。
- DLC は高硬度(Hv3000 ~ 4500)の為、レジン含有の無機フィラー(Hv1000 ●非晶質構造の DLC 膜は、窒化チタンなどの多結晶構造の硬質薄膜と比べて 非常に平滑な表面をしているため、レジン剥離性に優れ、操作性、機能性が 向上します。
- ●先端部の厚さが薄く、小さいため、マイクロスコープや拡大鏡下での審美充填に有効です。




標準価格 7,800円





※カラーリング/材質Si 耐熱温度 260℃

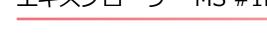








コード No.32351 標準価格 8,800円

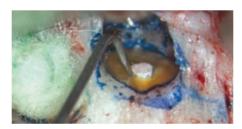

写真提供:石井 宏 先生 (ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X1000664D109 一般的名称 歯科用探針 販売名 エキスプローラー MS

剥離子 MS



1/1



#**1** ⊐- F No.32341 標準価格 11,000円





(ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師)

写真提供:石井宏 先生



写真提供:安斉 昌照先生 (あんざい歯科医院 理事長)

医療機器届出番号 11B1X1000642D016 一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子 MS

ミラートップ フロントサーフェイス



●鏡表面で反射するため、像が二重にならずに鮮明に映ります。 また、反射率は約98%で明るく見えます。

●マイクロスコープや拡大鏡下では特に有効です。

▶表面反射式

▶チタンコーティング



※反射率 約98% ※鏡面厚さ 1.9mm ※耐熱温度 200℃





医療機器届出番号 11B1X1000625D007 一般的名称 歯籍 販売名 ミラートッ

ミラーハンドル スケール付

●ハンドル後部にエンドファイルやリーマーの計測ができるスケールが付いています。

●治療中に長さや大きさを確認したい際、スケールを用意する手間が省けて便利です。



1/1

135:

1/1

医療機器届出番号 11B1X1000625D003

一般的名称 歯鏡 販売名 ミラーハンドル

グリーン コードNo.13118 標準価格 600円 ブルー コードNo.13119 標準価格 600円

ミラーハンドル





標準価格 800円

エキスカベーター ラウンド タイプ2

1/1

1/1

- ●極小のサイズのスプーンで、微細な窩洞形成に有効です。
- ●シャンクが長いため、マイクロスコープ下で視野の妨げになりません。







先端の円に沿って刃がついているので、 窩洞形成・軟化象牙質の除去等を 効率よく行うことができます。

※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000662D301 一般的名称 歯科用エキスカベータ 販売名 エキスカベーター

ブレードブレーカー

●眼科用メスを先端部で挟んで小さく折ります。

●ハンドルロック機構によりメスを確実に保持し、そのままホルダーとして使用できます。





●バネにより自然に先端が開くため、 片手での操作がスムーズにできます。

[使用手順]



にひねりメスを折ります。

①眼科用メスを挟みハンドルを ②折ったメスは把持したまま ロックします。 使用できます。 ブレードブレーカーを下向き





●術部を見やすくするため、先端をカーブさせました。

医療機器届出番号 11B1X1000634D010 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 ブレードブレーカー



マイクロハンドル

(35)

●表面反射のステンレス製メタルミラーです。 ※マイクロハンドルに装着して使用します。




1/1

●ペリオ・インプラント等、マイクロサージェリー用ミラー・メスに使用するハンドルです。

●ハンドル後部を回すだけで、簡単に着脱ができます。

1/1

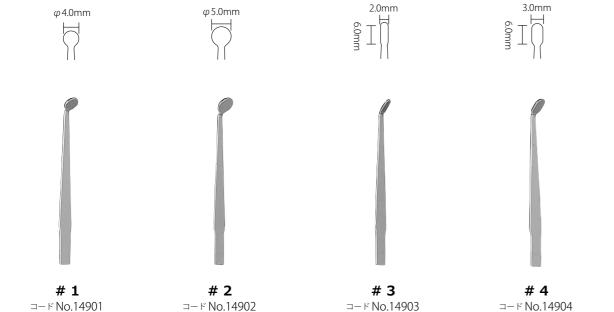



医療機器届出番号 11B1X1000634D006 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 マイクロハンドル



写真提供:吉岡隆知先生 (吉岡デンタルオフィス 院長)


標準価格 7,500 円 (5 入)

●ミラーの縁角がしっかりと でているため縁付近まで像が 明瞭に写ります。

標準価格 7,500 円 (5 入)



標準価格 7,500 円 (5 入)

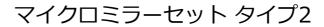






1/1

マイクロミラー タイプ 2

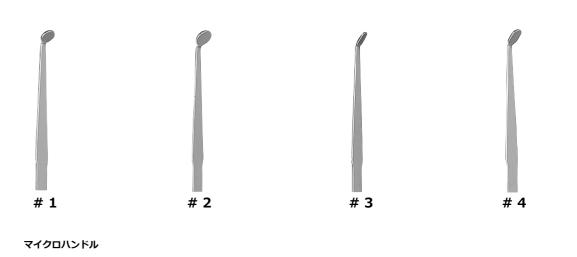

⊐-ド No.14900 標準価格 24,000円 (マイクロハンドル、マイクロミラー タイプ 2

[#1・#2・#3・#4] 各1入)

医療機器届出番号 11B1X1000625D019 一般的名称 歯鏡 販売名 マイクロミラー タイプ2

標準価格 7,500 円 (5 入)

医療機器届出番号 11B1X1000625D020 一般的名称 歯鏡 販売名 マイクロミラーセット タイプ2

14