


補綴
Prosthetics

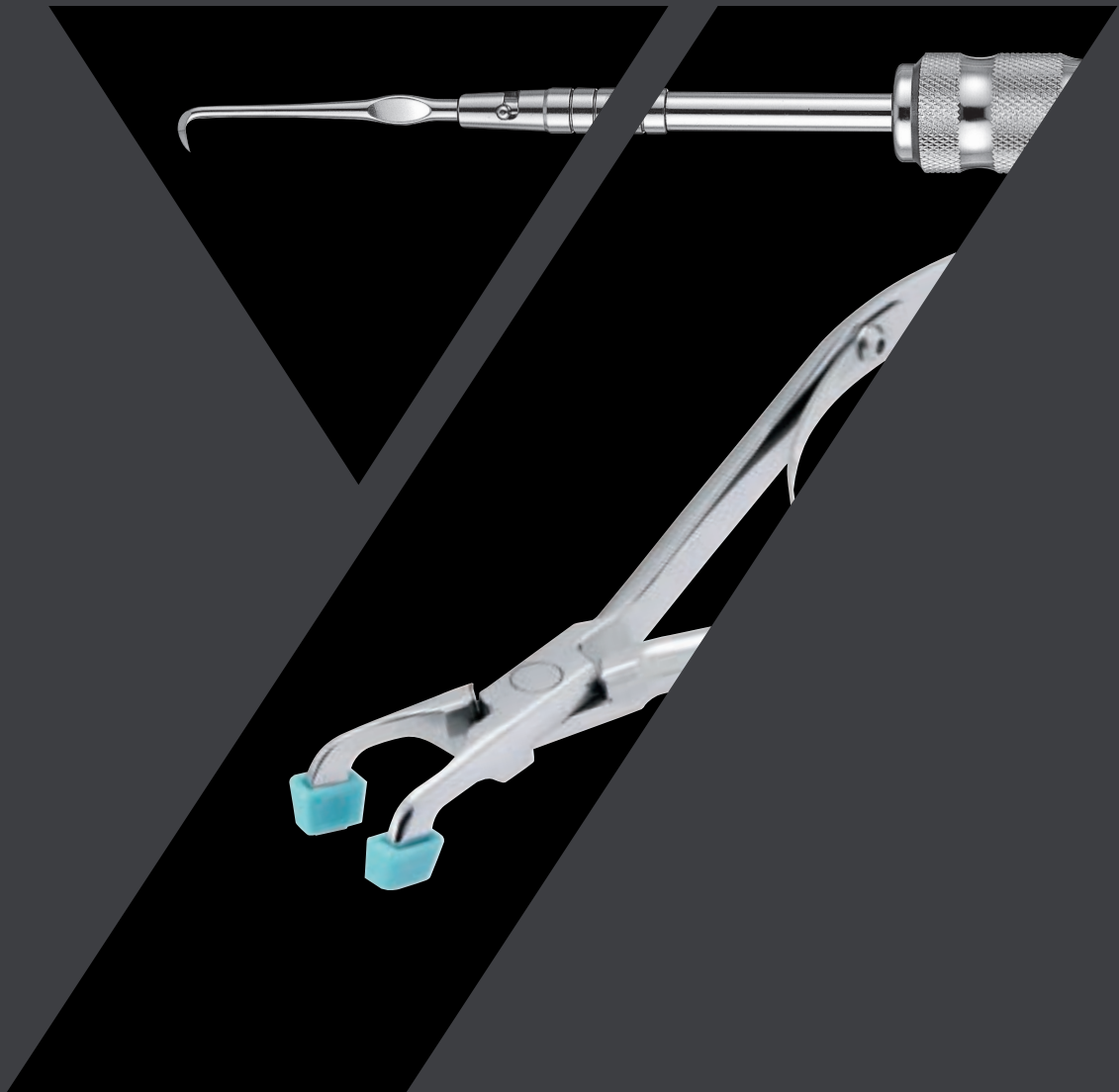


網トレー プレミアム



- トレークリーナーに浸漬しても、サビ・変色起きません。
- サイズがひと目で分かるように色分けされています。

▶ステンレス製

上顎用

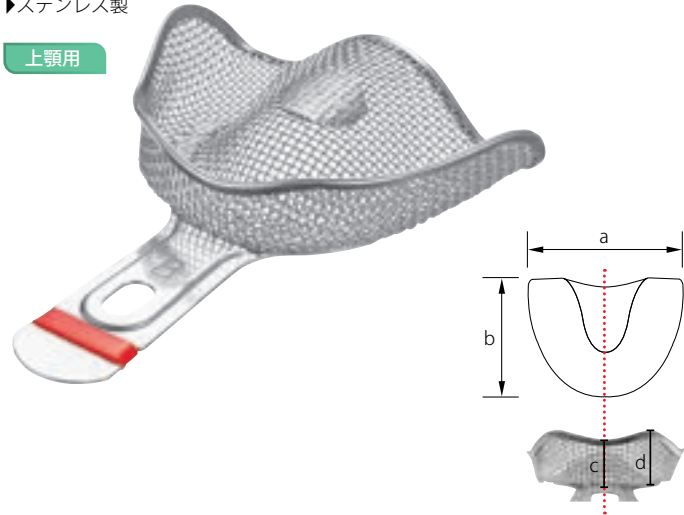

下顎用

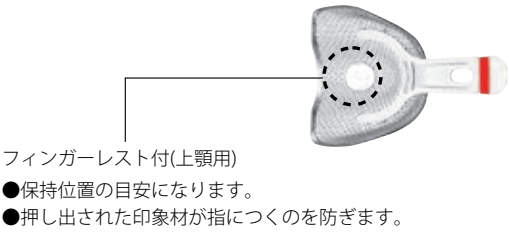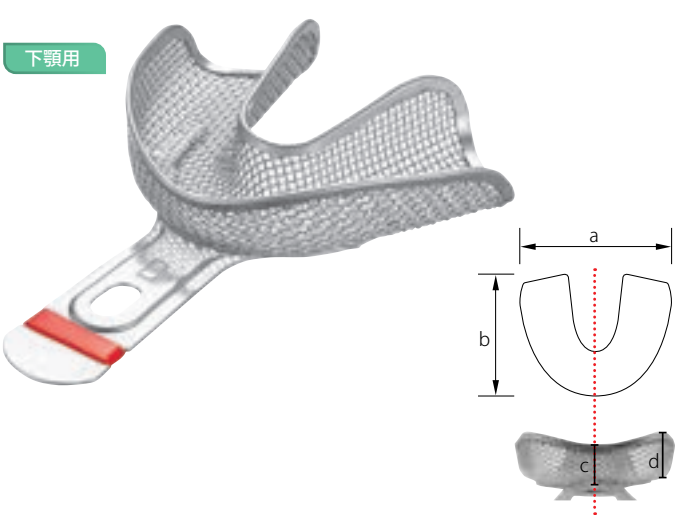


- フィンガーレスト付(上顎用)
- 保持位置の目安になります。
- 押し出された印象材が指につくのを防ぎます。

コードNo.	品名	サイズ (mm)				カラーリング	標準価格	
		a	b	c	d			
19381	上顎用 A	73	60	19.5	23		3,400円	
19382	下顎用 A	76	62	15	20			
19384	上顎用 B	70	55	17	22			
19385	下顎用 B	72	58	14.5	20			
19387	上顎用 C	66	53	15	20			
19388	下顎用 C	69	54	14	18			

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

片顎用

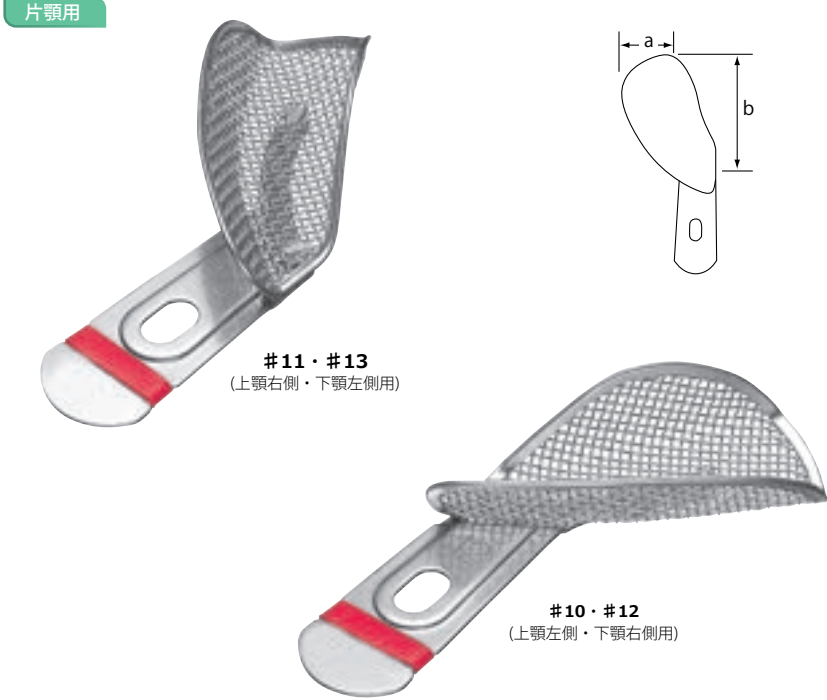

コードNo.	品名	サイズ (mm)		カラーリング	標準価格	
		a	b			
19391	#10	20	60		2,800円	
19392	#11					
19394	#12	15	58			
19395	#13					

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃


局部用

▶回転式



1 歯用

▶回転式

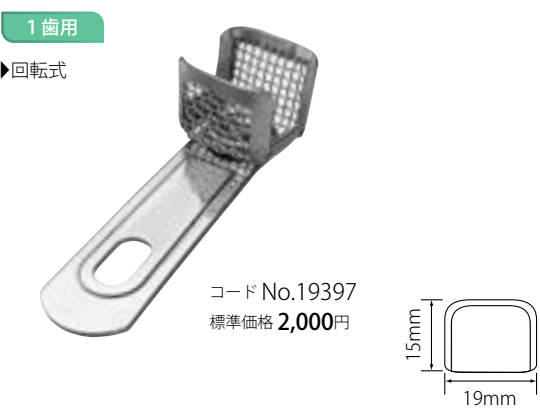


医療機器届出番号 11B1X1000668D105
一般的名称 歯科印象採用用トレー 販売名 網トレー プレミアム

4/5

回転トレー

- ▶ステンレス製
- ▶回転式

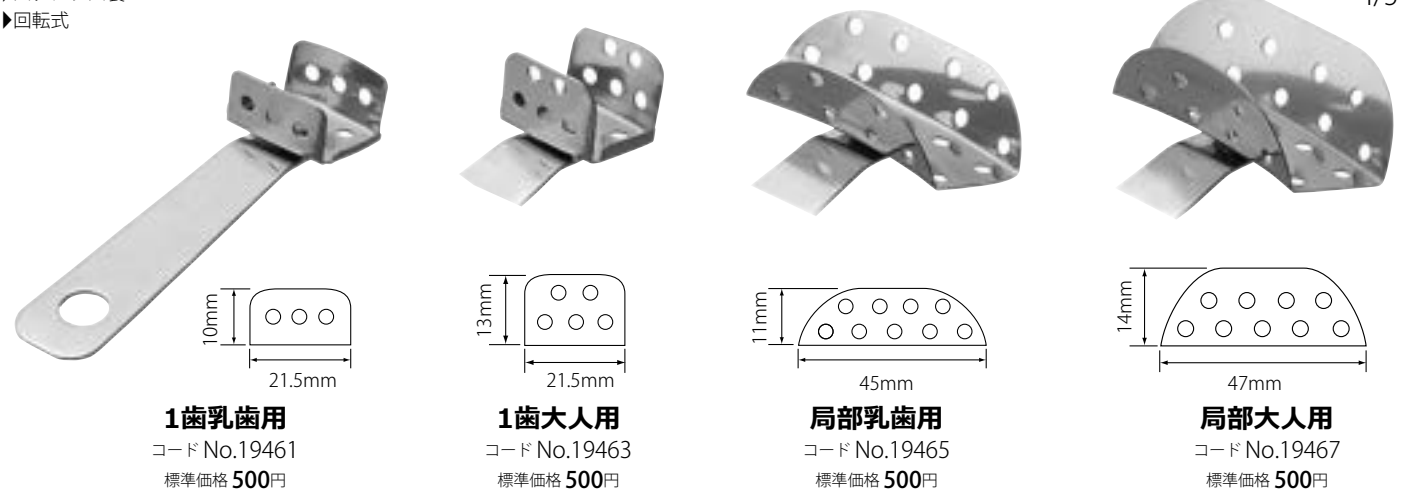

1 歯乳歯用

コード No.19461
標準価格 500円

1 歯大人用

コード No.19463
標準価格 500円

局部乳歯用

コード No.19465
標準価格 500円

局部大人用


コード No.19467
標準価格 500円

医療機器届出番号 11B1X1000668D106
一般的名称 歯科印象採用用トレー 販売名 回転トレー

4/5

総山トレー

- ▶ステンレス製
- ▶回転式

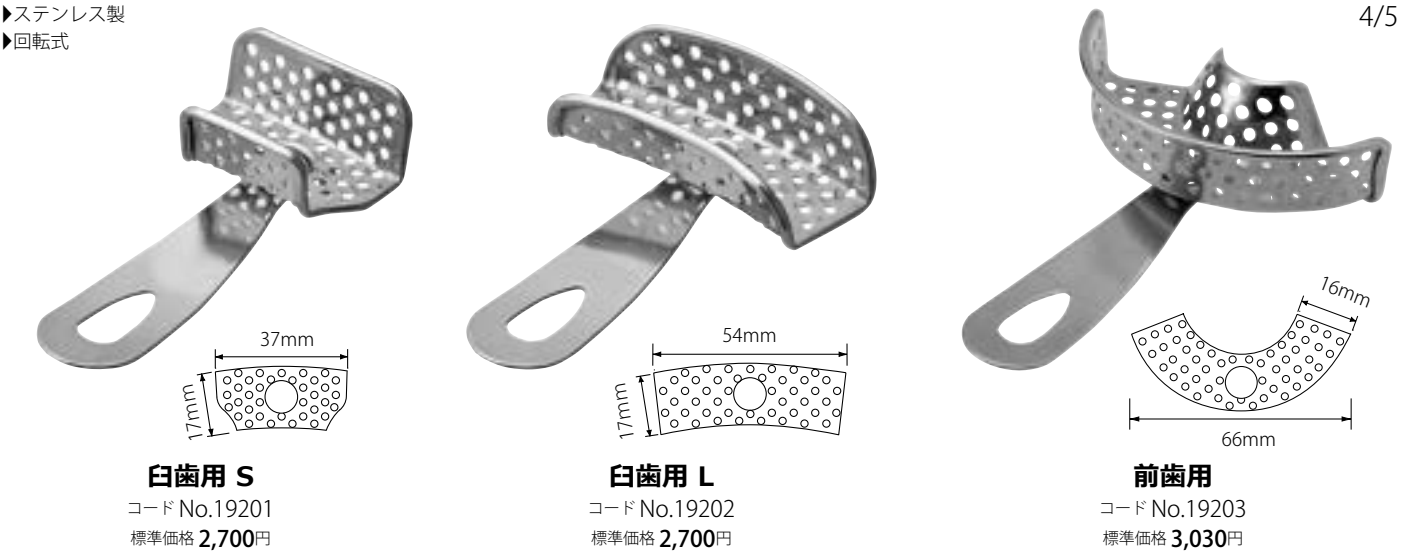

臼歯用 S

コード No.19201
標準価格 2,700円

臼歯用 L

コード No.19202
標準価格 2,700円

前歯用

コード No.19203
標準価格 3,030円


医療機器届出番号 11B1X1000668D103
一般的名称 歯科印象採用用トレー 販売名 総山トレー

4/5

インプレッショントレー 片顎用

2 個組 コード No.19030
標準価格 5,840円

▶ステンレス製

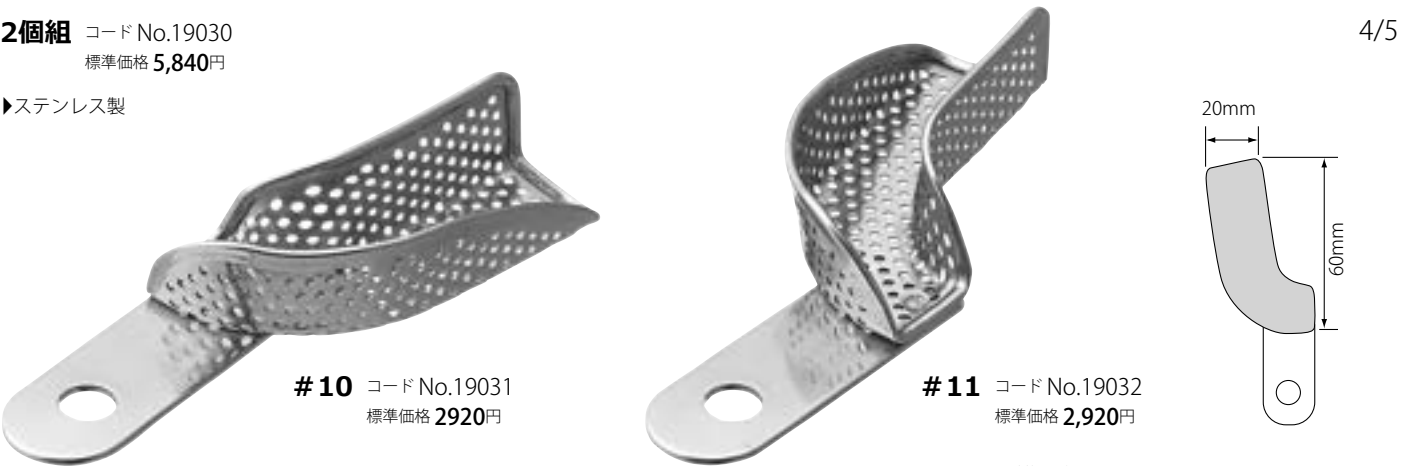

10 コード No.19031
標準価格 2920円

11 コード No.19032
標準価格 2,920円

医療機器届出番号 11B1X1000668D102
一般的名称 歯科印象採用用トレー 販売名 インプレッショントレー

4/5

カラートレー プレミアム




- サイズごとに色分けされているため、トレーの識別に便利です。
- トレー部が適度に柔らかく、サイズの微調整ができます。

2/5


▶アルミ製

上顎用

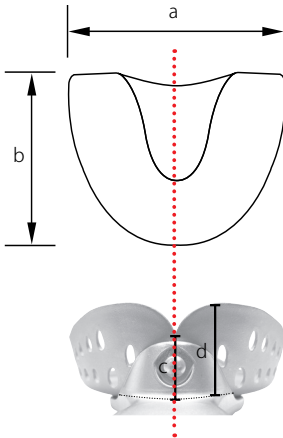

コードNo.	品名	サイズ (mm)				標準価格
		a	b	c	d	
19101	ピンク	57	48	12	20	4,020円
19102	ブルー	62	54	12	20	
19103	レッド	68	60	12	22	
19104	ゴールド	75	65	12	22	
19105	バイオレット	84	70	13	22	

下顎用

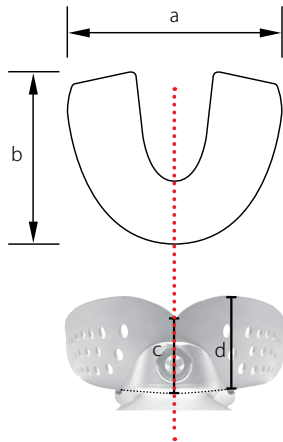

コードNo.	品名	サイズ (mm)				標準価格
		a	b	c	d	
19111	ピンク	62	44	15	20	4,020円
19112	ブルー	70	48	15	20	
19113	レッド	75	50	15	20	
19114	ゴールド	82	53	17	22	
19115	バイオレット	88	55	17	22	

※トレークリーナー使用不可
※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000668D101
一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 カラートレー

無歯顎用 トレー




8個組 コード No.19070
標準価格 27,200円

2/5


▶ステンレス製

上顎用

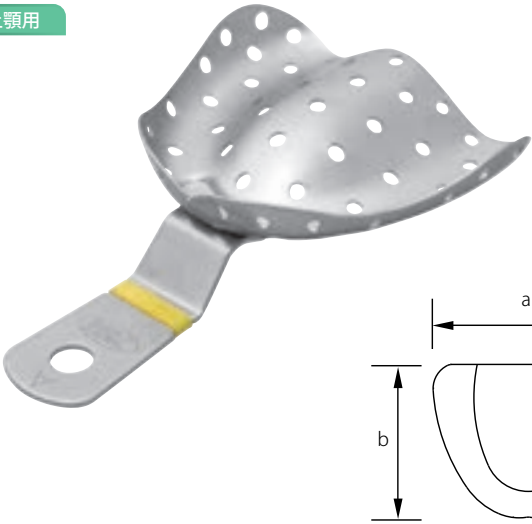

コードNo.	品名	サイズ (mm)		カラーリング	標準価格
		a	b		
19071	#UA	73	62		3,400円
19072	#UB	69	57		
19073	#UC	66	56		
19074	#UD	62	52		

下顎用

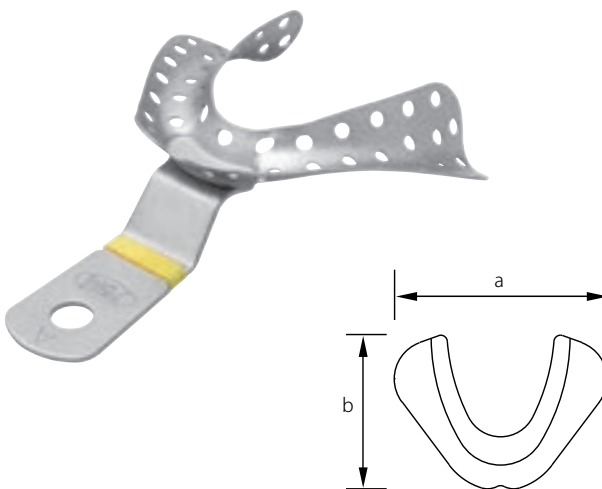

コードNo.	品名	サイズ (mm)		カラーリング	標準価格
		a	b		
19081	#LA	78	60		3,400円
19082	#LB	76.5	59		
19083	#LC	73	54		
19084	#LD	66	50		

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000668D109
一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 無歯顎用トレー

バイトトレー K型 臼歯用




- 形成歯・対合歯の印象と咬合が一度に採得できます。

2/3



コード No.19320
標準価格 6,330円 (用紙100枚付)

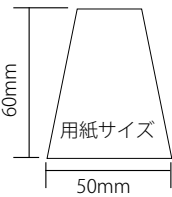

単品

コードNo.	品名	標準価格	入数
19321	臼歯用用紙	970円	300枚入

医療機器届出番号 11B1X1000668D104
一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 バイトトレー

寒天シリンジ (5/16) タイプ2

- 寒天サイズ5/16インチ用。ドライ・ウォーターいずれのコンディショナーにも使用できます。
- 本体は、テフロン樹脂で潤滑性があるため、寒天の押し出しがスムーズです。
- ヘッドは、ノズルの長さ・外径別に色分けされています。

1/1



コードNo.	品名	ノズルの長さ	ノズルの外径	標準価格
13600	2S (ピンク)	10 mm	φ0.8	10,670円
13601	2L (ブルー)	17 mm		
13602	3S (グリーン)	10 mm	φ1.2	

※10mm 一般印象用
※17mm ポスト印象用

※寒天シリンジ内径の公差／φ7.9±0.1mm
※本体／材質PFA 耐熱温度260℃
※緑色部／材質PP 耐熱温度155℃

医療機器届出番号 1181X1000668D303
一般的名称 歯科印象材用シリンジ 販売名 寒天シリンジ(5/16)

寒天シリンジ (CT) セット タイプ2

(本体、ノズル[太曲・1本、細曲 2本]、掃除棒 2本)

1/1



コード No.13568
標準価格 12,100円

単 品 ノズル(掃除棒2本付)

コードNo.	品名	ノズルのサイズ	標準価格	入数
13551	太曲	外径φ1.25 内径φ0.8	4,510円	3入
13552	細曲	外径φ0.9 内径φ0.6	4,510円	3入

コードNo.	品名	標準価格
90303	掃除棒	1,100円

※黒色部／材質PPS 耐熱温度271℃

医療機器届出番号 1181X1000668D302
一般的名称 歯科印象材用シリンジ 販売名 寒天シリンジ(CT)


ジンジバック インストルメント

- 先端部厚みが0.3mmと薄いため、歯肉溝へスムーズに挿入できます。

1/1



前歯用 #0.3 コード No.13107
標準価格 4,730円

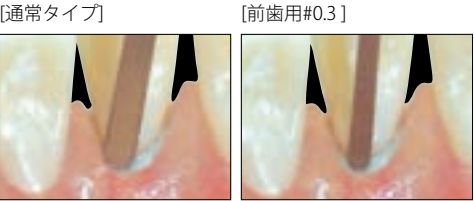


- 下顎前歯部圧排時、先端幅が通常タイプより狭いため、歯肉に負担をかけずに挿入できます。



白歯用 #0.3 コード No.13108
標準価格 4,730円

- 《探針と同じ湾曲》で歯面に沿わせやすく、スムーズに操作できます。
- 《側面ヘラ》と《内面ヘラ》の組み合わせで歯肉溝に無理なく圧排糸を滑り込ませるスペースをつくるとともに、圧排糸の浮き上がりを押さえます。
- 圧排糸の種類や太さを選ばず、全顎に無理なく対応するオールマイティーな仕様です。

〔臨床動画〕

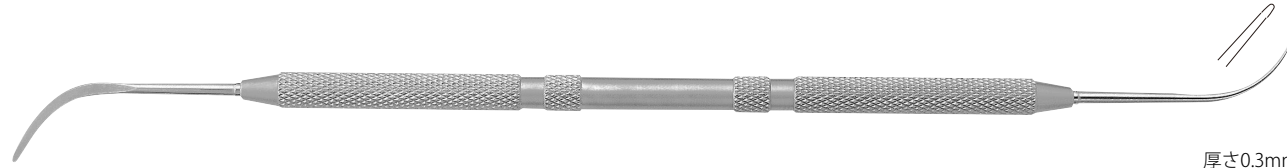

#0.3P コード No.13100
標準価格 4,730円

考案 / 写真提供：青井良太先生 (SBC (Surgical Basic Course) 主幹)



- 側面ヘラ側の先端部で圧排糸の先を挿入します。
- 歯肉溝にスペースを作りながら背面で圧排糸を挿入します。
- 屈みにくい隣接面は内面ヘラ側を使用すると到達性がよくなります。



- 圧排糸が捕まりづらい挿入の始点や、滑りやすいシルク糸などに有効です。

〔臨床動画〕



超硬溶射加工

- 超硬溶射の凹凸は滑り止め効果がありながらも、圧排糸をほつれさせにくい仕様です。



白歯用#0.3TC コード No.13110
標準価格 4,730円

※超硬溶射付
厚さ0.3mm

医療機器届出番号 1181X1000665D701
一般的名称 歯科用圧入充填器 販売名 ジンジバックインストルメント

クリアランスゲージ

- ゲージ先端径が2種類(φ1.5/φ2.0) があるため、クリアランスの確認が容易です。
- 先端が球状なため、どの向きで計測しても同サイズになり、操作性に優れています。



1/1



コード No.13201
標準価格 4,800円



写真提供：窪田 努 先生（クボタ歯科院長）

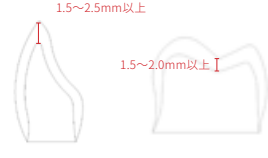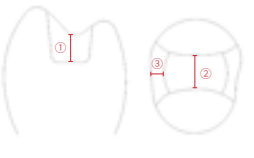CAD/CAM冠		CAD/CAMインレー	
			
前歯	臼歯	①小窩裂溝部	1.0~1.5mm以上
1.5~2.5mm以上	1.5~2.0mm以上	②イスマス	1.0~1.5mm以上
		③歯肉壁	1.0~1.5mm以上

※サイズは各メーカーの指定に従ってください。

医療機器届出番号 11B1X1000664D113
一般的名称 歯科用探針 販売名 クリアランスゲージ

アルジネートスパチュラ タイプ3

3/4



コード No.11724
標準価格 2,530円



コキ付 コード No.11725
標準価格 2,530円

※ハンドル／材質 ABS 耐熱温度80℃

医療機器届出番号 11B1X1000666D003
一般的名称 歯科用練成へら 販売名 アルジネートスパチュラ

石膏スパチュラ タイプ3

3/4



コード No.11704
標準価格 2,530円



コキ付 コード No.11705
標準価格 2,530円

※ハンドル／材質 ABS 耐熱温度80℃

医療機器届出番号 11B1X1000666D002
一般的名称 歯科用練成へら 販売名 石膏スパチュラ

トレースパチュラ タイプ3


3/5



コード No.11743
標準価格 3,600円

サイズ／200mm

※ハンドル／材質 ABS 耐熱温度80℃

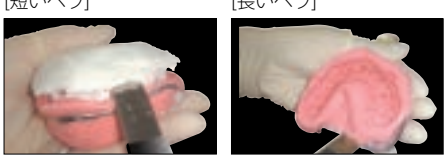

[短いヘラ] ●石膏模型を容易に取り外すことができます。

[長いヘラ] ●印象材をトレーからカンタンに除去することができます。

アルジネートカッター

- トレーの印象材を効率よく除去できます。


3/5



コード No.11741
標準価格 1,600円

サイズ／185mm

※材質 PS 耐熱温度80℃

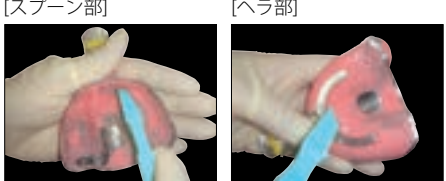

[スプーン部] [ヘラ部]

トレータワー タイプ3



1/4

- 印象を採ったトレーや石膏を盛ったトレーを、場所を取らずに置くことができます。



コード No.13508
標準価格 12,100円

サイズ／W123×D180×H165mm

※収納個数／全額トレー6個



トレータワー タイプ3用 湿箱



1/5

- 湿箱に入れることにより、湿度を保ち、印象材や石膏の乾燥・変形を防ぎます。



コード No.13509
標準価格 7,260円

サイズ／W160×D218×H180mm

医療機器届出番号 11B1X1000666D004
一般的名称 歯科用練成湿箱 販売名 トレータワー用湿箱

金冠バサミ



4/5

#10
コード No.12010
標準価格 **9,680**円
直
サイズ／110mm

#11
コード No.12011
標準価格 **9,680**円
曲
サイズ／110mm

#210
コード No.12210
標準価格 **9,680**円
直
サイズ／115mm

#211
コード No.12211
標準価格 **9,680**円
曲
サイズ／115mm

#311
コード No.12311
標準価格 **9,680**円
曲
サイズ／92mm

#510
コード No.12510
標準価格 **9,680**円
直
サイズ／105mm

#511
コード No.12511
標準価格 **9,680**円
曲
サイズ／105mm

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000635D101
一般的名称 歯科用金冠はさみ 販売名 金冠バサミ

箔用バサミ



4/5

直
コード No.12701
標準価格 **8,250**円
サイズ／110mm

曲
コード No.12702
標準価格 **8,250**円
サイズ／109mm

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000635D002
一般的名称 はさみ 販売名 箔用バサミ

咬合紙ホルダー



1/1

スタンダード コード No.11251
標準価格 **6,050**円

クレンメル コード No.11250
標準価格 **9,300**円

●咬合紙の抜け防止に優れています。

鉗子形 コード No.11252
標準価格 **6,790**円

医療機器届出番号 11B1X1000636D301
一般的名称 歯科咬合紙用ピンセット 販売名 咬合紙ホルダー

コンタクトゲージ 両頭 セット

(ホルダー、ゲージ30μm2枚・50μm2枚・110μm1枚)

4/5



サイズ／165mm

コード No.21147
標準価格 27,830円

●使用中、ホルダーから外れないよう、フックが付いています。

※ゲージ色部／材質 POM 耐熱温度162℃

コンタクトゲージ 片頭 セット

(ホルダー、ゲージ30μm2枚・50μm2枚・110μm1枚)

4/5



サイズ／140mm

コード No.21148
標準価格 24,530円

※ゲージ色部／材質 POM 耐熱温度162℃

単 品 ※ 両頭、片頭用共通です。				コードNo.	品名	標準価格	入数	コードNo.	品名	標準価格	入数	PARTS
				21142	コンタクトゲージ 30(グリーン)	8,470円	5枚入	21146	両頭ホルダー	19,360円	1入	
				21136	コンタクトゲージ 50(ブルー)	8,470円	5枚入	21131	片頭ホルダー	16,060円	1入	
				21137	コンタクトゲージ 110(イエロー)	8,470円	5枚入					
				21138	コンタクトゲージ 150(レッド)	8,470円	5枚入					

コンタクトゲージ ハンドル付

- コンタクトゲージとハンドルが一体化になっています。
- ハンドルをつかむと、ゲージのたわみを張ることができ、歯間部に入れやすくなります。
- ハンドルがゲージの厚みごとに色分けされています。

30

コード No.21161
標準価格 9,680円 (5入)
厚さ／30μm

50

コード No.21162
標準価格 9,680円 (5入)
厚さ／50μm

110

コード No.21163
標準価格 9,680円 (5入)
厚さ／110μm



※サイズ／67mm
※色部／材質 PP 耐熱温度155℃

PAT.

セメントスパチュラ

1/1



1 コード No.11551
標準価格 3,800円



3 コード No.11553
標準価格 4,400円



22 コード No.11522
標準価格 3,800円



24 コード No.11524
標準価格 3,800円

余剰セメント除去器

- #1はブローラーとスケーラーの組合わせで、余剰なセメントを効率よく除去できます。
- #2はグレーシーキュレットの#G11-12と同じ屈曲をしているため、臼歯部隣接面まで届きやすいです。

〔臨床動画〕



1/1



#1 コードNo.13205
標準価格 4,400円



#2 (臼歯用) コードNo.13206
標準価格 4,840円




写真提供: 天川 由美子先生 (天川デンタルオフィス外苑前 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000642D015
一般的名称 歯科用起子及び刮離子 販売名 余剰セメント除去器

インレー・クラウンセッター セット


(ハンドル、フラットラバー・ピン付ラバー各2入、ドライバー)

- 補綴物をセットする際に、患者様に咬んでもらうことにより、適度な圧力がかかり補綴物の浮上りを防止します。

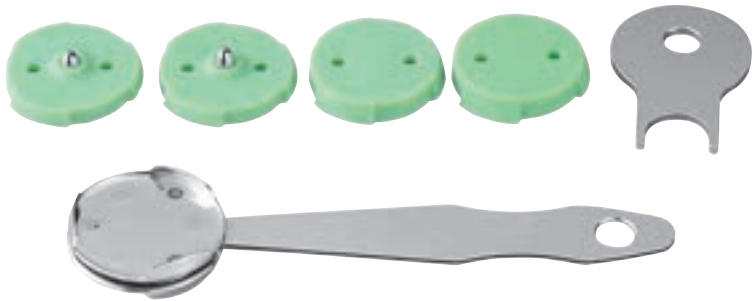


コードNo.13230
標準価格 4,500円

〔インレーセット時〕

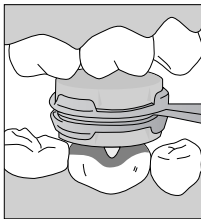

- ピン付ラバーとフラットラバーを片面ずつ装着。

〔クラウンセット時〕

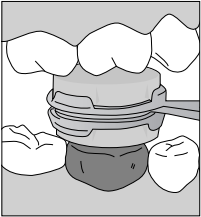

- フラットラバーを両面に装着。

※緑色部／材質 Si 耐熱温度260℃

単 品			
コードNo.	品名	標準価格	入数
13231	フラットラバー	1,000円	2入
13232	ピン付ラバー	1,500円	2入

クラウン グリッパー

- テンポラリークラウンの撤去やクラウンの試適等に便利です。

1/1



コード No.21083
標準価格 17,600円

サイズ／165mm

超硬付



- クラウン保持部に細かい溝を付与した超硬チップが付いているため、滑らずにしっかりと掴めます。



- ハサミタイプは、把持、開閉がやすく、操作時のストレスが軽減されます。



- 細いハンドルが適度になることにより、保持感覚が伝わります。力のコントロールがしやすく、クラウン破損のリスクが軽減されます。



- 分銅式のリムーバーでは操作がしにくい臼歯部にもラクに届き、安定して掴めます。

写真提供: 木戸 淳太 先生 (米国補綴専門医 つきやま歯科医院)

写真提供: 林 康弘 先生 (林歯科医院 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000639D206
一般的名称 鉗子 販売名 クラウングリッパー

クラウン リムービング プライヤー PRO 上顎前歯用




- 上顎前歯部の試適したクラウンを壊さず、傷をつけずに撤去します。
- 破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウンやハイブリッドセラミッククラウン等に有効です。

1/1



コード No.21080
標準価格 **24,000**円
(UAチップ LP〔唇側用・口蓋側用〕各5入)

サイズ／135mm

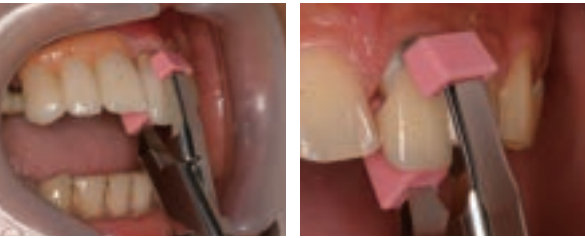

写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

⚠ 撤去の際はクラウンのマージン部を把持しないで下さい。
特にセラミックやレジン系のクラウンはマージン部等の薄い部分を把持すると破折する恐れがあります。また、クラウンに過度な力を加えると破折や傷をつける恐れがあります。操作は力の加減をしながらゆっくりと行って下さい。

単品

UAチップ LP〔唇側用・口蓋側用〕
コード No.90459
標準価格 **2,000**円（各5入）

※チップ／材質Si 耐熱温度260℃

ホールグリップ効果 PAT.P


唇側面 クラウンの豊隆部をつかみます。先端部のホール（穴）が豊隆部を包みこみ、縁のグリップ効果により、安定してクラウンを把持できます。



※イラストはチップ内で得られている効果のイメージです。

○ホールグリップ


〔先端部ホール〕

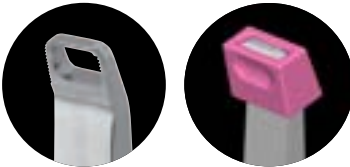

チップ内面には窪みを付与し、チップ上からでも「ホールグリップ効果」が得られます。

フレキシブルフィット効果 PAT.P

口蓋側面 舌側窩にあわせてチップが変形してフィットします。さまざまな凹形状に対応。面で当たることで滑りにくく安定して把持できます。

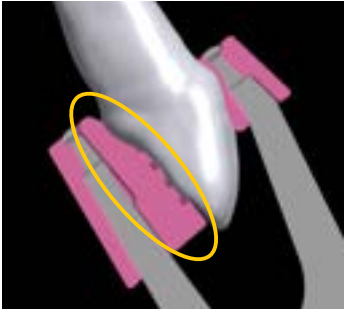

○フレキシブルフィット



チップ内面に操作方向と逆に効く滑り止めの溝がついています。

バネによる微調節効果

- バネの反発力により、過度なハンドルの握りこみを防ぎます。
- 力のコントロールがしやすくクラウンの破折を防ぎます。



クラウン リムービング プライヤー PRO




- 試適したクラウンを壊さず、傷をつけずに撤去します。
- 破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウンやハイブリッドセラミッククラウン等に有効です。
- 臼歯部におすすめです。

1/1



コード No.21079
標準価格 **26,400**円（チップ10入）

サイズ／160mm

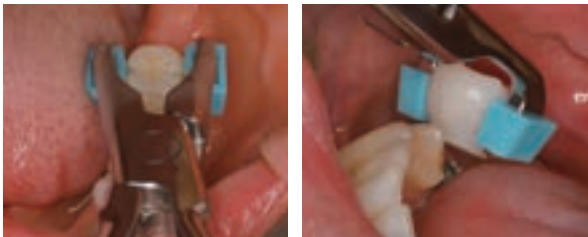

写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

単品

チップ
コード No.90455
標準価格 **2,200**円（10入）

⚠ 撤去の際はクラウンの豊隆部を把持して下さい。特にセラミックやレジン系のクラウンはマージン部等の薄い部分を把持すると破折する恐れがあります。また、クラウンに過度な力を加えると破折や傷をつける恐れがあります。操作は力の加減をしながらゆっくりと行って下さい。

ホールグリップ効果 PAT.6299023

- クラウンの豊隆部をつかみます。先端部のホール（穴）が豊隆部を包みこみ、縁のグリップ効果で安定してクラウンを把持します。



※イラストはチップ内で得られている効果のイメージです。

○ホールグリップ


〔先端部ホール〕



チップ内面には窪みを付与し、チップ上からでも「ホールグリップ効果」が得られます。

パラレル把持効果

- 左右の先端部がクラウンをパラレル（平行）に挟みこみ把持します。
- 先端全面でクラウンをつかむため、高い保持力が得られます。

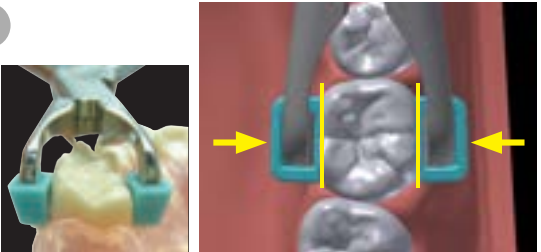


バネによる微調節効果

- バネの反発力により、過度なハンドルの握りこみを防ぎます。
- 力のコントロールがしやすく、クラウンの破折を防ぎます。



ロングハンドル効果

- 120 mmのロングハンドルで、臼歯部まで容易に届きます。
- 分銅式リムーバーでの操作が難しい大臼歯部のクラウン撤去に有効です。

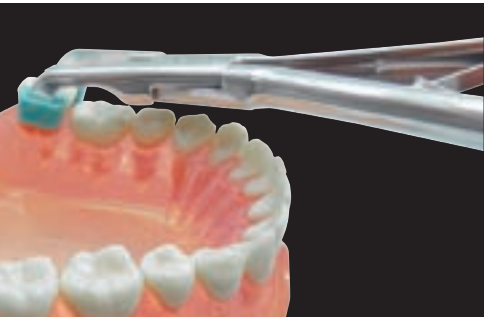

※チップ／材質Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 1181X100642D034
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 クラウンリムービングプライヤーPRO

テンポラリー クラウン 撤去プライヤー


●歯肉・支台歯に損傷なく撤去できます。



1/1



コード No.21077
標準価格 16,080円

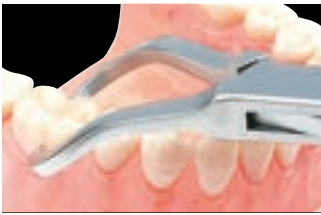

医療機器届出番号 11B1X1000642D010
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 テンポラリークラウン撤去プライヤー

クラウン スプリットング プライヤー

●左右均等に広げるので、支台歯に負担がかからず動揺歯にも使用できます。




1/1




コード No.18593
標準価格 22,660円



〔臨床動画〕

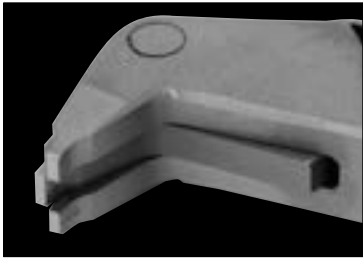

●ハンドルを握ると先端が開きます。

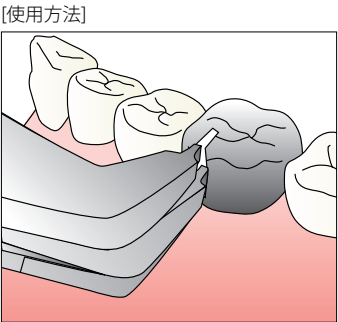

- 〔使用方法〕
- ①バーでクラウンにスリットを入れます。
※スリット幅はプライヤーの先端幅0.9mm以上。
※臼歯部は頬側近心隅角付近に咬合面中央部まで入れます。
 - ②スリットにプライヤーの先端を合わせ、
ハンドルを握ると先端が均等に開き、クラウンが外れます。


医療機器届出番号 11B1X1000642D011
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 クラウンスプリットングプライヤー

リムービング ドライバー

●てこの作用を応用して撤去します。




1/1

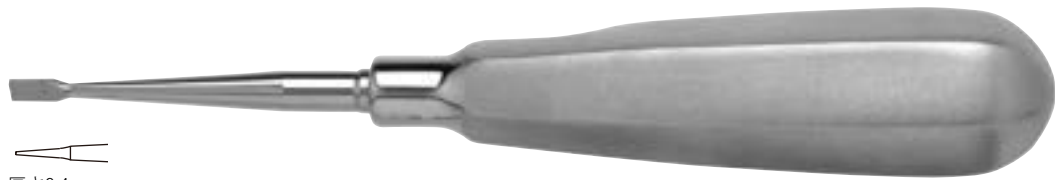


S コード No.21073
標準価格 8,030円

厚さ0.4mm

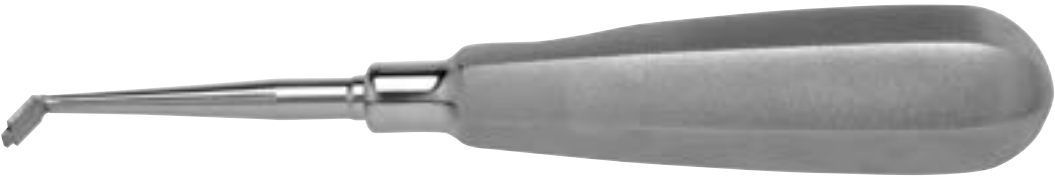

C コード No.21074
標準価格 8,030円

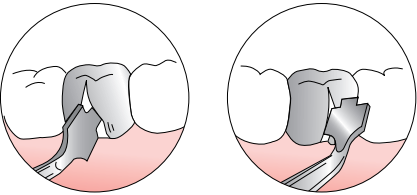

医療機器届出番号 11B1X1000642D020
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 リムービングドライバー

クラウン スリッター



1/1



コード No.21060
標準価格 11,770円

医療機器届出番号 11B1X1000642D007
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 クラウンスリッター

オートマチック クラウン リムーバー セット



(ハンドル、リムーバーポイントS・W各1本)


4/5

- ハンドルを片手で握るだけで振動を与えられるので、もう片方の手を先端にそえることができます。
- 振動の強弱の調整が可能です。
- 上向きでも下向きでも、同様の振動を与えることができます。



コード No.21010
標準価格 44,000円

[注油]

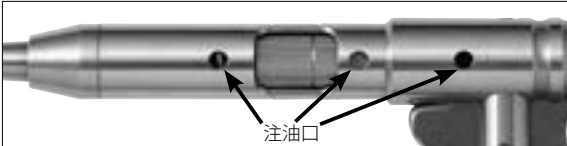

- 定期的に注油をして下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000642D025
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 オートマチッククラウンリムーバーセット


インレー・クラウン リムーバー セット



(ハンドル、リムーバーポイントS・W各1本)

4/5

- ポイントを回転フック式で固定するため、使用中に振動で弛みません。

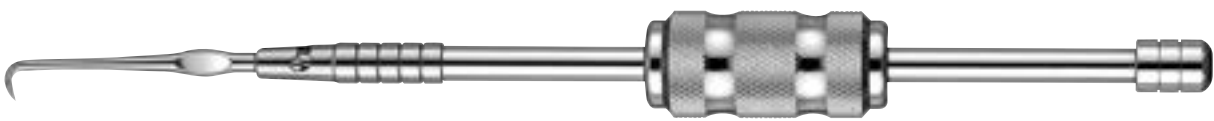

コード No.21020
標準価格 12,980円

単品

インレー・クラウンリムーバー ハンドル
コードNo.21021
標準価格 5,720円

ハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000642D022
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバー ハンドル
セット 医療機器届出番号 11B1X1000642D023
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバーセット

インレー・クラウン リムーバー Lセット



(Lハンドル、リムーバーポイントS・W各1本)

4/5

- 分銅が重く、1回のストロークでかかる力が大きいため、少ないストローク数で撤去できます。




コード No.21018
標準価格 13,590円

単品

インレー・クラウンリムーバー Lハンドル
コードNo.21019
標準価格 6,330円

Lハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000642D035
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバーLハンドル
セット 医療機器届出番号 11B1X1000642D036
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバーLセット

リムーバーポイントの装着方法

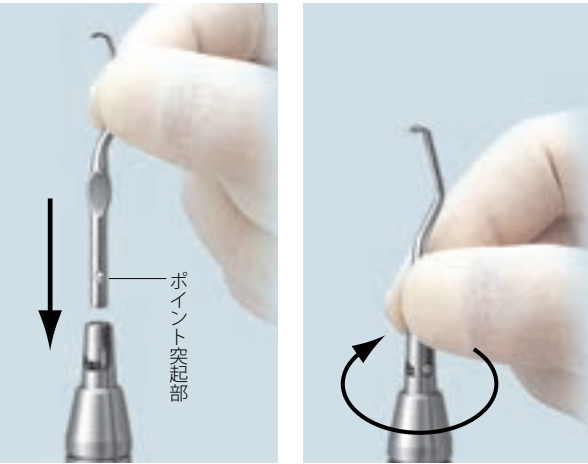

- ポイントがワンタッチ着脱できます。
- ポイント突起部をタテ溝に沿って挿入し、回転させて固定します。

※オートマチック クラウン リムーバー セット、
インレー・クラウン リムーバー セット、
インレー・クラウン リムーバー Lセットの共通になります。

単品

1/1

リムーバーポイント



W
コード No.21012
標準価格 3,630円



S
コード No.21013
標準価格 3,630円



クサビ型
コード No.21014
標準価格 3,630円



頬側用
コード No.21015
標準価格 3,630円

医療機器届出番号 11B1X1000642D001
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 リムーバーポイント

メタルコアリムービングダブルドライバー


- 力を頬舌側から均等に歯軸方向へ作用させるため、歯質への襲撃が少なく使用できます。
- 前歯部から臼歯部まで部位を選ばずにアクセスできます。

〔臨床動画〕 1/1




●舌・口蓋側には先端が【15° 屈曲】した「曲 舌側用」を用いることで、反対側の歯列を避けて咬合面と平行にアクセスが可能。歯軸方向に力を作用させて歯根破折を防ぎます。

※ハンドルに直 頬側用「DDT-S」・曲 舌側用「DDT-C」と刻印が入っています。

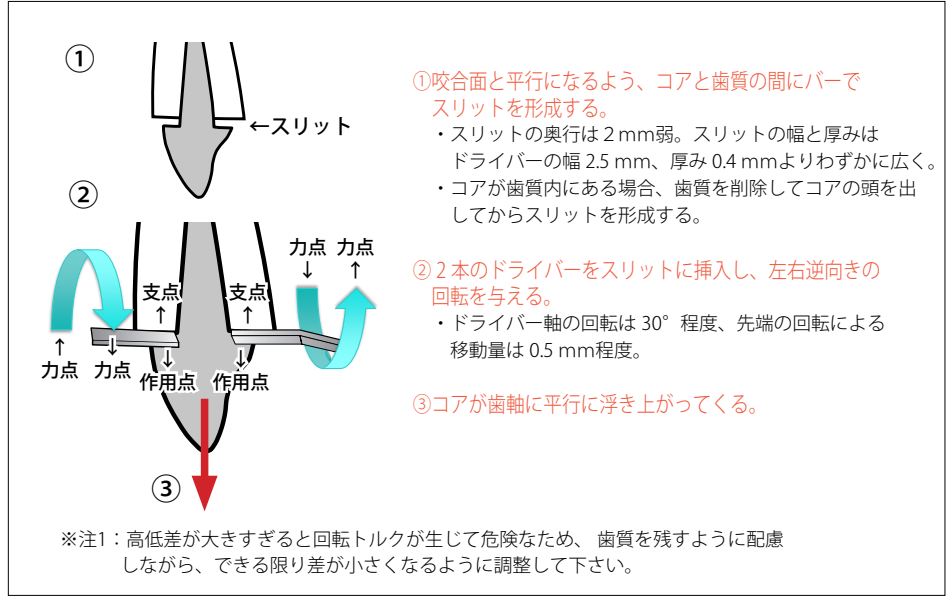

【分割コア除去症例】

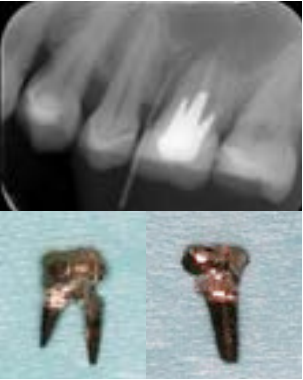


写真提供：北村和夫先生
(日本歯科大学附属病院 総合診療科 教授)

医療機器届出番号 1181X1000642D037
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 メタルコアリムービングダブルドライバー


メタルコアリムービングプライヤー

- バネの反発力により、過度なハンドルの握りこみを防ぎます。
- 先端がコンパクトなため、隣在歯への接触を防ぎ操作がスムーズです。

〔臨床動画〕 1/1

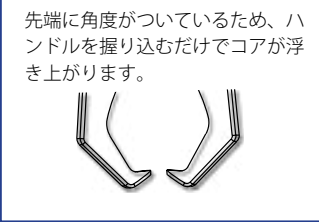


〔使用方法〕

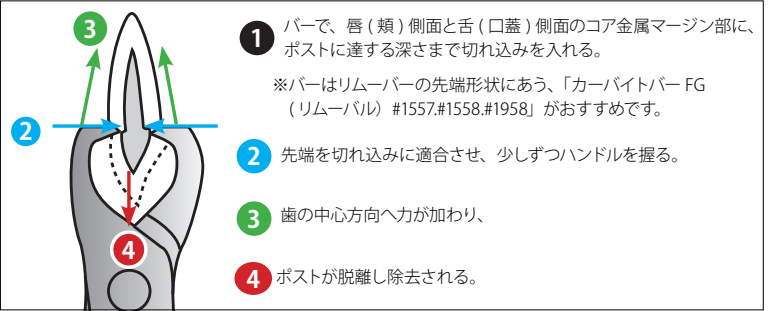

写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

医療機器届出番号 1181X1000642D038
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 メタルコアリムービングプライヤー

スクリューポスト 撤去鉗子 曲

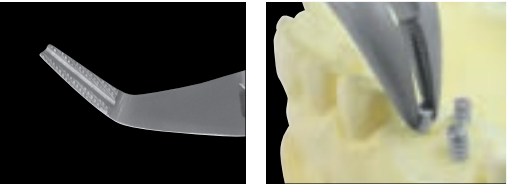

医療機器届出番号 1181X1000642D009
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 スクリューポスト撤去鉗子