

剥離子オーダーシステム

HB6

HB9

開発協力



石川 知弘 先生
石川歯科



小川 雄大 先生
U デンタルオフィス恵比寿

HB9 HB10

- ・複屈曲な先端で頬舌的にアプローチが可能。
- ・小さな先端は歯間乳頭の剥離やトンネリングテクニックにも有効。

[HB9]



写真提供: 石川 知弘 先生 (石川歯科 院長)

[HB10]



[HB10]



写真提供: 小川 雄大 先生 (U デンタルオフィス恵比寿 院長)

HB10

HB7

開発協力



山口 文誉 先生
山口歯科医院

HB6

- ・骨膜・粘膜の剥離、歯肉圧排、排除に有効。
- ・先端幅は2.0mmと細く、下顎の前歯、歯間乳頭にも有効。

HD3

- ・剥離した歯間乳頭を反対側に押し出す。
- ・また袋状に剥離した歯肉(パウチ)を持ち上げる際に有効。

[HB6]



写真提供: 山口 文誉 先生 (山口歯科 院長)

[HD3]



HB7 HB8

- ・骨膜・粘膜の剥離、歯肉圧排、排除に有効。
- ・先端のカーブが豊隆をよけ、術部へのアプローチが可能。
- ・臼歯部近遠心に有効。

[HB8]



写真提供: 山口 文誉 先生 (山口歯科 院長)

HD3

HB8

剥離子オーダーシステム

- ハンドルと先端部を自由に組合わせてオーダーできます。
- 術者の手法に合った組合せて、治療がよりスムーズになります。
- ハンドルは3種類、先端部は30種類から選べます。

ハンドル



NEW

カラフィー

コード No.15000
標準価格 14,000円



※長さ/110mm
※径/φ10.0~12.0mm
※材質/Si 耐熱温度260°C



丸柄

コード No.15008
標準価格 12,000円



※長さ/110mm
※径/φ9.5mm



丸柄 Short

コード No.15009
標準価格 12,000円



※長さ/80mm
※径/φ9.5mm

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般名 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

ご注文方法




[組合わせ例]


ハンドル：丸柄
先端部：HC3、HB2 をご指定の場合

コード No.15008 「剥離子 オーダーシステム 丸柄 + HC3 + HB2」


[骨膜/粘膜]

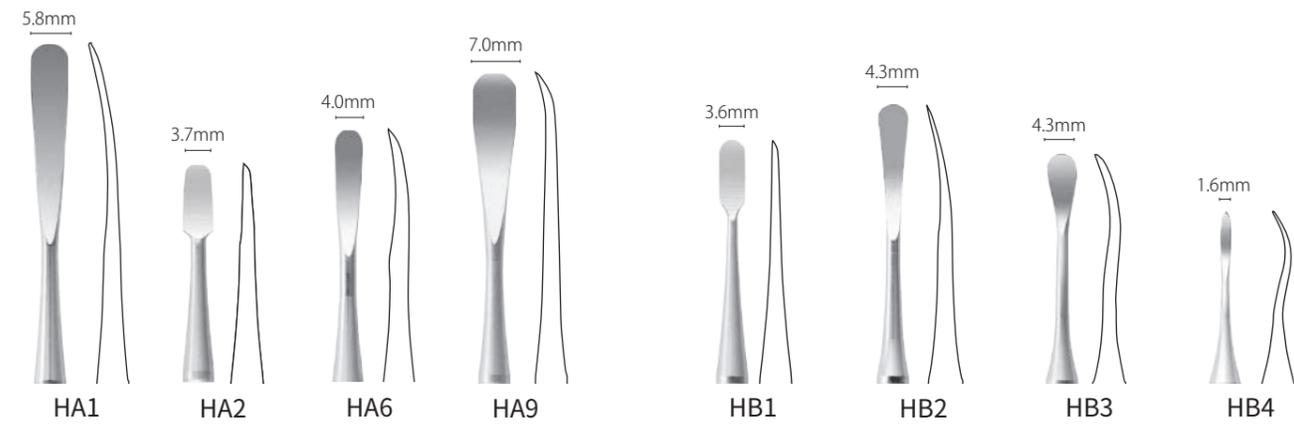

[骨膜/粘膜]

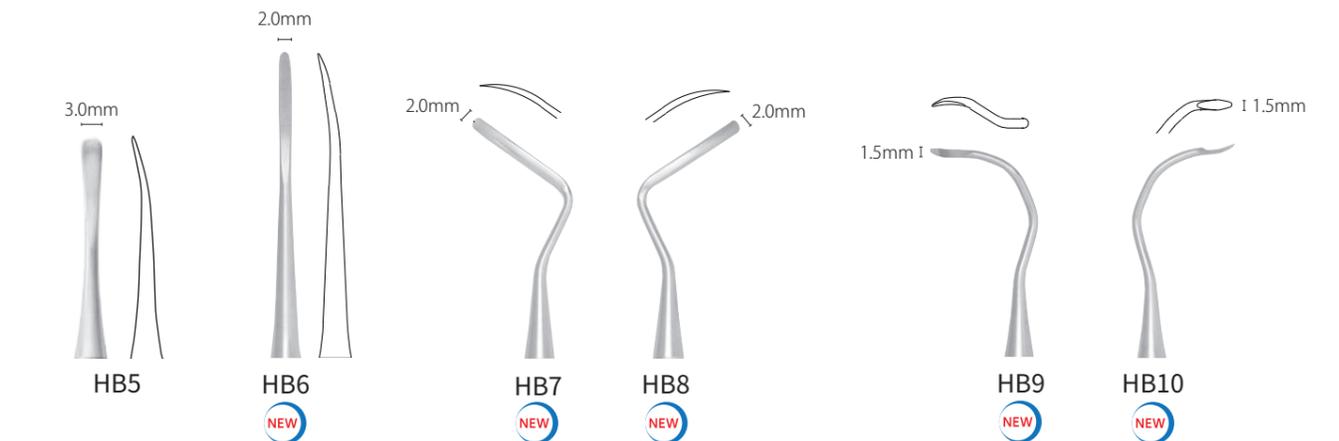


[骨膜/粘膜]

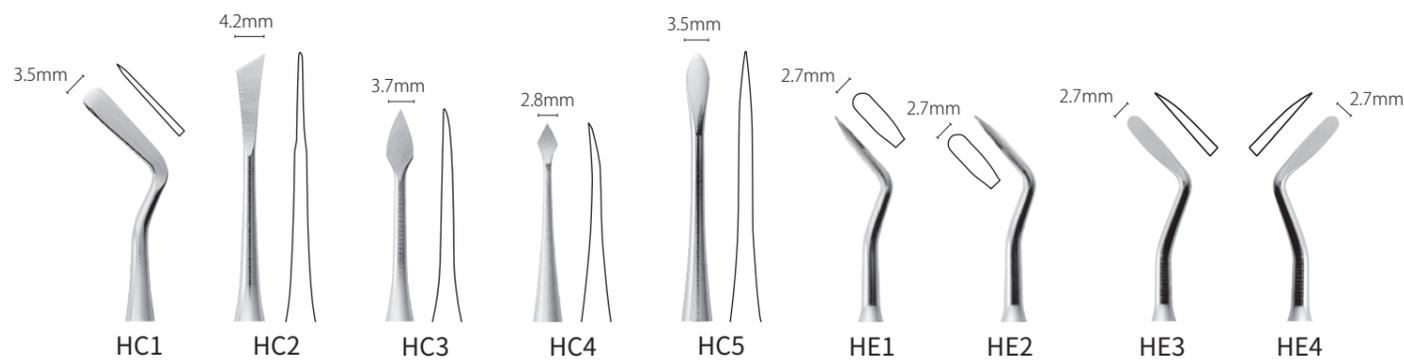

※背面が平ら ※内面が平ら

[剥離/搔爬]

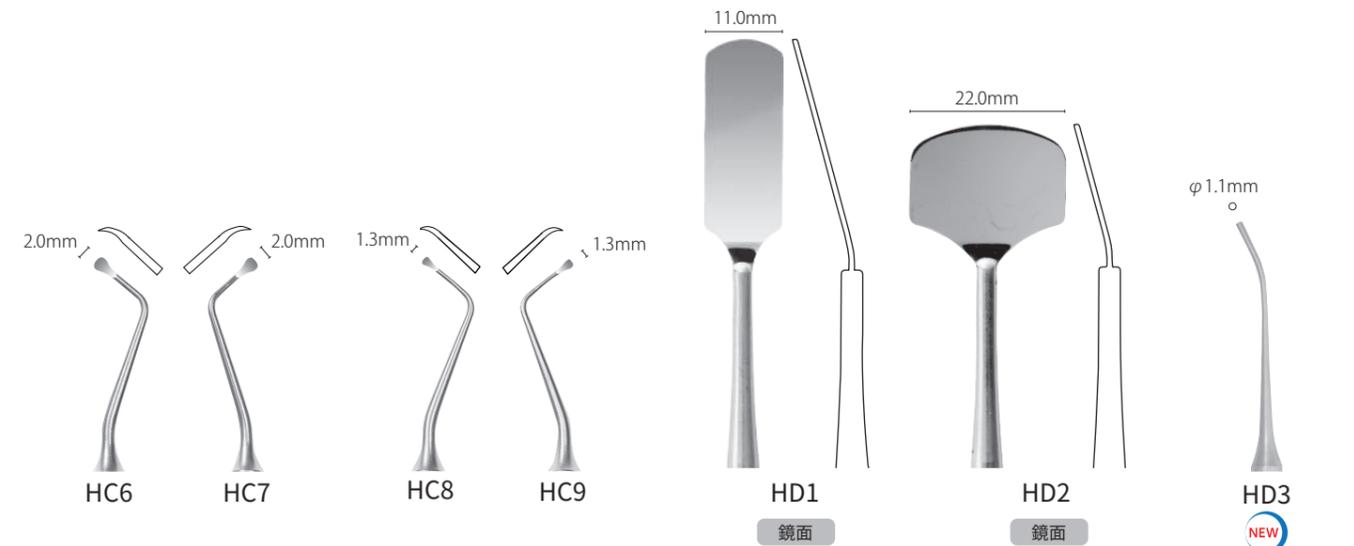

鏡面


鏡面

NEW



パターン1

石川 知弘 先生 開発協力
医療法人社団 石川歯科 院長

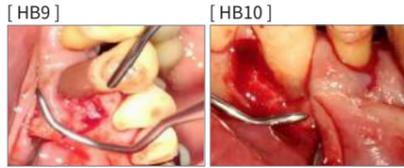

[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB9 + HB10



パターン2

山口 文誉 先生 開発協力
山口歯科医院 院長



[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB6 + HD3



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB7 + HB8



パターン3

小川 雄大 先生 開発協力
U デンタルオフィス恵比寿 院長



[臨床動画]




No.15000 剥離子オーダーシステム カラーフィー + HB9 + HB10



パターン4

瀧野 裕行 先生 タキノ歯科医院 理事長

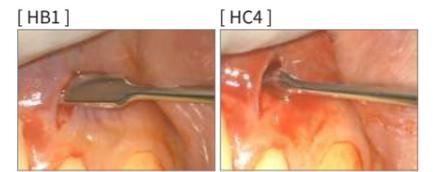

No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB1 + HB3




No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB3 + HC4



パターン5

多保 学 先生 たほ歯科医院 理事長
日本歯科大学附属病院 臨床准教授

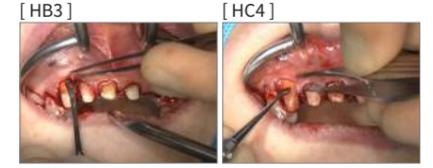

[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB3 + HC4



パターン6

上田 秀朗 先生 上田塾主宰



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB4 + HC4




No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA2 + HB5



パターン7

大森 有樹 先生 大阪 SJCD 会長 歯科勉強会大森塾主宰

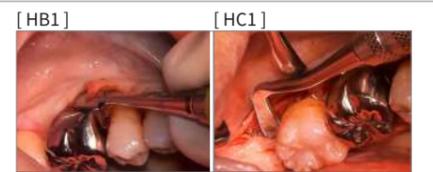

No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB1 + HC1
(ハーシュフェルト)

パターン 8

保坂 均 先生 開発協力 日本歯周病学会 指導医・専門医



[HE1] ・口蓋側を剥離します。 [HE2] ・唇側を剥離します。 [臨床動画]

・頰部に4方向の角度が付与されたブレードが鋭利な骨膜剥離子です。



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HE1 + HE2



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HE3 + HE4



パターン 9

石井 宏 先生 ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB2 + HC2
(ペリオスチール24G)



パターン 10

井原 雄一郎 先生 井原歯科クリニック 院長



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB4 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC6 + HC7

2.0mm



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA9 + HD1



パターン 11

青井 良太 先生 開発協力 SBC (Surgical Basic Course) 主幹



[HD2] ・広範囲の歯肉を排除できます。

・歯肉排除用の組み合わせ。1本で大小揃い、術部の広さに合わせてスムーズに対応でき便利です。
・術部確認のミラー機能も併用できます。



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB1 + HC1
(ハーシュフェルト)



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC6 + HC7

2.0mm



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC8 + HC9

1.3mm



No.15009 剥離子オーダーシステム 丸柄 Short + HD1 + HD2



パターン 12

尾野 誠 先生 四条烏丸歯科クリニック



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB5 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC8 + HC9

1.3mm

1.3mm



パターン 13

梶村 幸市 先生 ユアーズ歯科クリニック



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA6 + HB2



パターン 14

渥美 克幸先生 デンタルクリニック K 院長



[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB5 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HE1 + HE2



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HE3 + HE4



パターン 15

奈良 嘉峰先生
茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長



[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB3 + HC3
(ブーザー)



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB2 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA6 + HD1



パターン 16

中家 麻里先生 なかや歯科 院長



[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB4 + HB5



パターン 17

増田 英人先生 まずは歯科医院 院長



[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB2 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA6 + HC3



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC6 + HC8



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC7 + HC9



パターン 18

築山 鉄平先生
つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長




No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB2 + HC2
(ペリオスチール24G)



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB3 + HC4




No.15009 剥離子オーダーシステム 丸柄 Short + HA1 + HD1
(ブリチャード)

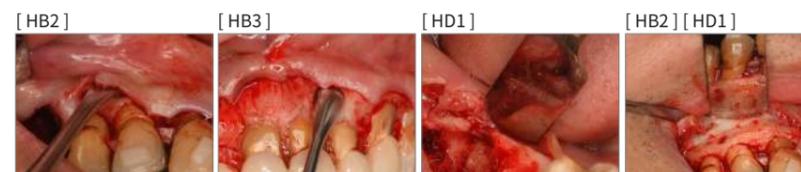

パターン 19

山本 松男 先生 昭和大学歯学部 歯周病学講座 教授

- ・スプーン状の先端部には周囲300°に鋭いブレードが付いています。
- ・狭い歯間部等でも歯周組織に与えるダメージを抑えて剥離できます。
- ・鋭匙として狭い部分での不良肉芽の除去にも有用です。

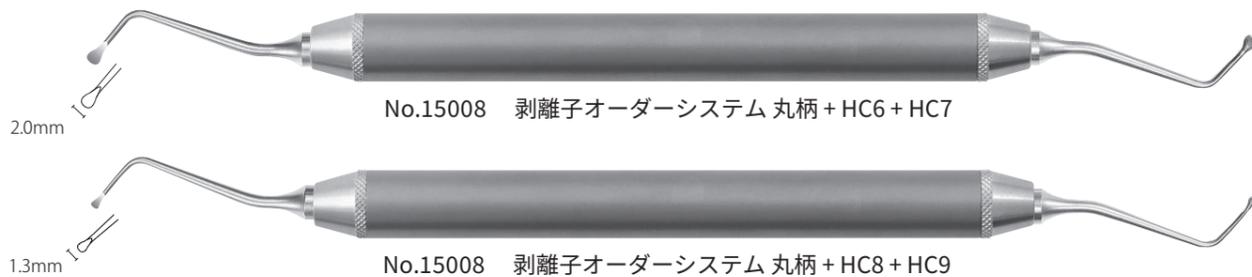

・歯間が2mm程度の狭い場合に、極小サイズの先端部が有効。歯肉弁の直下にある骨膜（結合組織）を剥離することができ、狭い（血流の乏しい）歯肉組織へのダメージを減少させます。




・極小スプーン状の先端部は鋭匙としても有用。クレーター状骨欠損部等でも骨を削除することなく、不良肉芽を掻き出すことができます。

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

粘膜剥離子



1/1

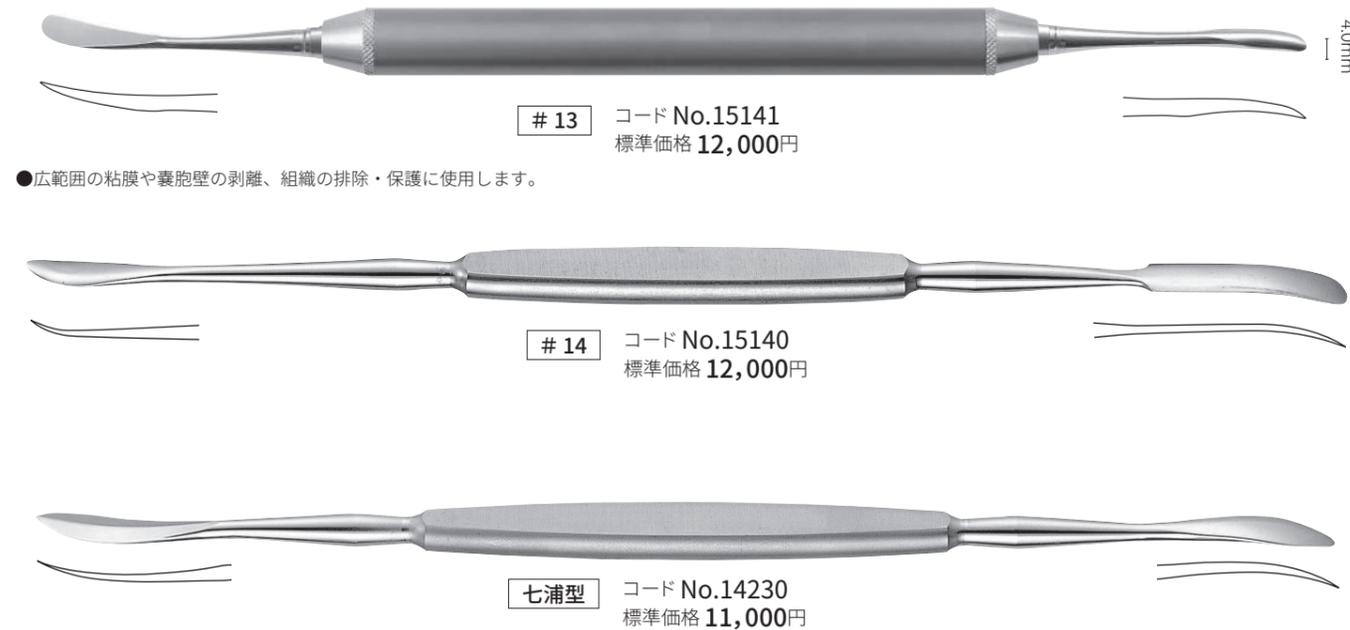


●広範囲の粘膜や嚢胞壁の剥離、組織の排除・保護に使用します。

医療機器届出番号 11B1X1000642D013
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 粘膜剥離子

骨膜剥離子



1/1

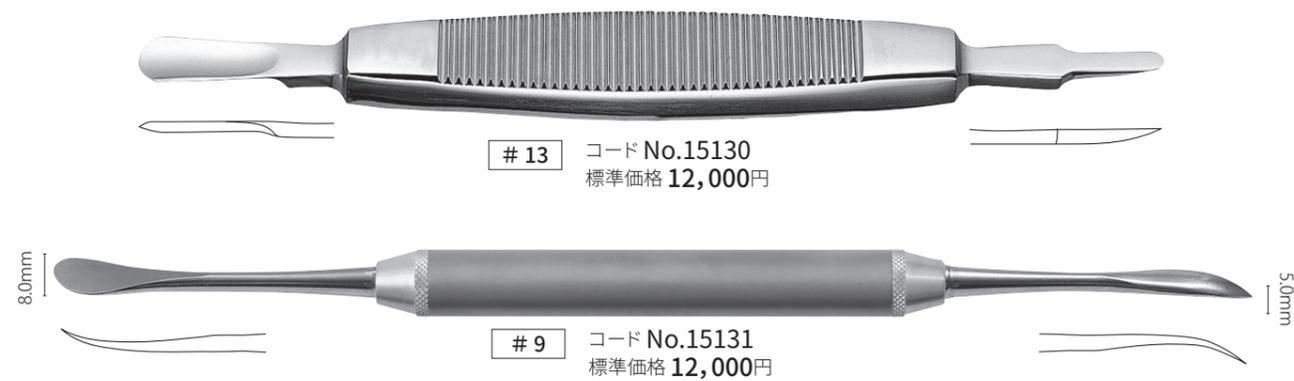


・広範囲の骨膜の剥離や組織の排除・保護に使用する《モルト#9》です。

医療機器届出番号 11B1X1000642D012
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 骨膜剥離子

ディセクター



1/1

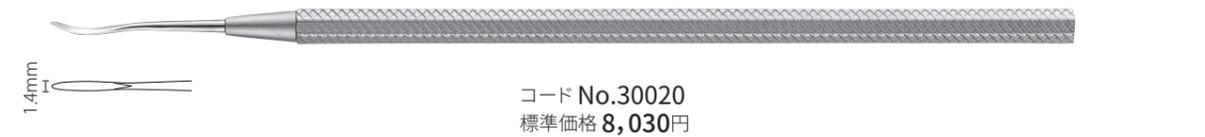

写真提供：中家 麻里 先生
(なかや歯科 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000634D301
一般的名称 歯肉切除メス 販売名 ディセクター


剥離子 MS



1/1



【#2 臨床動画】

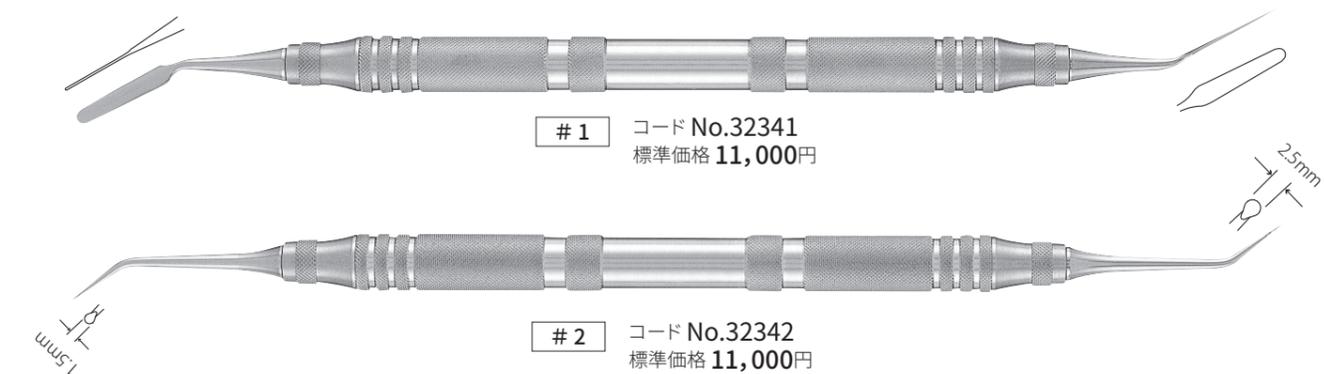

写真提供：石井 宏 先生
(ペンシルバニア大学 非常勤講師
神奈川歯科大学 非常勤講師)



写真提供：安斉 昌照先生
(あんざい歯科医院 理事長)

医療機器届出番号 11B1X1000642D016
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子 MS

骨膜剥離子 トンネリングエレベーター



[臨床動画]

- ・根面被覆術にて骨膜を剥離しながら袋状のスペースを作る際に有効です。
- ・剥離した歯肉の圧排にも使用できます。
- ・小さな先端形状は歯肉を傷つけにくく、歯間乳頭剥離等の細やかな剥離にも有効です。

小さな先端形状

小さな先端形状は歯肉を傷つけにくく、歯間乳頭剥離等の細やかな剥離にも有効です。



写真提供: 瀧野 裕行先生
(タキノ歯科医院 理事長)



写真提供: 奈良 嘉峰先生
(茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)

先端の向きがわかるデザイン

剥離中の先端の向きがわかるよう、目印が付いています。




1

コード No.15161 (レッド)
標準価格 **14,000円**



2.2mm

短い頸部

ポケット内でコントロールがしやすいよう、頸部の長さを短くしています。



写真提供: 瀧野 裕行先生
(タキノ歯科医院 理事長)



写真提供: 奈良 嘉峰先生
(茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)

2

コード No.15162 (グリーン)
標準価格 **14,000円**



2.2mm

安定把持

太めでソフトなシリコンハンドルは安定感があり、手指への疲労を軽減します。



写真提供: 尾野 誠先生
(四条烏丸歯科クリニック)

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2025年10月21日現在のもので、※標準価格に消費税は含まれておりません。

医療機器届出番号 11B1X1000642D012
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 骨膜剥離子