

New Product

October 23st, 2017 YDM

ファイバーカッター タイプ2

標準価格 ¥11,000
 コード No.08071

ファイバーポストを切りたい長さに簡単にカット!



Renewal

穴のサイズが6種類に増えて、対応するファイバーポストのサイズが広がりました。



穴径 (mm)
 Φ 0.8
 Φ 1.05
 Φ 1.25
 Φ 1.5
 Φ 1.65
 Φ 2.1

●透明な【メモリ付ホルダー】でファイバーポストを“測れる”“飛ばさない”




- カットしたい長さをメモリで確認できます。(範囲/5~15mm)
- カットしたポストは、ホルダーの中に入ります。


※全長/130mm

別売品 **ホルダー**
 コード No.90458 標準価格 ¥2,700


●ファイバーポストの外周に沿うようにカットする【ホールカッター式】で、切断面が“毛羽立ちにくい”

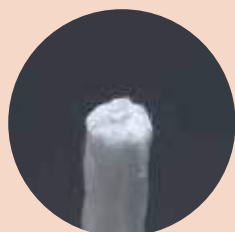


ファイバーカッタータイプ2
 で切断

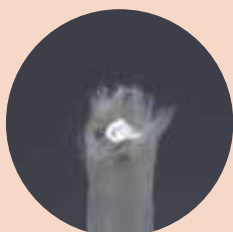

ラウンドバー
 で切断

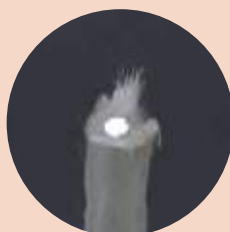

カッピングディスク
 で切断

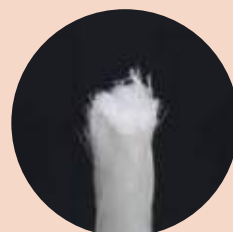

ニッパー
 で切断

New Product



**先端精度・操作性を細部までこだわり誕生した
マイクロインストゥルメント【MDS-180 シリーズ】にラインナップが追加!**

マイクロスコープ下での使用に適した180mmシリーズ。視界に手指が入り込みやすく視野を妨げません。持針器、歯肉バサミについて、ピンセットがラインナップされました。



写真提供：千栄寿先生（せん歯科医院 / CID-club, SJCD）

ピンセット MDS-180 標準価格 各¥68,000

先端精度	保持力	操作性
<ul style="list-style-type: none"> ●先端が点ではなく、面で合わさり微細な組織、縫合糸を確実に保持します。 	<ul style="list-style-type: none"> ●保持部に滑り止めの超硬を溶射しており、高い保持力が得られます。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ハンドル部に開閉距離を一定に保つストッパーがついています。過度な先端の開きと握りこみを防ぎ、スムーズに操作できます。



医療機器届出番号 11B1X100063D023
一般的名称 ピンセット

アライナー用プライヤー 標準価格 各¥24,000


マウスピース型矯正装置【アライナー】を治療状況に合わせて、形状加工できます。

穴あけタイプ

- スムーズな切れ味!
- バリが残らず後処理不要!

切断時、凹側と凸側の全周が同時にあたるのではなく、先端側の1点のみが先にあたります。


切断のきっかけとなる力が1点に集中するため、切れ味が良く、きれいな切り口になります。

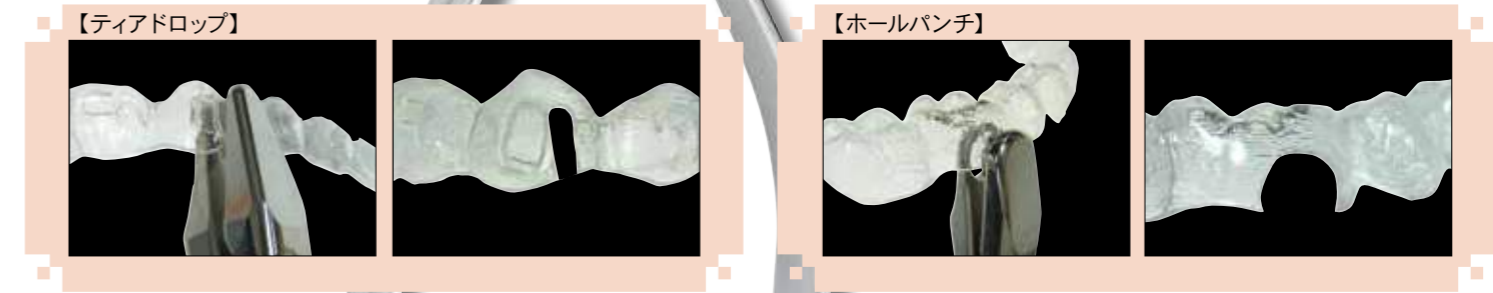

※全長 / 130mm

くぼみ付タイプ

- 先端部の厚みが薄いため切縁近くまで入ります。
- 切縁近くにくぼみを付与することができます。

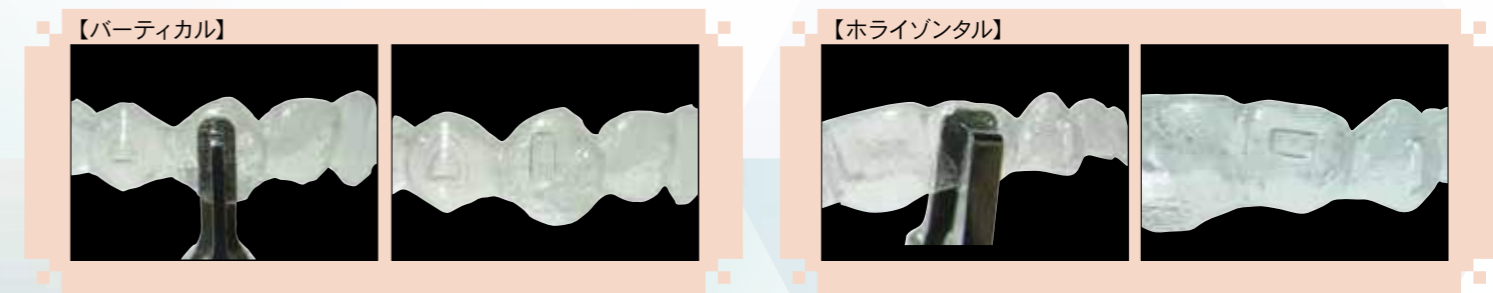

医療機器届出番号 11B1X1000639D148
一般的名称 歯科矯正用プライヤー

New Product

クラウンリムービングプライヤー PRO 上顎前歯用


標準価格 ¥24,000

コード No.21080

Add lineup

試適クラウンを壊さず・傷つけずに撤去!

破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウン
やハイブリッドセラミッククラウン等に有効です。

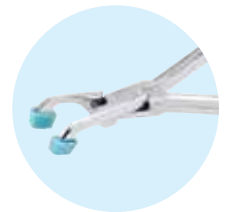

臼歯部には「クラウンリムービング
プライヤー PRO」がオススメです。

ホールグリップ効果

PAT.P

唇側面 クラウンの豊隆部をつかみます。先端部のホール（穴）
が豊隆部を包みこみ、縁のグリップ効果により、
安定してクラウンを把持できます。

[正面観]



[側面観]



[断面観]



※イラストはチップ内で得られている効果のイメージです。

○ ホールグリップ


[先端部ホール]



チップ内面には窪みを
付与し、チップ上からでも
「ホールグリップ効果」
が得られます。

フレキシブルフィット効果

口蓋側面 舌側窩にあわせてチップが変形してフィットします。
さまざまな凹形状に対応。面で当たることで滑りにくく
安定して把持できます。

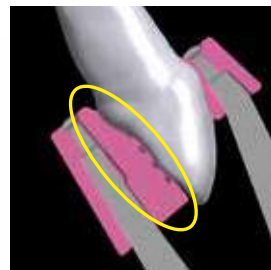

○ フレキシブルフィット



チップ内面に操作方向と逆に効く
滑り止めの溝がついています。

バネによる微調節効果



- バネの反発力により、過度な
ハンドルの握りこみを防ぎます。
- 力のコントロールがしやすく
クラウンの破折を防ぎます。



※全長 / 135mm

※付属品 / UAチップ L(唇側用)P(口蓋側用) 各5入 1セット



写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

単品 UAチップ L(唇側用)P(口蓋側用) 各5入
コード No.90459 標準価格 ¥2,000

※チップ / 材質 Si 耐熱温度 260℃

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2017年10月23日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

医療機器届出番号 11B1X1000642D034
一般的名称 歯科用起子及び剥離子



製造販売元 株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991

<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

<http://www.dental-plaza.com/>