

THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948

ボーンミル ミニバレル


・ミル軟骨の作成を簡単に!

品番 : 86120

標準価格 : 190,000 円

・ブレード穴径φ2.2に改良

→ 軟骨片圧縮時に崩れにくい

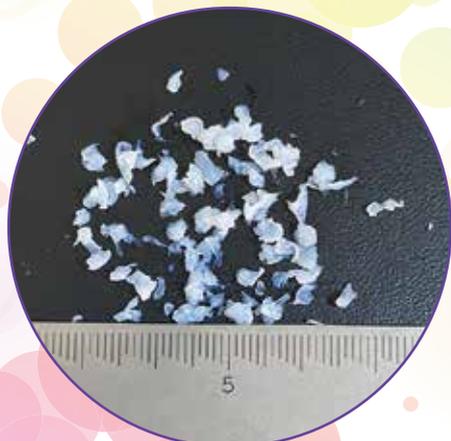

ミル軟骨イメージ
(鳥軟骨使用)
粉碎骨サイズ
0.1mm ~ 5.0mm



プッシャーを押す強さで
ミル軟骨の大きさを調整できます。

カッティングブレード



プッシャー



骨挿入穴



ハンドル



スペーサー



シンプル構造

※サイズ/本体 30 mm × 50 mm
骨挿入穴 10 mm × 10 mm

※材質/ステンレススチール
本体軸受部: PTFE 樹脂 耐熱温度 200℃

医療機器届出番号 11B1X1000658D005
一般的名称 ボーンミル 販売名 ボーンミル ミニバレル



※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載商品の標準価格は、2023年7月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元/ 株式会社YDM
医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先/ 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

FAX03-3827-8991