

NEW

THE BEST PARTNER OF DENTISTS
YDM CORPORATION
SINCE 1948

洗浄滅菌カセット タイプ B

コード No.24-009
標準価格 ¥2,200

ウォッシャーディスインフェクター対応
水流を妨げず、水切れのよいデザイン




- * 収納本数 5 本
- * 付属品 / 片頭用クリップ 3 入
- * カセット材質 / PPS 耐熱温度 271℃
- * 片頭用クリップ材質 / POM 耐熱温度 162℃
- * カラーリング材質 / Si 耐熱温度 260℃
- * 紫外線殺菌不可

システム管理

基本セットや専用器具など処置別にセットしておく、準備や診療において適切な器具選択がスムーズにできます。

浸漬洗浄・超音波洗浄には医療用アルカリ性防錆洗浄液「ゼットワン eco ファインリキッド」をおすすめします。

器具同士の接触によるキズや破損、鋭利な器具によるケガを防ぎます。ウォッシャーディスインフェクター・浸漬洗浄・超音波洗浄に対応します。

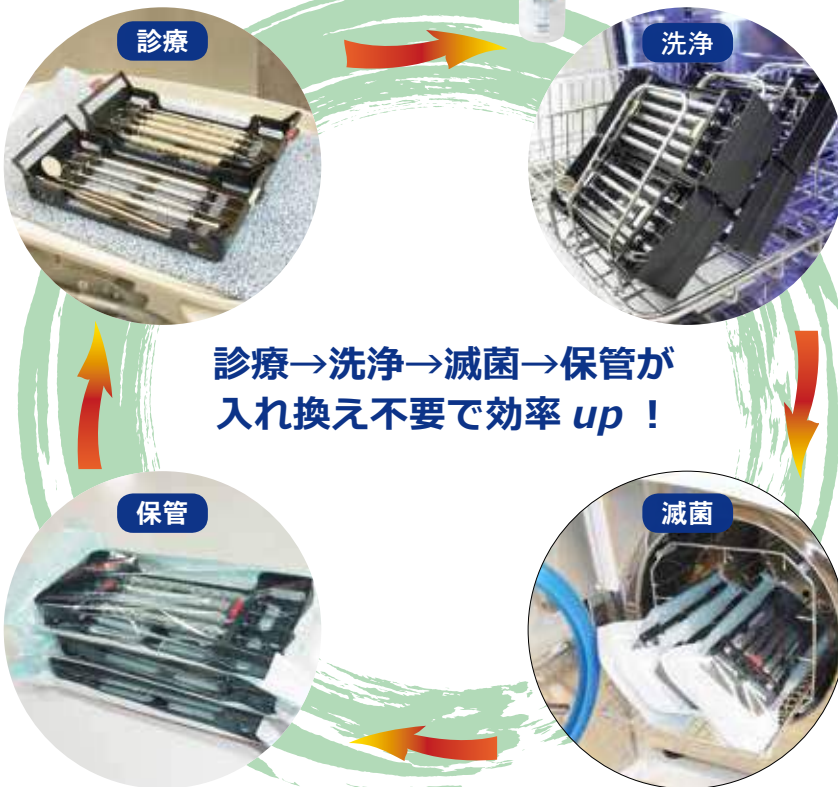

診療→洗浄→滅菌→保管が
入れ換え不要で効率 up !

滅菌終了後はそのまま保管し、診療時にチェアサイドへ。
※紫外線殺菌不可

器具をカセットにセットした状態で洗浄をしているので、滅菌前にセット組みをする手間が省けます。

ウォッシャーディスインフェクター対応！ 水流、蒸気が通りやすいデザインで 効果的な洗浄滅菌



広くあいた孔は、ウォッシャーディスインフェクターの水流が通りやすく、滅菌時の蒸気浸透性もよいため、効果的に洗浄滅菌ができます。



カセット側面に広い孔があるため、器具の先端部までしっかり水流があたり洗浄できます。


コンパクトなサイズで庫内でかさばりません。



カラーリングで識別・管理

収納するインスツルメントの用途などにあわせてカラーリングの色を変えると、識別が明確になり管理がしやすくなります。

例)

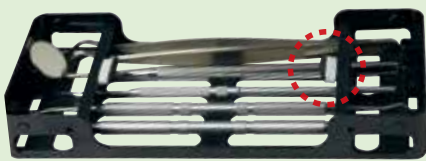

ホワイト
(基本セット)



イエロー
(レジン形成器セット)




レッド
(SRP セット)

■別売品
カラーリング L
標準価格 各¥480 (10 入)

コード No.	品名
13-531	イエロー
13-532	レッド
13-533	ブルー
13-534	グリーン
13-535	ピンク
13-682	ブラック
13-684	ホワイト
13-688	バイオレット

片頭用クリップ

片頭インスツルメントなど短いインスツルメントを収納する際、クリップを装着して収納部の長さを短く調整できます。

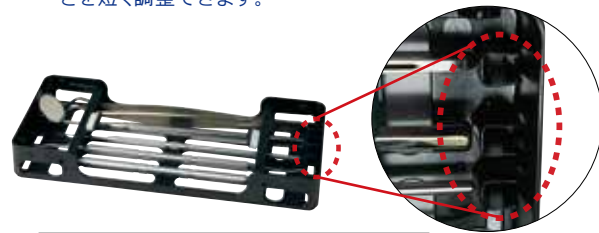

■単品
片頭用クリップ (3 入)
コード No.90-340 標準価格 ¥440

重ねて収納

重ねて収納できるので場所をとりません。



※掲載製品の標準価格は、2016年10月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。



製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/