

歯周用キュレット

Gキュレット est2 Slim

新たなGキュレット「est2 Slim」によるワンランク上の歯周治療



Thinking ahead. Focused on life.


Features

est2は、より繊細なブレードのコントロールを可能にするため、従来のGキュレットのブレードよりも先端を0.5mm短くしています。シャンク、ブレードの異なる4種類のうち、「Slim」タイプはブレードの幅を細くしたことにより歯肉縁下に挿入しやすい特長をもった製品です。

est2詳細は
こちら>>>



<Gキュレット est2 シリーズ ラインナップ>

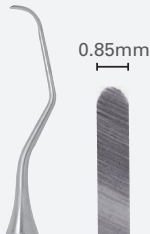種類	Hard	Soft	Slim	Mini
				
用途	シャンク全体が太く作られており、しなりが少なく側方圧を加えやすいため、強固な歯石や多量の歯石除去に適しています。	シャンクに柔軟性があり微細な感覚が手指に伝わりやすい。超音波スケーラー、エアスケーラー使用後の仕上げや細やかなSRPIに適しています。	ブレードの幅が細いため、引き締まった歯肉にも挿入しやすい。SRPだけでなくメインテナンス時にも使用が可能です。	ブレード部が短く第一シャンクが長くなっているため深いポケット内、根分岐部での操作に適しています。歯列不正部や補綴物周辺部への使用も可能です。
ブレードの長さ	標準	標準	標準	短
第一シャンクの長さ	標準	標準	標準	長



シリコン加工により、手にフィットしやすく滑りなくなっています。

【症例】



写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士（THINK DENT 代表）




動画はこちら



写真提供：平 早由加 歯科衛生士（team flat 代表）


Specifications G キュレット est2 カラフィー Slim

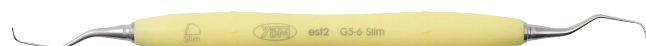


#G5-6
前歯部・小臼歯部 標準価格 5,800円 2010108395-6



#G7-8
臼歯部頬舌面 標準価格 5,800円 2010108397-8

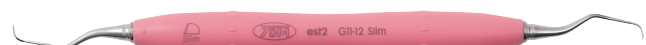

#G11-12
臼歯部近心面 標準価格 5,800円 20101083911-12

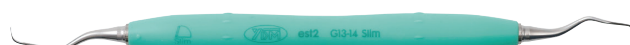

#G13-14
臼歯部遠心面 標準価格 5,800円 20101083913-14

販売名：Gキュレット est 一般的名称：歯周用キュレット 医療機器届出番号：11B1X1000662D108 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。●掲載商品の価格は2025年6月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

●ご使用に際しましては、製品の添付文書および使用方法を必ずお読みください。●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。●製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

製造販売 株式会社 YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042

発売 株式会社 モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161

お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020（フリーコール）

www.dental-plaza.com