

スケーラーest KIRIKO

シクルスケーラー H5/33, H6/H7


さらに向上した切れ味と持続性

より美しくシャープな切れ味

製造工程を改善することで、滑沢な内刃とシャープな外刃のカッティングエッジを実現しました。切れ味を長く持続させることができます。

日本製「YDMオリジナル刃物用ステンレス鋼」を採用

新鋼材に適した条件の温度で熱処理を行い、素材の良さを活かした錆びにくい加工を施しています。

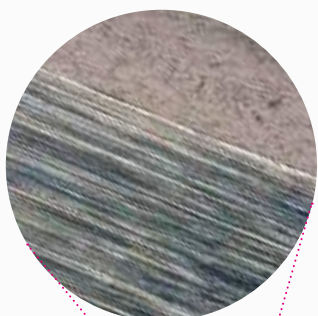

ブレード部
500倍拡大




シクルスケーラー
H5 / 33



シクルスケーラー
H6 / H7

Features

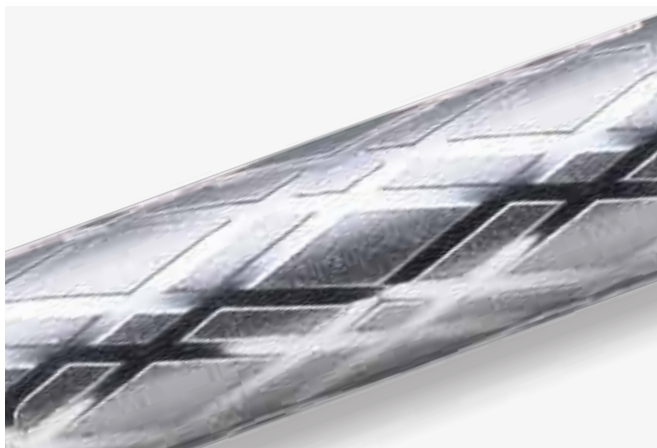

KIRIKOハンドル

日本の伝統品である“江戸切子”をモチーフにし、見た目の美しさだけでなく、“持ちやすく滑りにくい”という特長も兼ね備えています。



ブレードの形状 (H5,H6/H7)

既存品のスケーラーestペア(#1)に比べてブレードの幅と厚み、カーブの形状をストレート気味にすることで、刃先の方向を認識しやすく、より歯間部へ挿入しやすくしています。

Specifications

ハンドル

滑り止め効果が高く、安定したハンドル操作を行うことができます。



ブレード

製造工程を改善し、より滑沢でシャープなカッティングエッジを実現。切れ味を長く持続させながらスケーリングを行うことができます。

#H5/33

直と曲の薄いブレードの組み合わせです。前歯歯頸部や歯間部の歯肉縁上スケーリングに適しています。

#H6/H7

シャンクが左右にわずかに傾いています。前歯部から臼歯部の近遠心隅角部までアプローチできます。

〈ハンドル〉KIRIKO

標準価格 4,800円 #H5/33: 201510755, #H6/H7: 201510756

販売名 スケーラー est 一般的名称 歯科用スケーラー 医療機器届出番号 11B1X1000662D210 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

●掲載商品の標準価格は、2019年11月21日発売予定のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

製造販売 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042
販売 株式会社モリタ 大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06-6380-2525 東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03-3834-6161
お問合せ お客様相談センター T 0800-222-8020(フリーコール)※歯科医療従事者様専用
www.dental-plaza.com

PUB NO. M5769.2.1910.73.000N.SU/ST 208530368