YDM SELECT CAMPAIGN

2020/9/23~2020/10/20

上記期間に限り、特別価格にてご提供いたいします。



インレー・クラウン リムーバー セット

●ポイントを回転フック式で固定するため、使用中に振動で弛みません。

4/5

4/5

(ハンドル、リムーバーポイントS・W各1本)

●ハンドルを片手で握るだけで振動を与えられるので、もう片方の手を先端にそえることができます。

オートマチック クラウン リムーバー セット

- ●振動の強弱の調整が可能です。
- ●上向きでも下向きでも、同様の振動を与えることができます。



●定期的に注油をして下さい。

(ハンドル、リムーバーポイントS・W 各1本)

コード No.21020 標準価格 11,800円

> インレー・クラウンリムーバー ハンドル コード No.21021

標準価格 5,200円

ハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000642D022 一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバーハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000642D023 一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバーセット

インレー・クラウン リムーバー Lセット



4/5

(Lハンドル、リムーバーポイントS・W各1本)

●分銅が重く、1回のストロークでかかる力が大きいため、少ないストローク数で撤去できます。



コード No.21018 標準価格 12,350円

インレー・クラウンリムーバー Lハンドル ⊐- F No.21019 標準価格 5,750円

Uハンドル 医療機器届出番号 1181X1000642D035 - 般的名称 館料用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーパーレハンドル 医療機器屈出番号 1181X1000642D036 - 般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーパーLセット

コンタクトゲージ




4/5

※ 両頭、片頭用共通です。



コードNo.	品名	標準価格	入数
21142	コンタクトゲージ 30(グリーン)	7,700円	5枚入
21136	コンタクトゲージ 50(ブルー)	7,700円	5枚入
21137	コンタクトゲージ 110(イエロー)	7,700円	5枚入
21138	コンタクトゲージ 150(レッド)	7,700円	5枚入

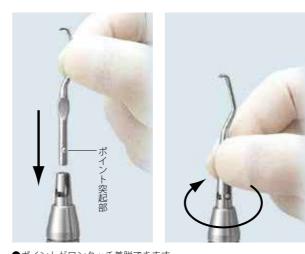

- ●ポイントがワンタッチ着脱できます。
- ●ポイント突起部をタテ溝に沿って挿入し、回転させて固定します。

※オートマチック クラウン リムーバー セット、 インレー・クラウン リムーバー セット、 インレー・クラウンリムーバーLセットの共通になります。



クラウン スプリッティング プライヤー



1/1

●左右均等に広げるので、支台歯に負担がかからず動揺歯にも使用できます。







●幅広の先端が特長のエレベーター。



コード No.18593 標準価格 20,600円




 ①バーでクラウンにスリットを入れます。 ※スリット幅はプライヤーの先端幅0.9mm以上。 ※臼歯部は頬側近心隅角付近に咬合面中央部まで入れます。

②スリットにプライヤーの先端を合わせ、 ハンドルを握ると先端が均等に開き、クラウンが外れます。

医療機器届出番号 11B1X1000642D011 一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 クラウンスプリッティングプライヤー

●ハンドルを握ると先端が開きます。

ペリオプローブ

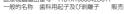

1/1

[残根用 #NM1]

135a 超音波 洗浄







#NM1 ⊐- ⊬ No.16055 標準価格 8,700円 先幅5.0mm

#NM2 ⊐-ドNo.16056 標準価格 8,700円 先幅4.5mm

(日大型)

#NM3 ⊐-ドNo.16057 標準価格 8,700円 先幅4.0mm

#NM2A ⊐- ₹ No.16058 標準価格 8,700円 先幅4.5mm 逆反



1/1

●先端がより薄くなっている ため、歯根膜にスムーズに 挿入できます。

[#NM2 頬側からの使用例]



[#NM2A 舌側からの使用例]



残根用 NM



残根用 #NM1 先幅2.5mm

- ●作業長が通常の#NMエレベーターに比べ、10mm長くなっています。
- ●指をかけるくぼみがあるため、滑りにくく、力がかけやすいです。



智歯用 #NM2 智歯用 #NM2A

コード No.16095 標準価格 9,700円 先幅4.5mm カーブ

コード No.16098 標準価格 9,700円 先幅4.5mm リバース



●狭い歯根膜空隙にもスムーズに挿入できます。 ●張りでた両端のエッジが歯根膜に有効に作用します。

写真提供:津田宏尚先生 (インプラントセンター 津田デンタルクリニック 院長)

※ハンドルに「RT」と刻印が入っています。 残根: Root Tip

※ハンドルに「WT」と刻印が入っています。 智歯: Wisdom Tooth

医療機器届出番号 11B1X1000645D004 一般的名称 歯科用エレベータ 販売名 エレベーター D型





クレンザー鉗子



1/1



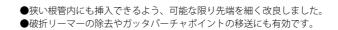


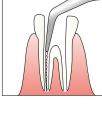

曲 ⊐ードNo.18911 標準価格 **15,800**円 臼歯用

直 コード No.18910 標準価格 15,800円 前歯用



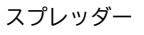



1/1





前歯用



#3 ⊐-FNo.08013 標準価格 3,200円 下顎用


医療機器届出番号 11B1X1000665D301 一般的名称 歯科用根管スプレッダ 販売名 スプレッダー



#1 ⊐-ドNo.11311 標準価格 4,650円



#2 == FNo.11312 標準価格 4,650円

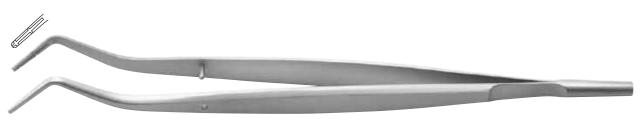

#3 ⊐-FNo.11113 標準価格 5,300円



標準価格 6,050円



ビーチ型 コード No.11117 標準価格 4,400円


医療機器届出番号 11B1X1000636D103 一般的名称 歯科治療用ピンセット 販売名 根管充填ピンセット


網トレー プレミアム




4/5

回転トレー

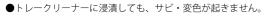

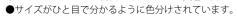


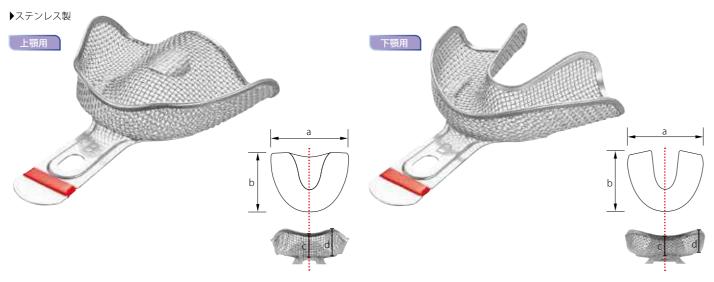




- フィンガーレスト付(上顎用)
- ●保持位置の目安になります。
- ●押し出された印象材が指につくのを防ぎます。

※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260℃

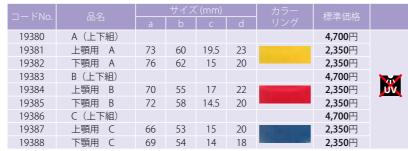


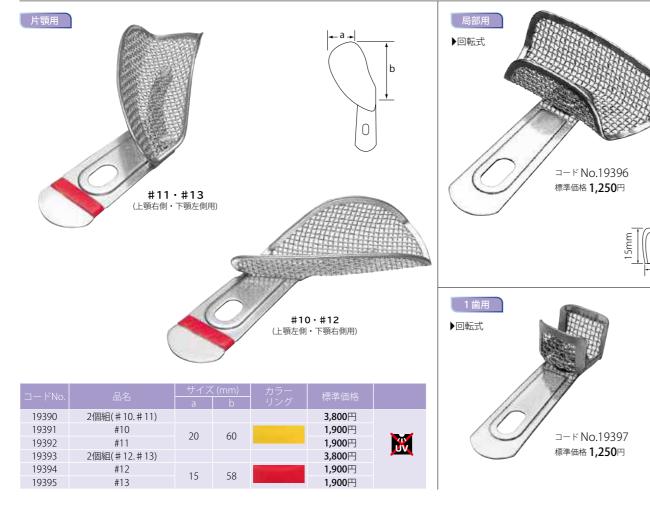


※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000668D105 一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 網トレープレミアム

50mm

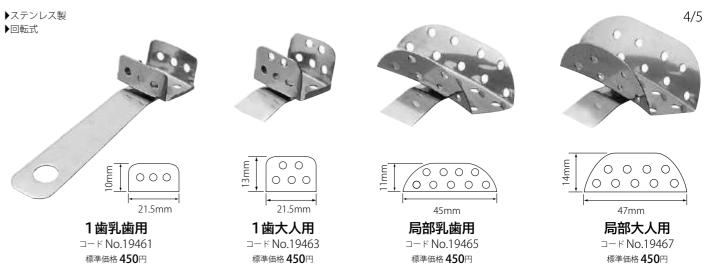



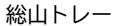


▶ステンレス製

▶回転式





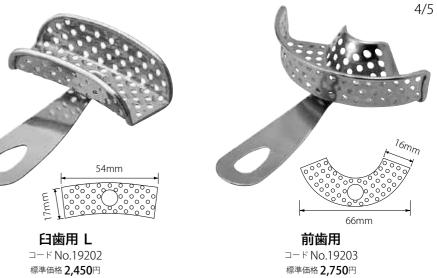

医療機器届出番号 11B1X1000668D103 一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 総山トレー



ジンジパック インスツルメント



1/1

1/2



●キャビネットの一段に、2枚並べて収納できます。



サイズ/W245×D146×H8mm

万能開口器



1/1







小児用 イエロー コード No.14670 標準価格 36,300円 (チップ4入)



単品				
コードNo.	品名	サイズ/a×b	標準価格	
90187	チップ 大人用	21×13mm	3,100円	10入
90189	チップ 小児用 イエロー	17×11mm	3,100円	10入

※耐久咬合圧/1400N ※チップ/材質 Si 耐熱温度260℃ ※非ラテックス製品です。

医療機器届出番号 11B1X1000650D202 一般的名称 歯科用開口器 販売名 万能開口器

●先端部厚みが0.3mmと薄いため、歯肉溝へスムーズに挿入できます。



前歯用 #0.3 ⊐-ドNo.13107 標準価格 4,300円

[通常タイプ]



●下顎前歯部圧排時、先端幅が通常タイプより狭いため、 歯肉に負担をかけずに挿入できます。



臼歯用 #0.3 ⊐-ドNo.13108 標準価格 4,300円



臼歯用 #0.3TC ⊐-ドNo.13110 標準価格 4,300円

●先端の圧排糸挿入部に滑り止めの《超硬溶射》を付与。

●圧排糸が捕まりずらい挿入の始点や、滑りやすいシルク糸などに有効です。

※超硬溶射付 厚さ/0.3mm



厚さ/0.3mm

#**0.3P** ⊐-FNo.13100

標準価格 4,300円 ●《探針と同じ湾曲》で歯面に沿わせやすく、スムーズに操作できます。

- ●《側面へラ》と《内面へラ》の組み合わせで歯肉溝に無理なく圧排糸を滑り込ませるスペースをつくるとともに、圧排糸の浮き上がりを押さえます。
- ●圧排糸の種類や太さを選ばず、全顎に無理なく対応するオールマイティーな仕様です。

考案 / 写真提供:青井良太先生 (SBC(Surgical Basic Course) 主幹)



側面へラ側の先端部で圧排糸の先を挿入 します。



歯肉溝にスペースを作りながら背面で圧 排糸を挿入します。



届きにくい隣接面は内面へラ側を 使用すると到達性がよくなります。

仕 様

94mm
110mm
30°
7.5°
0~7mm (1mm刻み)
20°
前方…10°
側方…10°
カンペル平面





医療機器届出番号 11B1X1000668D009 一般的名称 歯科用咬合器 販売名 スペイシー咬合器 スマート 2

●●● リマウントによる咬合調整方法





セントリックバイトを採得する。





咬合平面板を用いて、上顎義歯からマウントする。その際 に、義歯の粘膜にあたるアンダーカット部は埋めて分離剤 を塗り、石膏を流す。









切歯指導ピンをバイト材の厚み分 (2~3 mm) 上げ、セントリックバイトで下顎の義歯をマウントし、石膏





人工歯の削合は、中心位(前方運動調節ネジを 0mm に 設定)、側方運動(作業側・平衡側)を行い、前方運動 は切端咬合から中心位まで前方運動調節ネジを1mm間 隔で固定してそれぞれの位置で臼歯部が咬合するまで下 顎前歯部の削合を行い、フルバランスド・オクルージョン を与えて完成です。

> ※詳しくは、クインテッセンス出版株式会社から 発売の【保険総義歯のススメ】をご参照ください。

●ワックスが目づまりしにくいデザインです。

●手持ち・卓上のいずれでも使用できます。

●火力の微調整が可能な上、炎は安定しています。



Labo ⊐-F No.22771 標準価格 13,400円

●大きな炎なので、技工等の パワフルな作業に適しています。





Ortho ⊐- F No.22772 標準価格 13,400円

●細い炎なので、矯正治療等の 細かい作業に適しています。

仕 様

重さ/245g(スクリーン板付) ガス量/15g 燃焼時間/Labo 約35分 Ortho 約80分 火炎温度/1,300℃(青火) Odt Orthon Box

●ハンディトーチを寝かせて使用する場合、炎が真上に向かないため、 作業時にワックスが火口に落ちにくい設計になっています。



ガスボンベ

※専用のガスボンべを コード No.22767

ご使用ください。 故障の原因となる 標準価格 **750**円 (130g) 以降いぶ回こる。

医療機器届出番号 11B1X1000669D001 一般的名称 歯科用バーナ 販売名 ハンディトーチ

12

抜糸バサミ



骨鉗子 デリケート







サイズ/110mm

135

1/1



セイフティ コード No.12828 標準価格 9,700円




●先端が細く丸いので、縫合糸の 隙間に挿入しやすくなっています。



標準価格 11,600円 ●柄の部分が長く、臼歯部に届きやすいです。

ロングスリム コード No.12832

医療機器届出番号 11B1X1000635D003 一般的名称 はさみ 販売名 抜糸パサミ

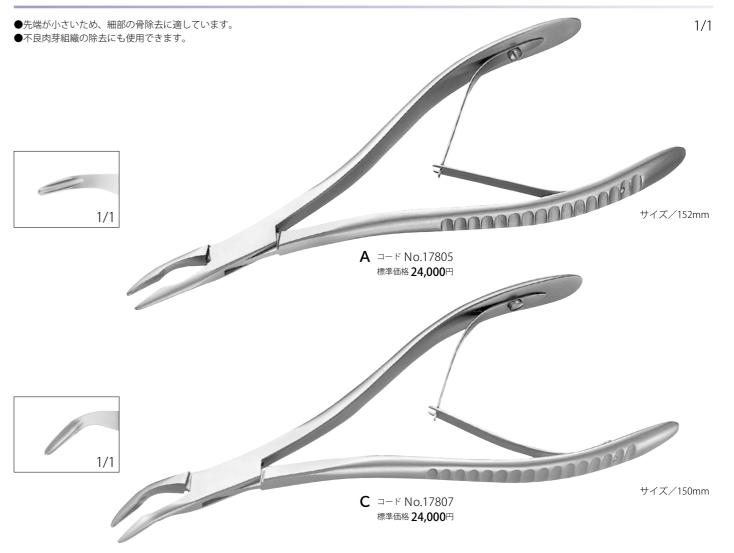

医療機器届出番号 11B1X1000639D403 一般的名称 歯科用骨鉗子 販売名 骨鉗子 デリケート





粘膜剥離子



1/1



標準価格 10,800円


医療機器届出番号 11B1X1000642D013 一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 粘膜剥離子


※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

16

抜歯鉗子/骨鉗子



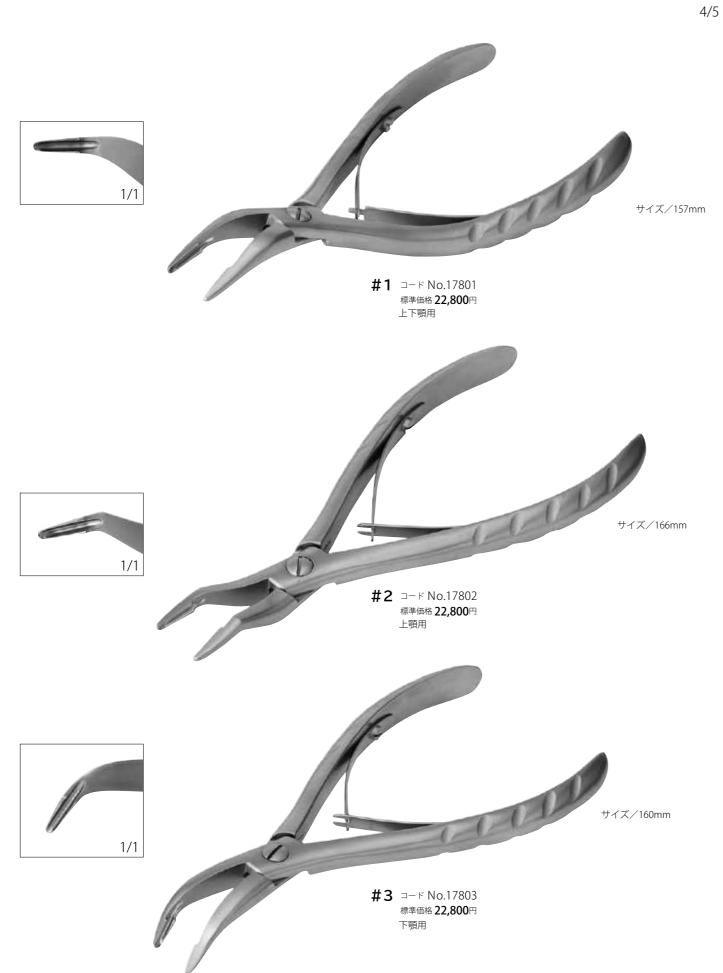

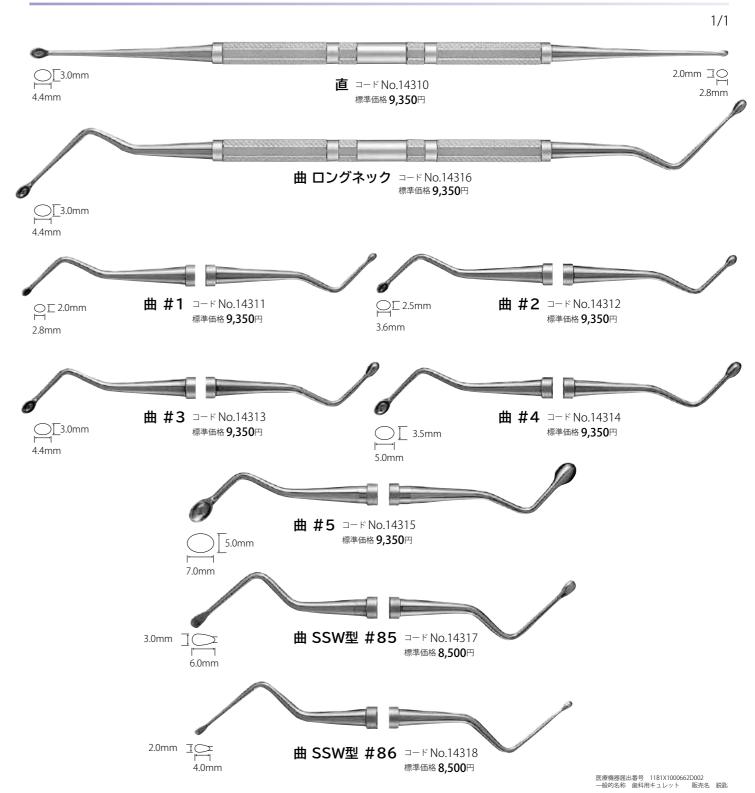



ワンタッチ コットンボックス 綿球用



1/1

4/5



取出し口/W38×D38mm

3連 コード No.13557 標準価格 **16,000**円

●フレームがついているため、コットンを 1枚ずつ取出せます。



●底から補充ができるため、残っている コットンをいったん取出して補充する 手間が省けます。



×H40mm)を裏からセットして使用 します。

●市販の綿球箱(箱サイズ/W35×D35

サイズ/W46×D46×H52mm 取出し口網目/W10×D10mm


L コードNo.13622

標準価格 7,950円

サイズ/ ϕ 103×H82mm

※底蓋はついていません。※製品に綿球・ロールワッテは含まれません。

ワンタッチ コットンボックス2 AL(アルコール) 用








S コード No.13621 標準価格 **6,200**円 サイズ/*φ*80×H57mm



●ハネか消耗した際は、 蝶番を付けを えるだけで簡単に交換ができます。

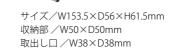






1/1

●深いU字形状で深側部まで圧排できるため、ミラーを使用しない側方部撮影に有効です。









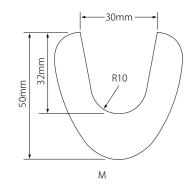

※材質 TPX 耐熱温度160℃

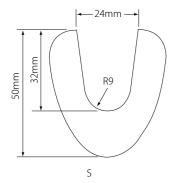

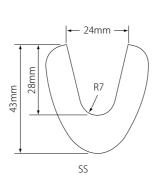






[口角鈎D]

※材質 TPX 耐熱温度160℃

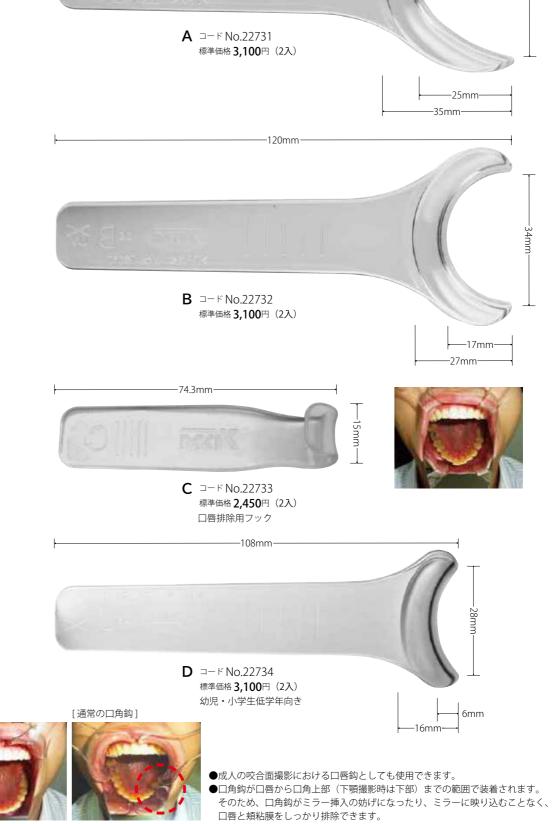

-120mm-

医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般的名称 歯科用閉口器 販売名 口角鉱 医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般的名称 娘科用開口器 販売名 口角鈎



●補助者なしで口角を排除し、視野を確保できます。

●内側のウィングで頬粘膜を圧排し、口腔前庭が拡がります。



●口角を排除すると同時に、内側のウィング●ウィングにより口腔前庭が拡がり、矯正で頬粘膜を圧排します。ブラケットのボンディング、口腔ケア、 レジン充填等の処置がしやすくなります。


写真提供:渋澤龍之先生(渋澤矯正歯科 院長)

- ●補助者なしで口角を排除し視野を確保できます。小児の口腔内撮影、口腔ケア、矯正治療時に便利です。
- ●幼児から小学生低学年向けのサイズです。




●補助者なしで口角を排除し、視野を確保できます。

●ソフトは、素材が柔らかく適度なしなりがあるため、装着時の負担が軽減されます。

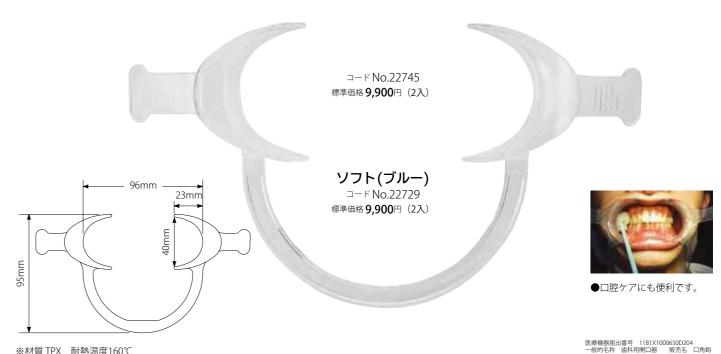

カートリッジシリンジ タイプ2

※材質 TPX 耐熱温度160℃

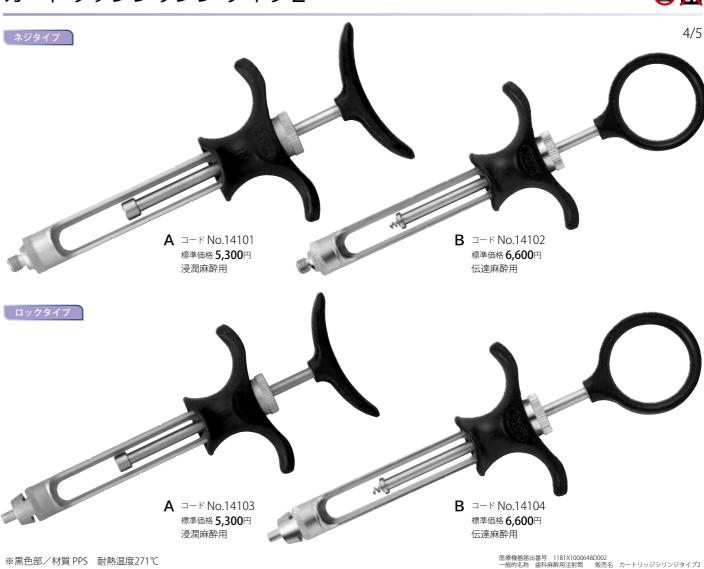

2/3

●バーの種類別・診療形態別・患者様別等に区別して使用できます。


●逆さにしても、バーが落ちない機構です。

●エンジン用リーマー等にも使用可能です。



※収納本数/12本※対応パー/17~38.5mm (ロングカバー装着時/32~52mm)※材質 POM 耐熱温度162℃※製品にバーは含まれません。

標準価格	品名	コードNo.	
1,250円	イエロー	13471	
1,250円	オレンジ	13472	
1,250円	ピンク	13473	
1,250円	ブルー	13474	
1,250円	グリーン	13475	

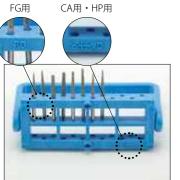

●本体の向きをかえて、FGバー側 CA・HPバー側で使用できます。



●本体力バーの高さは3段階に 変えれます。



●連結して使用できます。



●別売のロングカバーを付けると、 技工用HPバーを収納できます。

別 売 ロングカバー

		標準価格
13481	イエロー	440円
13482	オレンジ	440円
13483	ピンク	440円
13484	ブルー	440円
13485	グリーン	440⊞

セイフティ2

- ●フタを閉じると、逆さにしてもバーが落ちません。
- ●バーをいれたまま、超音波洗浄・滅菌を行うことができます。



FG専用 コード No.13631 標準価格 **3,450**円



CA専用 コード No.13632 標準価格 **3,450**円

サイズ/W40×D25×H29mm (FGショート用 H25mm)



※収納本数/17本(FG・CA用 FG11本・CA6本)※対応パー/21~25mm (FGショート用 17~21mm)※製品にバーは含まれません。




FG・CA用 コード No.13630 標準価格 **3,450**円




FGショート用 コード No.13633 標準価格 **3,450**円

バースタンド

ST型セット (35tg

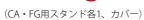



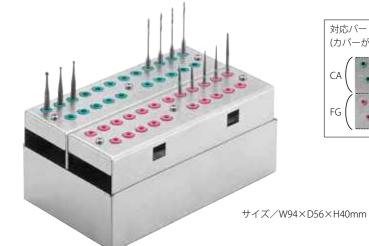

対応バー (カバーができる長さ)	<u> </u>
CA	~31mm
FG	~28mm

コード No.13406 標準価格 **8,700**円

※収納本数/CA用 22本(うち5本はロングバー用)、FG用 22本※緑色・ピンク色部/材質 PP 耐熱温度155℃※製品にバーは含まれません。

単品		
コードNo.	品名	標準価格
13407	CA用(グリーン)	3,300円
13408	FG用(ピンク)	3,300円

24

1/2

撮影ミラー

素材のこだわり、仕上げの違いが、YDM

素材レベルから妥協なくこだわり、キズに強く丈夫な、高硬度ステンレス素材を採用。 歪みのないクリアな反射が確実な撮影をサポートし、撮影時のストレスを軽減させます。

ステンレス・ガラス共に素材を厳選する事で耐久性を追求 ______ ロジウムコーティングタイプは、一般的なステンレスミラーの 2倍以上に相当する約533HVの硬度を実現

素材に合ったコーティングを施す事で 高い反射率を確保 明るく鮮明な撮影が可能

仕上げを撤底する事で ゆがみなくクリアな撮影を

口腔内撮影ミラー ガラス







(滅菌用保護袋付)

- ●多層膜のチタンコーティングにより 入射光の吸収がほとんどなく、明るい写真が撮れます。
- ●ガラス表面のチタンコーティングにより、 キズが付きにくくなっています。
- ●咬合面用は、日本人の幅広いアーチが納まる寸胴なデザインです。
- ●軽量な為、片手での操作がしやすくなっています。

▶表面反射式

- ▶反射率 約98%
- ▶チタンコーティング



咬合面用 L コード No.13282 標準価格 14,300円

咬合面用 M ⊐- F No.13283 標準価格 14,300円

〔表面反射式〕


像が二重映りせず 鮮明です。





頬舌側用 コード No.13281 標準価格 14,300円

※厚さ 3.0mm


※耐熱温度 200℃ ※ミラー面/片面(裏面にはYDMマークが入っています。)

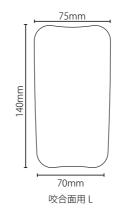

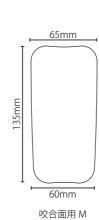

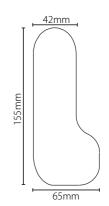

頬舌側用

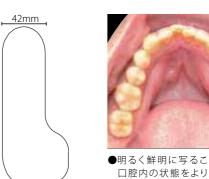

●明るく鮮明に写ることで色調や
●頬舌側用は把持部が広く、安定して 口腔内の状態をより正確に把握 できます。



把持、圧排できるデザインです。

医療機器届出番号 11B1X1000625D021 一般的名称 歯鏡 販売名 口腔内撮影ミラー ガラス

口腔内撮影ミラー



(滅菌用保護袋付)

- ●ステンレス製なので、破損の心配がありません。
- ●1枚に2サイズのミラーがついているので、 サイズ合せがスムーズです。(舌側用は1サイズです。)

▶ステンレス製

※厚さ 1.2mm ※ミラー面/片面


▶表面反射式



像が二重映りせず 鮮明です。



●中間部が屈曲しているため、持ちやすく、 また、持った手が撮影の邪魔に なりません。

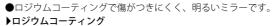


▶ 反射平 約83	%		
コードNo.	品名	標準価格	
13578	咬合面用 ワイド LL	24,900円	
13576	咬合面用 ワイド L	15,800円	
13577	咬合面用 ワイドS	15,800円	-
13571	咬合面用	15,800円	オススメ
13572	舌側用	15,800円	
13573	頬側用	15,800円	
13570	3 枚組 (咬合面用・舌側用・頬側用)	47,400円	

●使いやすさはそのままで、エコノミータイプです。

▶反射率 約65%

コードNo.	品名	標準価格
13266	ST 咬合面用 ワイド LL	10,800円
13264	ST 咬合面用 ワイド L	9,700円
13265	ST 咬合面用 ワイド S	9,700円
13261	ST 咬合面用	9,700円
13262	ST 舌側用	9,700円
13263	ST 頬側用	9,700円

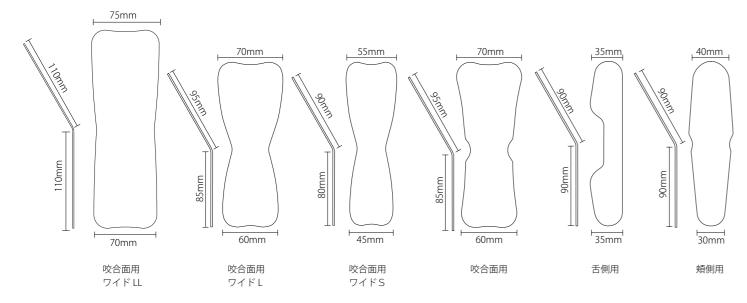

医療機器届出番号 11B1X1000625D004 一般的名称 歯鏡 販売名 口腔内撮影ミラー ST 医療機器届出番号 11B1X1000625D014 一般的名称 歯鏡 販売名 口腔内撮影ミラーST

高硬度ステンレス鋼を採用

●一般的なステンレス鋼に比べて硬度が高い為、傷がつきにくく、 ゆがみの少ないミラーです。 ※お取扱い方法によっては傷がつきますのでご注意ください。

【YDM 口腔内撮影ミラー】 -高硬度ステンレス鋼 + ロジウムコーティング 約 533HV

【一般的なロジウムコーティングステンレス製ミラー】 一般的なステンレス鋼+ ロジウムコーティング

【YDM 口腔内撮影ミラー ST・SE】 高硬度ステンレス鋼


【一般的なステンレス製ミラー】 一般的なステンレス鋼

口腔内撮影ミラー SE




(滅菌用保護袋付)

- ●ステンレス製なので、破損の心配がありません。
- ●表面反射式のため、像が二重映りせず、鮮明です。
- ▶ステンレス製
- ▶反射率 約65%
- ▶表面反射式

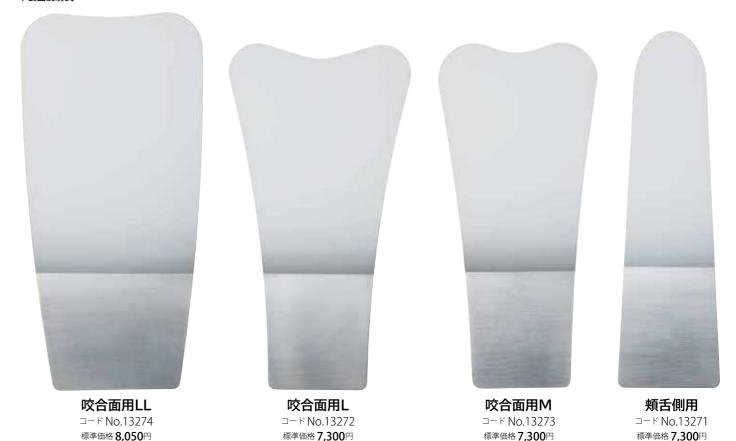

※厚さ 1.2mm ※ミラー面/片面

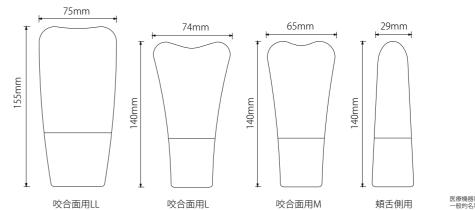

標準価格表

掲載 ページ	YDM コード	モリタ コード	品名	標準価格
2	21018	151695	インレー・クラウンリムーバーLセット	¥12,350
2	21019	151696	インレー・クラウンリムーバーレハンドル	¥5,750
2	21020	101014	インレー・クラウンリムーバーセット	¥11,800
2	21021	101010	インレー・クラウンリムーバーハンドル	¥5,200
2	21136	101967 BL	コンタクトゲージ 50(ブルー)5枚入	¥7,700
2	21137	101967 Y	コンタクトゲージ 110(イエロー)5枚入	¥7,700
2	21138	101967 R	コンタクトゲージ 150(レッド)5枚入	¥7,700
2	21142	151512	コンタクトゲージ 30(グリーン)5枚入	¥7,700
3	21010	101006	オートマチッククラウンリムーバーセット	¥40,000
3	21012	101007	リムーバー ポイント W	¥3,300
3	21013	101008	リムーバー ポイントS	¥3,300
3	21014	101039	リムーバー ポイント クサビ型	¥3,300
3	21015	101040	リムーバー ポイント 頬側用	¥3,300
4	18593	101300	クラウンスプリッティングプライヤー	¥20,600
4	09554	101628	ペリオプローブ #4	¥4,400
4	09555	101619	ペリオプローブ #5	¥4,400
5	16055	101239 NM1	エレベーター D型 #NM1	¥8,700
5	16056	101239 NM2	エレベーター D型 #NM2	¥8,700
5	16057	101239 NM3	エレベーター D型 #NM3	¥8,700
5	16058	101239 NM2A	エレベーター D型 #NM2A	¥8,700
5	16095	101230 NM2	エレベーター D型 智歯用 #NM2	¥9,700
5	16098	101230 NM2A	エレベーター D型 智歯用 #NM2A	¥9,700
5	16554	151114	エレベーターD型 残根用 #NM1	¥8,700
6	11113	151277	根管充填ピンセット #3	¥5,300
6	11117	101102	根管充填ピンセット ビーチ型	¥4,400
6	11311	101091 1	根管充填ピンセット #1	¥4,650
6	11312	101091 2	根管充填ピンセット #2	¥4,650
6	11316	101092	根管充填ピンセット ロック付	¥6,050
7	18910	101459 S	クレンザー鉗子 直	¥15,800
7	18911	101459 C	クレンザー鉗子 曲	¥15,800
7	08001	101199 0.25\$	スプレッダー #0.25S	¥3,850
7	08002	101199 0.45	スプレッダー #0.4S	¥3,850
7	08003	101199 0.65	スプレッダー #0.6S	¥3,850
7	08004	101199 0.25L	スプレッダー #0.25L	¥3,850
7	08005	101199 0.4L	スプレッダー #0.4L	¥3,850
7	08011	151240 1	スプレッダー #1	¥3,200
7	08012	151240 2	スプレッダー #2	¥3,200
7	08013	151240 3	スプレッダー #3	¥3,200
8	19380	101520 A	網トレー プレミアム A(上下組)	¥4,700
8	19381	101521 UA	網トレー プレミアム 上顎用 A	¥2,350
8	19382	101521 LA	網トレー プレミアム 下顎用 A	¥2,350
8	19383	101520 B	網トレー プレミアム B(上下組)	¥4,700
8	19384	101521 UB	網トレー プレミアム 上顎用 B	¥2,350
8	19385	101521 LB	網トレー プレミアム 下顎用 B	¥2,350
8	19386	101520 C	網トレー プレミアム C(上下組)	¥4,700
8	19387	101521 UC	網トレー プレミアム 上顎用 C	¥2,350
8	19388	101521 LC	網トレー プレミアム 下顎用 C	¥2,350
8	19390	101500	網トレープレミアム片顎用2個組(#10.11)	¥3,800
8	19391	101501 10	網トレー プレミアム 片顎用#10	¥1,900
8	19392	101501 11	網トレー プレミアム 片顎用#11	¥1,900
8	19393	101502	網トレープレミアム片顎用2個組(#12.13)	¥3,800
8	19394	101503 12	網トレー プレミアム 片顎用#12	¥1,900

掲載ページ	YDM コード	モリタ コード	品名	標準 価格
8	19395	101503 13	網トレー プレミアム 片顎用#13	¥1,900
8	19396	101504	網トレー プレミアム 局部用	¥1,250
8	19397	101505	網トレー プレミアム 1歯用	¥1,250
9	19201	101527	総山トレー臼歯用S	¥2,450
9	19202	101528	総山トレー臼歯用L	¥2,450
9	19203	101529	総山トレー 前歯用	¥2,750
9	19461	101530	回転トレー 1歯乳歯用	¥450
9	19463	101531	回転トレー 1歯大人用	¥450
9	19465	101532	回転トレー 局部乳歯用	¥450
9	19467	101533	回転トレー局部大人用	¥450
10	13410	151437	ステンレストレーS	¥1,200
10	13413	151433	ステンレストレー M	¥1,500
10	14666	151306	万能開口器 大人用	¥36,300
10	14670	151328	万能開口器 小児用 イエロー	¥36,300
10	90187	151308 L	万能開口器 チップ 大人用 10入	¥3,100
10	90189	151329	万能開口器 チップ 小児用 イエロー10入	¥3,100
11	13100	151127	ジンジパックインスツルメント #0.3P	¥4,300
11	13107	101126	ジンジパックインスツルメント 前歯用#0.3	¥4,300
11	13108	101127	ジンジパックインスツルメント 臼歯用#0.3	¥4,300
11	13110	151128	ジンジパックインスツルメント 臼歯用#0.3TC	¥4,300
12	19662	151126	スペイシー咬合器 スマート2	¥41,200
13	22767	101771	ハンディトーチ用ガスボンベ	¥750
13	22771	101773	ハンディトーチ Labo	¥13,400
13	22772	101774	ハンディトーチ Ortho	¥13,400
14	07160	101421	彫刻刀エバン	¥3,200
14	12828	101256	抜糸バサミ セイフティ	¥9,700
14	12831	101258	抜糸バサミ スリム	¥8,500
14	12832	151135	抜糸バサミ ロングスリム	¥11,600
15	15131	151133	骨膜剥離子#9	¥10,300
15	15141	151134	粘膜剥離子 #13	¥10,800
15	17805	151431	骨鉗子 デリケート A	¥24,000
15	17807	151429	骨鉗子 デリケート C	¥24,000
16	17801	101229 1	骨鉗子 平川型 #1	¥22,800
16	17802	1012292	骨鉗子 平川型 #2	¥22,800
16	17803	1012293	骨鉗子 平川型 #3	¥22,800
17	14310	151596 S	鋭匙直	¥9,350
17	14311	151596 C1	鋭匙 曲 #1	¥9,350
17	14312	151596 C2	鋭匙 曲 #2	¥9,350
17	14313	151596 C3	鋭匙 曲 #3	¥9,350
17	14314	151596 C4	鋭匙 曲 #4	¥9,350
17	14315	151596 C5	鋭匙 曲 #5	¥9,350
17	14316	151597	鋭匙 曲 ロングネック	¥9,350
17	14317	151598 85	鋭匙 曲 SSW型 #85	¥8,500
17	14318	151598 86	鋭匙曲 SSW型 #86	¥8,500
18	13555	151456	ワンタッチコットンボックス 2連	¥12,000
18	13557	151459	ワンタッチコットンボックス 3連	¥16,000
19	13559	151460	ワンタッチコットンボックス 綿球用	¥8,600
19	13621	151467	ワンタッチコットンボックス2 AL用 S	¥6,200
19	13622	151468	ワンタッチコットンボックス2 AL用 L	¥7,950
20	22739	101915 M	口角鈎 ピジョン M	¥5,850
20	22740	101915 S	口角鈎 ピジョン S	¥5,850
20	22741	101915 SS	口角鈎 ピジョン SS	¥5,850

掲載ページ	YDM コード	モリタ コード	品 名	標準 価格
21	22731	101911 AL	口角鈎 A 2入	¥3,100
21	22732	101911 BS	口角鈎 B 2入	¥3,100
21	22733	101917	口角鈎 C 2入	¥2,450
21	22734	101911 D	口角鈎 D 2入	¥3,100
22	22727	151118	口角鈎アングルワイダーワイド (ピンク) 2入	¥9,900
22	22728	151119	口角鈎アングルワイダー小児用 (ピンク) 2入	¥8,000
23	14101	101116	カートリッジシリンジタイプ2 ネジタイプ A	¥5,300
23	14102	101117	カートリッジシリンジタイプ2 ネジタイプ B	¥6,600
23	14103	101118	カートリッジシリンジタイプ2 ロックタイプ A	¥5,300
23	14104	101119	カートリッジシリンジタイプ2 ロックタイプ B	¥6,600
23	22729	151397	口角鈎アングルワイダーソフト (ブルー) 2入	¥9,900
23	22745	151395	口角鈎 アングルワイダー 2入	¥9,900
24	13471	151108 Y	バーガードイエロー	¥1,250
24	13472	151108 O	バーガードオレンジ	¥1,250
24	13473	151108 P	バーガード ピンク	¥1,250
24	13474	151108 BL	バーガード ブルー	¥1,250
24	13475	151108 G	バーガード グリーン	¥1,250
24	13481	151109 Y	バーガード用ロングカバー イエロー	¥440
24	13482	151109 O	バーガード用ロングカバー オレンジ	¥440
24	13483	151109 P	バーガード用ロングカバー ピンク	¥440
24	13484	151109 BL	バーガード用ロングカバー ブルー	¥440
24	13485	151109 G	バーガード用ロングカバー グリーン	¥440
25	13630	151017 FGCA	バースタンド セイフティ2 FG・CA用	¥3,450
25	13631	151017 FG	バースタンド セイフティ2 FG専用	¥3,450
25	13632	151017 CA	バースタンド セイフティ2 CA専用	¥3,450
25	13633	151017 FGS	バースタンド セイフティ2 FGショート用	¥3,450
25	13406	151088	バースタンド ST型セット	¥8,700
25	13407	151089 CA	バースタンド ST型 CA用	¥3,300
25	13408	151089 FG	バースタンド ST型 FG用	¥3,300
27	13281	151490	口腔内撮影ミラー ガラス 頬舌側用	¥14,300
27	13282	151491	口腔内撮影ミラー ガラス 咬合面用 L	¥14,300
27	13283	151492	口腔内撮影ミラー ガラス 咬合面用 M	¥14,300
28	13261	101073	口腔内撮影ミラー ST 咬合面用	¥9,700
28	13262	101074	口腔内撮影ミラー ST 舌側用	¥9,700
28		101075	口腔内撮影ミラー ST 頬側用	¥9,700
28		101076	口腔内撮影ミラー ST 咬合面用ワイドL	¥9,700
28		101077	口腔内撮影ミラー ST 咬合面用ワイドS	¥9,700
28		101067	口腔内撮影ミラー ST 咬合面用ワイドLL	¥10,800
28		101986	口腔内撮影ミラー 3枚組	¥47,400
28	13571	101987	口腔内撮影ミラー咬合面用	¥15,800
28	13572	101988	口腔内撮影ミラー舌側用	¥15,800
28	13573	101989	口腔内撮影ミラー 頬側用	¥15,800
28		101999	口腔内撮影ミラー 咬合面用ワイドL	¥15,800
28		101976	口腔内撮影ミラー咬合面用ワイドS	¥15,800
28		101066	口腔内撮影ミラー咬合面用ワイドLL	¥24,900
29	13271	101148	口腔内撮影ミラー SE 頬舌側用	¥7,300
29	13272	101149	口腔内撮影ミラー SE 咬合面用 L	¥7,300
29	13273	101150	口腔内撮影ミラー SE 咬合面用 M	¥7,300
	13274	101069	口腔内撮影ミラー SE 咬合面用 LL	¥8,050
29 32	13538	101160	ゼットワンeco ファインリキッド	¥5,300

キャンペーン期間中

(2020年9月23日~2020年10月20日)

特別価格にてご提供いたします

詳細はお出入りの 材料店様に お問い合わせください

材料店名

ゼットワン eco ファインリキッド





コード No 13538 標準価格 5,300円

[高い洗浄力]

●アルカリpHの特性により、タンパク質・脂肪分に高い洗浄効果が得られます。 特殊ブレンド成分により、あらゆる金属にも対応します。

[安定した洗浄力]

●希釈水の温度による洗浄力の減弱が少なく、安定しています。

[汚れの再付着防止]

●高分子のコロイド粒子が落とした汚れをガードして、再付着を防ぎます。

防錆力

●成分中の金属イオン封鎖剤により、高い防錆効果が得られます。

経済的でコンパクト

- ●標準希釈200倍の高希釈タイプで経済的です。
- ●片手で計量できる便利なボトルです。

環境にやさしい

松ヤニから抽出したオイルにより精製された、植物由来の洗浄液です。 生分解率が97.5%と高いため、洗浄後は周辺の環境を汚染せずに排水できます。

[形状・主成分]

- ■形状:濃縮液500ml(200倍希釈により洗浄液100L分)
- ■主成分:植物由来原材料のアルカリ性界面活性剤、防錆剤配合
 - ・アニオン界面活性剤・ノニオン界面活性剤
 - ・無機ビルダー(ケイ酸塩、炭酸塩)
 - ・有機ビルダー(カルボン酸、他)

🚺 製品使用上の注意

使用上の注意

- ●製品の使用前、使用後に外表面・関節等の異常を確認して下さい。ヒビ、 キズ、破損、摩耗、大きな腐食等が見られた場合は使用しないで下さい。
- ●製品に付着した汚れはすみやかに除去して下さい。化学薬品・血液等が サビの原因や性能低下につながります。
- ●製品の表面に彫刻を施したり、傷をつけないで下さい。サビの発生や破 損の原因となります。
- 製品は直接火炎にさらさないで下さい。用途によって加熱が必要な場合 は、短時間の過熱にとどめて下さい。 金属が溶けだしたり、変形する恐れがあります。

使用方法・用途について

器具はそれぞれの用途にあわせてつくられているため、使用用途は限定さ れています。

本来の用途以外で使用されますと、器具が破損・変形し事故にもつながる 恐れがあります。形状が類似しているからという理由で他の目的に使用しま すと、器具の強度の限界を超える力が加わり、曲がったり折れたりする可能 性がありますのでお避け下さい。

正しい洗浄、滅菌・消毒方法で処理して下さい

器具は、その形状や素材、用途によってそれぞれ適した洗浄、滅菌・消毒方法が あり、誤った処理は破損等の原因となります。器具をより長く安全にお使いいた だけるよう、添付文書や取扱説明書に記載されている洗浄、滅菌・消毒方法にて 処理を行うようにして下さい。

器具の修理、メインテナンスについて

当社の鋼製器具類は基本的には修理可能ですが、著しい破損、摩耗、修 理をすることで原型を留められない場合等、修理不可能な場合もござ います。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお他社製品に つきましては修理致しかねますのでご了承下さい。

製品の廃棄について

- ●廃棄を行う場合(非感染性医療廃棄物に限る)は、洗浄、滅菌・消毒等の 適切な処置を施した上で廃棄して下さい。
- ●医療廃棄物の廃棄は、取扱い作業者の危険性を防止するため、堅牢な収 納容器に入れて廃棄して下さい。 特に鋭利な器具の廃棄は、十分注意して下さい。
- ●感染性医療廃棄物は、「廃棄物の処理法に基づく感染性廃棄物処理マ ニュアル」に従って、適切に処理して下さい。

▶ 添付文書について

YDM製品ごとの洗浄、滅菌・消毒に関しては、添付文書に記載されてい ます。お入り用の方は、下記までご請求下さい。

> 〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 株式会社YDM品質保証 TEL 0493-24-3388

発売株式会社モリタ