


NEW PRODUCT

JUL 21st, 2026 YDM




CODE No.15162
GREEN

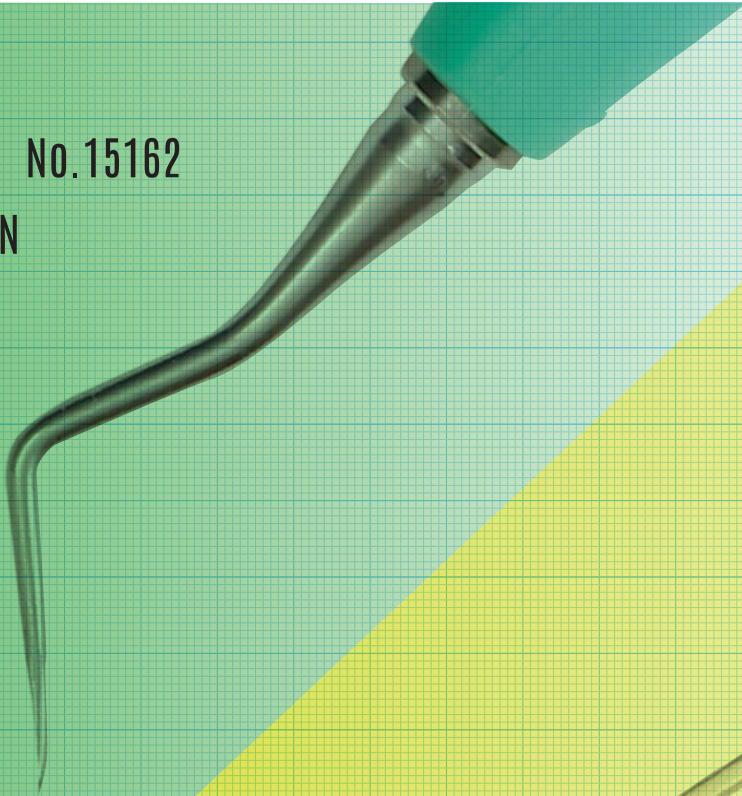


NEW

CODE No.15163
LIME GREEN

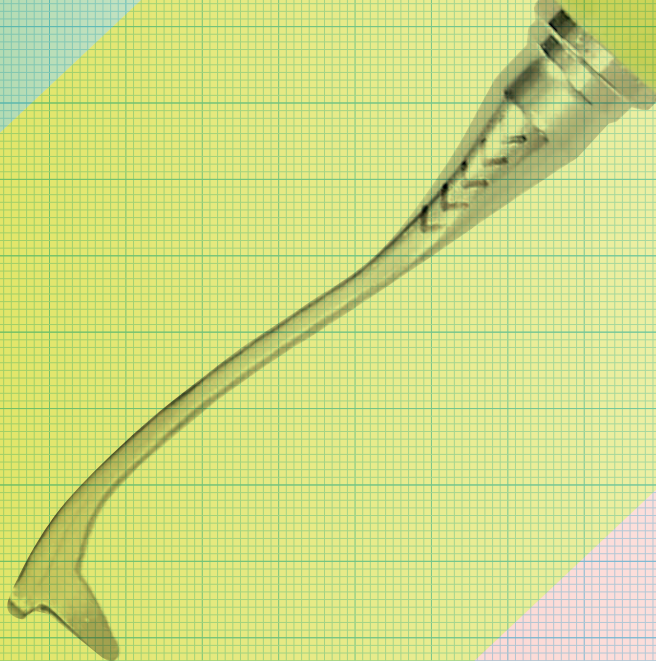

CODE No.15161
RED

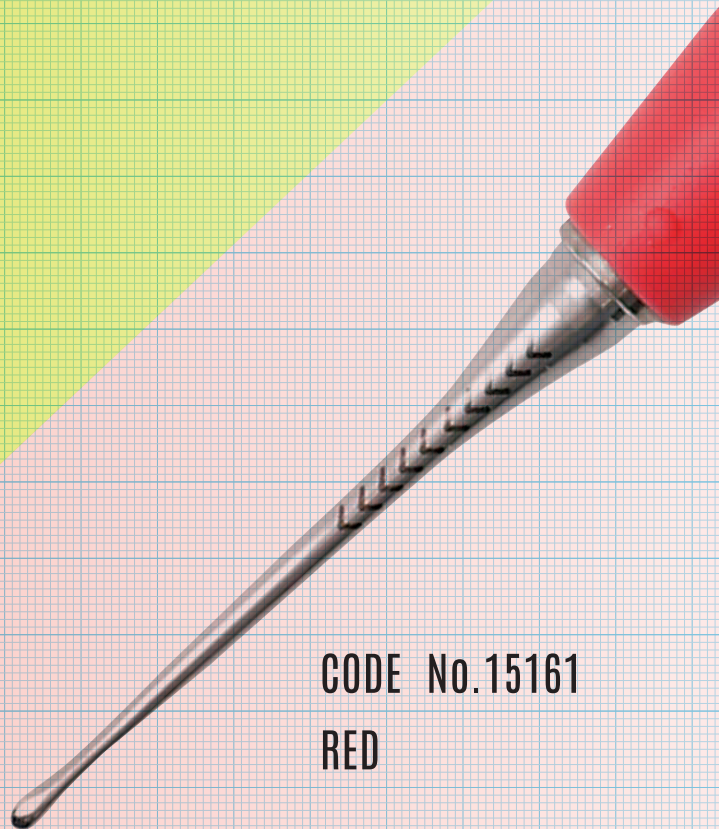

NEW PRODUCT

骨膜剥離子 トンネリングエレベーター

骨膜剥離子 トンネリングエレベーター

- ・T字型の先端形状が、舌側歯肉への穿孔リスクを低減するストッパー機能となります。
- ・先端がハンドル中心軸の直線上に設計されているため、力が伝わりやすく操作性に優れています。
- ・先端内側にカーブがあるため、骨面を感じながら剥離が可能です。
- ・先端、側面の2方向に刃付けを施しているため、どちらの方向にも剥離が可能です。




[臨床動画]



開発協力
尾野 誠先生
四条烏丸歯科クリニック


T字型の先端ストッパー

T字型の先端形状が、舌側歯肉への穿孔リスクを低減するストッパー機能となります。

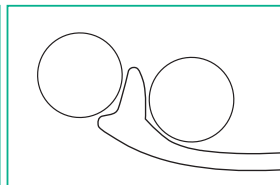


先端の向きがわかるデザイン

剥離中の先端の向きがわかるよう、目印が付いています。

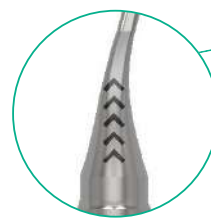

骨面に沿う先端カーブ

先端内側にカーブがあるため、骨面を感じながら剥離が可能です。

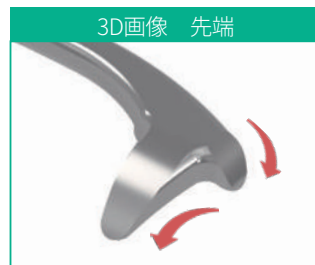

2方向の刃付け

先端、側面の2方向に刃付けを施しているため、どちらの方向にも剥離が可能です。



先端がハンドル中心軸、直線上の設計

先端がハンドル中心軸の直線上に設計されているため、力が伝わりやすく操作性に優れています。

NEW

3 (パピラエレベーター)
コード No.15163 (ライムグリーン)
標準価格 18,000円



写真提供:尾野 誠先生
(四条烏丸歯科クリニック)

- ・根面被覆術にて骨膜を剥離しながら袋状のスペースを作る際に有効です。
- ・剥離した歯肉の圧排にも使用できます。
- ・小さな先端形状は歯肉を傷つけにくく、歯間乳頭剥離等の細やかな剥離にも有効です。



[臨床動画]



開発協力
奈良 嘉峰先生
茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック

小さな先端形状

小さな先端形状は歯肉を傷つけにくく、歯間乳頭剥離等の細やかな剥離にも有効です。





写真提供:瀧野 裕行先生
(タキノ歯科医院 理事長)



写真提供:奈良 嘉峰先生
(茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)



1
コード No.15161 (レッド)
標準価格 14,000円

2
コード No.15162 (グリーン)
標準価格 14,000円

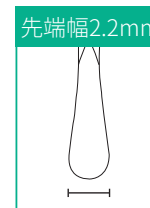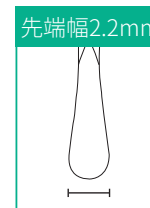

先端の向きがわかるデザイン

剥離中の先端の向きがわかるよう、目印が付いています。

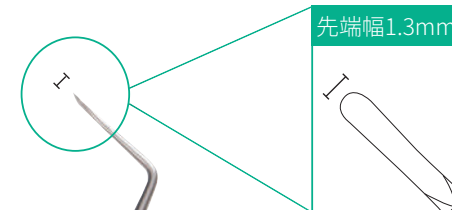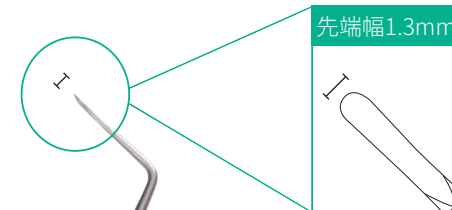

短い頸部

ポケット内でコントロールがしやすいよう、頸部の長さを短くしています。



写真提供:瀧野 裕行先生
(タキノ歯科医院 理事長)





写真提供:奈良 嘉峰先生
(茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)



写真提供:尾野 誠先生
(四条烏丸歯科クリニック)

安定把持

太めでソフトなシリコンハンドルは安定感があり、手指への疲労を軽減します。

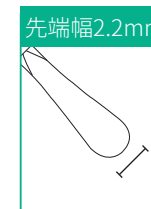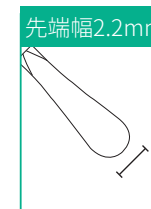

剥離子オーダーシステム

- ハンドルと先端部を自由に組合わせてオーダーできます。
- 術者の手法に合った組合せて、治療がよりスムーズになります。
- ハンドルは3種類、先端部は30種類から選べます。

ハンドル



NEW カラフィー

コード No.15000
標準価格 14,000円

※長さ/110mm
※径/φ10.0~12.0mm
※材質/Si 耐熱温度260℃



丸柄

コード No.15008
標準価格 12,000円

※長さ/100mm
※径/φ9.5mm




丸柄 Short

コード No.15009
標準価格 12,000円

※長さ/80mm
※径/φ9.5mm


医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

ご注文方法

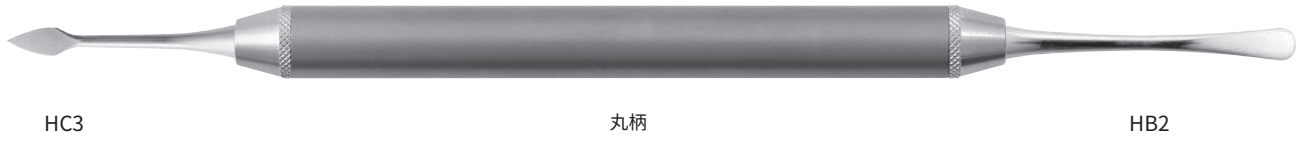


[組合わせ例]
ハンドル：丸柄
先端部：HC3、HB2 をご指定の場合
コード No.15008 「剥離子 オーダーシステム 丸柄 + HC3 + HB2」


[骨膜/粘膜]

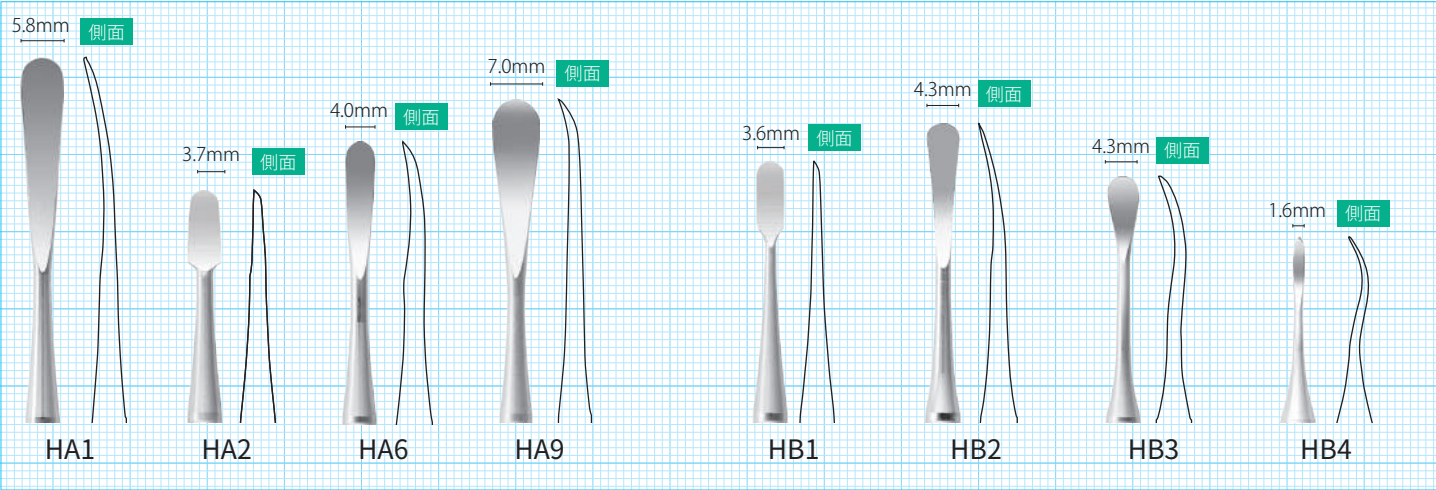

[骨膜/粘膜]

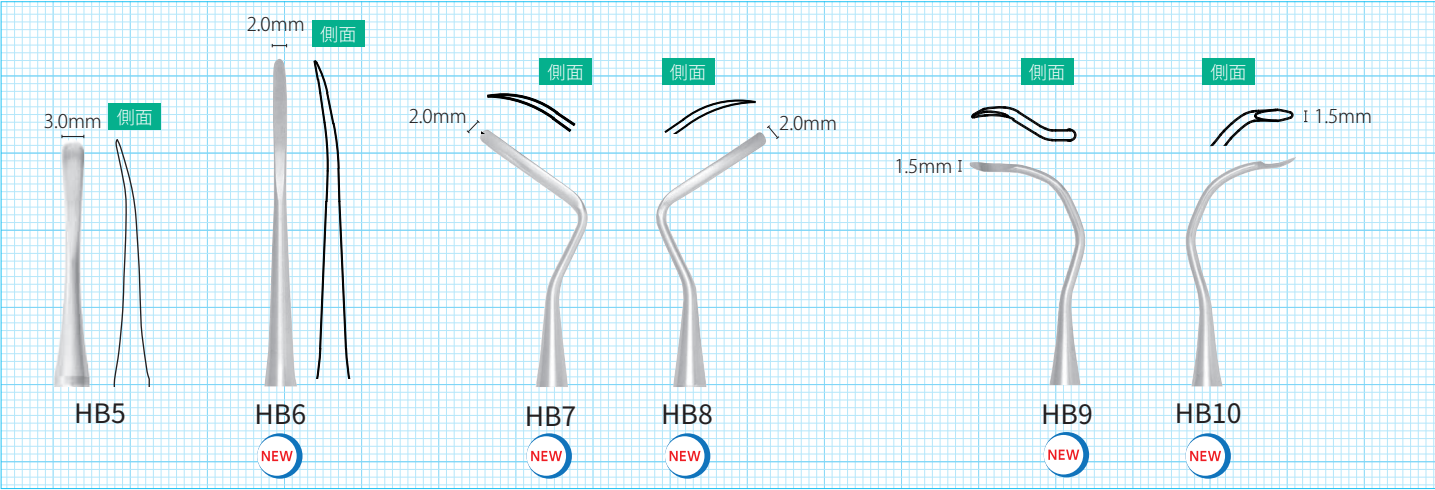


[骨膜/粘膜]

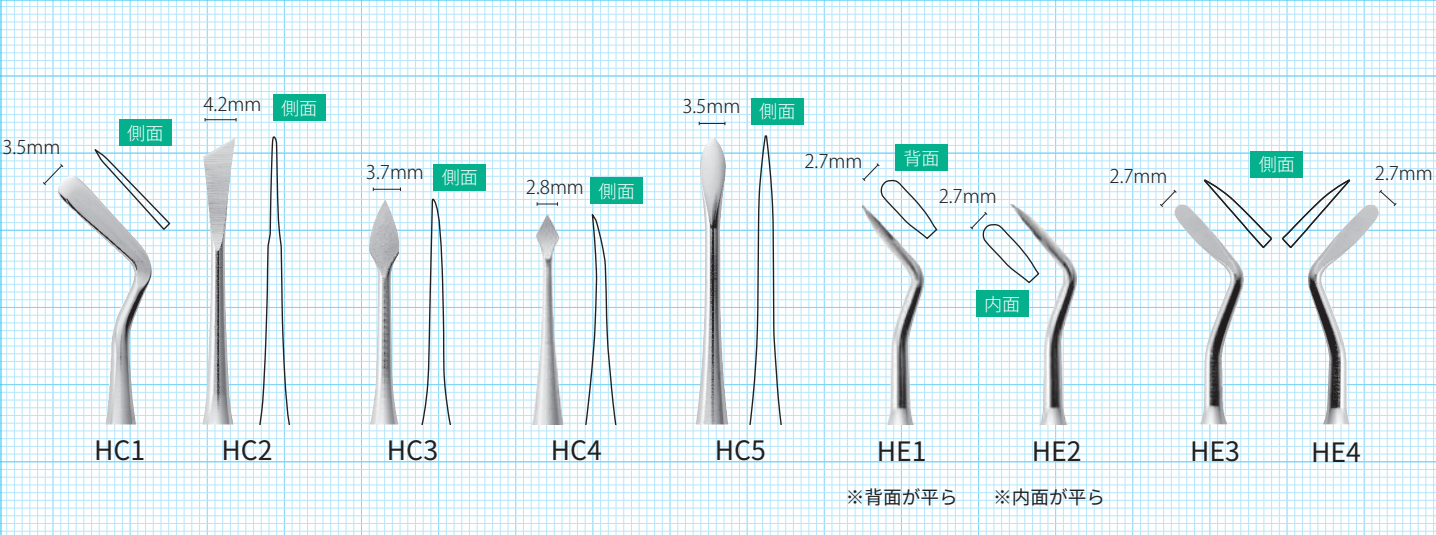

[剥離/搔爬]

[歯肉排除 圧排]

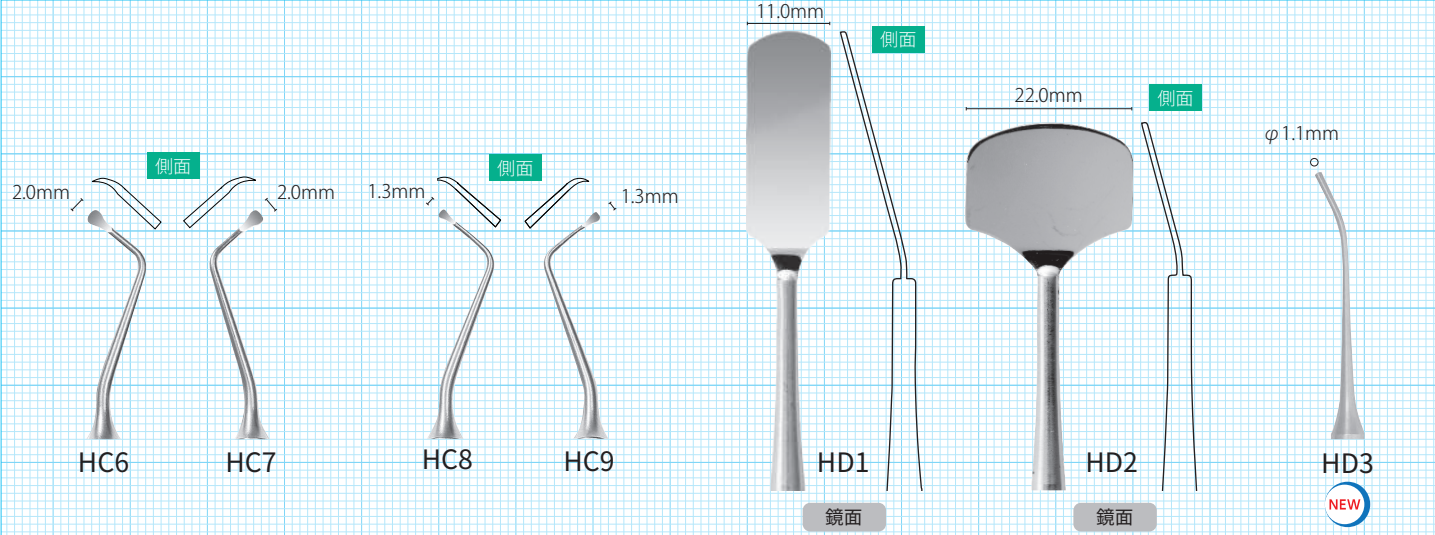




パターン 1
石川 知弘 先生 開発協力
医療法人社団 石川歯科 院長





[臨床動画]

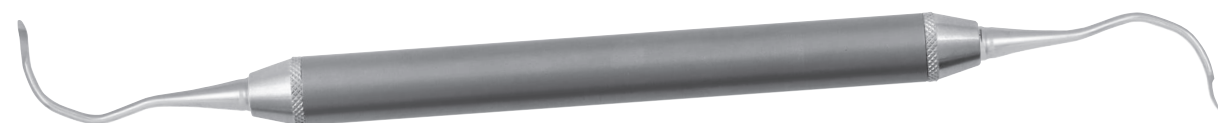

No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB9 + HB10



パターン 2
山口 文誉 先生 開発協力
山口歯科医院 院長






[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB6 + HD3



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB7 + HB8



パターン 3
小川 雄大 先生 開発協力
U デンタルオフィス恵比寿 院長





[臨床動画]



No.15000 剥離子オーダーシステム カラフィー + HB9 + HB10



パターン 4
瀧野 裕行 先生 タキノ歯科医院 理事長






No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB1 + HB3



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB3 + HC4



パターン 5
多保 学 先生 たぼ歯科医院 理事長
日本歯科大学附属病院 臨床准教授





[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB3 + HC4

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム



パターン 6
上田 秀朗 先生 上田塾主宰



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB4 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA2 + HB5



パターン 7
大森 有樹 先生 大阪 SJCD 会長 歯科勉強会大森塾主宰






No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB1 + HC1
(ハーシュフェルト)



パターン 8
保坂 均 先生 開発協力 日本歯周病学会 指導医・専門医





[臨床動画]

・頸部に4方向の角度が付与されたブレードが鋭利な骨膜剥離子です。



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HE1 + HE2



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HE3 + HE4



パターン 9
井原 雄一郎 先生 井原歯科クリニック 院長






No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB4 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC6 + HC7



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA9 + HD1

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム



パターン 10

石井 宏 先生 ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB2 + HC2
(ペリオスチール24G)



パターン 11

青井 良太 先生 開発協力 SBC (Surgical Basic Course) 主幹



・広範囲の歯肉を排除できます。

・歯肉排除用の組み合わせ。1本で大小揃い、術部の広さに合わせてスムーズに対応でき便利です。・術部確認のミラー機能も併用できます。



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB1 + HC1 (ハーシュフェルト)



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC6 + HC7



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC8 + HC9



No.15009 剥離子オーダーシステム 丸柄 Short + HD1 + HD2



パターン 12

尾野 誠 先生 四条烏丸歯科クリニック



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB5 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC8 + HC9



パターン 13

梶村 幸市 先生 ユアーズ歯科クリニック




No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA6 + HB2

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム



パターン 14

渥美 克幸先生 デンタルクリニック K 院長

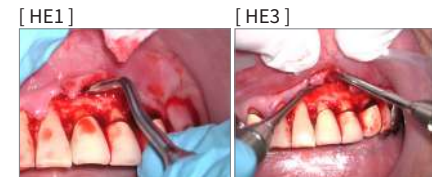

[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB5 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HE1 + HE2



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HE3 + HE4



パターン 15

奈良 嘉峰先生
茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長



[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB3 + HC3
(プーザー)



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA6 + HD1



No.15000 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB6 + HD3



パターン 16

中家 麻里 先生 なかや歯科 院長



[臨床動画]



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB4 + HB5

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム



パターン 17

増田 英人 先生 ますだ歯科医院 院長





【臨床動画】




No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB2 + HC4



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HA6 + HC3



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC6 + HC8

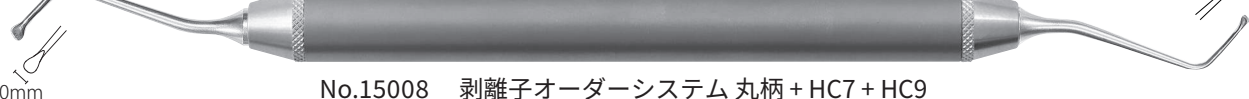


No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC7 + HC9



パターン 18

築山 鉄平 先生 つきやま歯科医院
専門医療クリニック天神 院長

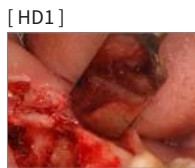



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB2 + HC2
(ペリオスチール24G)



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HB3 + HC4




No.15009 剥離子オーダーシステム 丸柄 Short + HA1 + HD1
(ブリチャード)



パターン 19

山本 松男 先生 昭和医科大学歯学部 歯周病学講座 教授



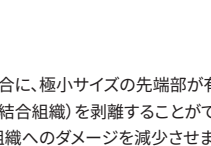



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC6 + HC7



No.15008 剥離子オーダーシステム 丸柄 + HC8 + HC9

・スプーン状の先端部には周囲300°に鋭いブレードが付いています。
・狭い歯間部等でも歯周組織に与えるダメージを抑えて剥離できます。
・鋭匙として狭い部分での不良肉芽の除去にも有用です。

・歯間が2mm程度の狭い場合に、極小サイズの先端部が有効。
歯肉弁の直下にある骨膜(結合組織)を剥離することができ、
狭い(血流の乏しい)歯肉組織へのダメージを減少させます。


・極小スプーン状の先端部は鋭匙としても有用。
クレーター状骨欠損部等でも骨を削除すること
なく、不良肉芽を掻き出すことができます。

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

粘膜剥離子



#13 コード No.15141 標準価格 12,000円

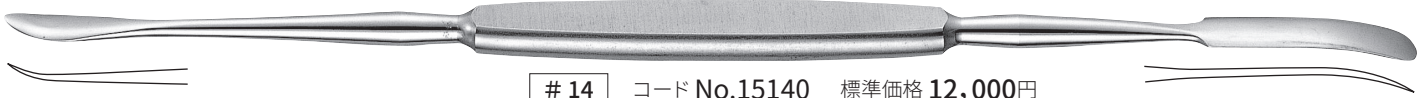


#14 コード No.15140 標準価格 12,000円



七浦型 コード No.14230 標準価格 11,000円

医療機器届出番号 11B1X1000642D013
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 粘膜剥離子

骨膜剥離子

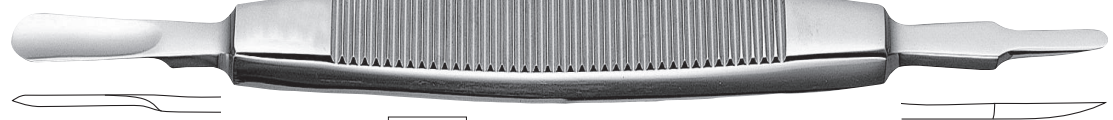


#13 コード No.15130 標準価格 12,000円



#9 コード No.15131 標準価格 12,000円

医療機器届出番号 11B1X1000642D012
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 骨膜剥離子

ディセクター

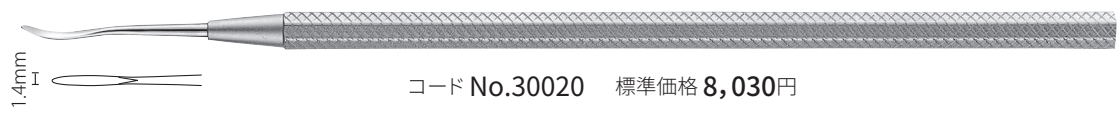

コード No.30020 標準価格 8,030円



写真提供：中家 麻里 先生
(なかや歯科 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000634D301
一般的名称 歯肉切除メス 販売名 ディセクター

剥離子 MS



#1 コード No.32341 標準価格 11,000円



#2 コード No.32342 標準価格 11,000円



写真提供：石井 宏 先生
(ペンシルバニア大学 非常勤講師
神奈川歯科大学 非常勤講師)



写真提供：安斉 昌照先生
(あんざい歯科医院 理事長)



【#2 臨床動画】

医療機器届出番号 11B1X1000642D016
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子 MS

剥離子オーダーシステム

HB6

HB7

HB9

開発協力

石川 知弘 先生
石川歯科小川 雄大 先生
U デンタルオフィス恵比寿

開発協力

山口 文誉 先生
山口歯科医院

HB9 HB10

- ・複屈曲な先端で頬舌的にアプローチが可能。
- ・小さな先端は歯間乳頭の剥離やトンネリングテクニックにも有効。

[HB9]



写真提供: 石川 知弘 先生 (石川歯科 院長)

[HB10]



[HB10]



写真提供: 小川 雄大 先生 (Uデンタルオフィス恵比寿 院長)

HB10

HD3

HB8

HB6

- ・骨膜・粘膜の剥離、歯肉圧排、排除に有効。
- ・先端幅は2.0mmと細く、下顎の前歯、歯間乳頭にも有効。

HD3

- ・剥離した歯間乳頭を反対側に押し出す。
- ・また袋状に剥離した歯肉 (パウチ) を持ち上げる際に有効。

[HB6]



[HD3]



写真提供: 山口 文誉 先生 (山口歯科 院長)

HB7 HB8

- ・骨膜・粘膜の剥離、歯肉圧排、排除に有効。
- ・先端のカーブが豊隆をよけ、術部へのアプローチが可能。
- ・臼歯部近遠心に有効。

[HB8]



写真提供: 山口 文誉 先生 (山口歯科 院長)

※詳細動画は6ページに掲載

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
 ※掲載製品の標準価格は、2026年7月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元

株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先

 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売

株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

<http://www.dental-plaza.com/>